

PHILIPS

sonicare

Sonic elektriskā
zobu birste

ProtectiveClean
4500

Iebūvēts spiediena sensors

2 tīrīšanas režīmi

1 BrushSync funkcija



HX6888/89



Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.

Uzlabo smaganu veselību līdz pat 100 % vairāk nekā parastā zobu suka.

Izjūtiēt atšķirību, pateicoties saudzīgai tīrīšanai ar spiediena sensoru, vienlaikus uzlabojot smaganu veselību līdz pat 100 % vairāk nekā ar parasto zobu suku.

Designed around you

- Aicinājums tīrīt zobus rūpīgi

Innovative technology

- Viegls atgādinājums tīrīt maigi un saudzīgi
- Zobu birstes uzgaļi maksimālam rezultātam un pacientu labsajūtai
- Savieno viedo zobu birstes rokturi ar viedajiem uzgaļiem
- Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās
- Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija

Improves patients' oral health

- Plombes, kroņi vai jutīgas zonas? Nav pamata uztraukumiem.

Uzlabo zobu tīrīšanu

- Clean režīms un smaganu kopšanas režīms Gum Care

Designed around your patient

- Lielisks veids, kā pierast pie savas jaunās zobu birstes


Izceltie produkti

Uzlabo smaganu veselību



InterCare sukas uzgalim ir īpaši gari, blīvi izvietoti augstas kvalitātes sariņi, kas piekļūst aplikumam dziļi zobu starpās. Ir klīniski pierādīts, ka šis uzgalis samazina smaganu asiņošanu un iekaisumu tikai divu nedēļu laikā.

Clean režīms un smaganu kopšanas režīms Gum Care

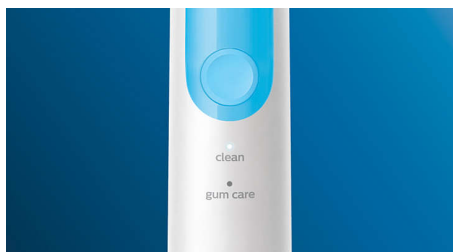

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties pievērst īpašu uzmanību aplikuma likvidēšanai vai uzlabot smaganu veselību — šī zobu birste piedāvās optimālo režīmu ikvienai vajadzībai. Clean režīms nodrošina izcilu tīrīšanas rezultātu, savukārt Gum Care režīmā zobu birste papildus darbojas vienu minūti īpaši saudzīgā režīmā, ļaujot jums saudzīgi masēt smaganas.

Drošs un saudzīgs



Varat būt pārliecināti, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.

Philips Sonicare tehnoloģija



Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

Pārāk liels spiediens?




Pacienti var pat nepamanīt, ka tīra zobus ar pārmērīgu spēku, bet to pamanīs viņu zobu birste. Līdzko uz smaganām tiks izdarīts pārmērīgs spiediens, zobu birste ar skaņas signālu aicinās spiedienu samazināt.

BrushSync tehnoloģija



Tehnoloģija ar mikročipu nosaka izmantoto gudru zobu birstes uzgali un sinhronizē to ar gudro zobu birstes rokturi. Gudrais rokturis un gudrie uzgaļi ir jaudīga kombinācija, kurā ļauj izveidot smart pāri un atgādina par smart uzgaļa nomaiņu.

Viedā nomaiņas atgādināšanas funkcija

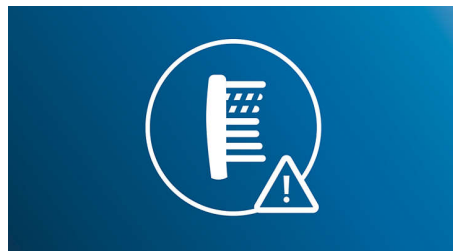


Visi zobu birstes uzgaļi ar laiku nolietojas. Philips tam ir radis risinājumu — viedā birstes uzgaļu atpazīšanas tehnoloģija nosaka, cik ilgi pacients ir lietojis konkrēto uzgali, kā arī to, cik spēcīgi ar to ir tīrīts. Kad būs pienācis laiks veikt uzgaļa nomaiņu, rokturī iedegsies gaismiņa un atskanēs īss skaņas signāls. Tādējādi pacienti var būt pārliecināti, ka birstes uzgalis vienmēr ir vislabākajā darba kārtībā.

Noderīgi taimeri



Vai jums nepieciešama elektriskā zobu birste ar taimeri? Mūsu QuadPacer tehnoloģija palīdz jums tīrīt katru mutes dobuma zonu tieši tik ilgi, cik tas būtu ieteicams, savukārt viedais taimeris informēs jūs, kad ir pagājušas ieteicamās zobu tīrīšanas 2 minūtes.

Easy-start programma

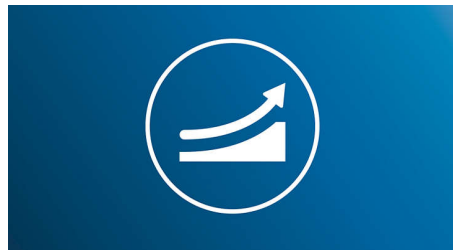

Sākot kaut ko jaunu, vispirms ir nepieciešams iepazīšanās periods. Tādēļ mūsu Easy-Start programma sniedz jums iespēju pirmās 14 tīrīšanas reizēs pakāpeniski un saudzīgi palielināt tīrīšanas jaudu.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: 110–220 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2 nedēļām

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Balta un zila

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārsa lietošana

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 ic InterCare, kompakts

Rokturis: 1 ProtectiveClean

Lādētājs: 1

Tīrīšanas veikspēja

Veselības ieguvumi: Samazina caurumu veidošanās risku

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Smaganu kopšana: Saudzīgi masē smaganas

Smart sensoru tehnoloģija

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomaiņas brīdi

