

PHILIPS

sonicare

Sonic elektriskā
zobu birste

ExpertClean 4700

Iebūvēts spiediena sensors
2 režīmi, 3 intensitātes līmeņi
1 BrushSync funkcija
ar dezinfekcijas līdzekli



HX6483/53



Tīrāki zobu. Saudzīga tīrīšana.

Likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Izjūti atšķirību, ko rada saudzīga tīrīšana ar spiediena sensoru, kas likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Proven to improve oral health

- Vairāk saskares ar virsmu aplikuma likvidēšanai

Innovative technology

- Viegls atgādinājums tīrīt maigi un saudzīgi
- Zobu birstes uzgaļi maksimālam rezultātam un pacientu labsajūtai
- Savieno viedo zobu birstes rokturi ar viedajiem uzgaļiem
- Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija

Uzlabo zobu tīrīšanu

- Clean režīms un smaganu kopšanas režīms Gum Care

Designed around your patient

- Lielisks veids, kā pierast pie savas jaunās zobu birstes
- Aicinājums tīrīt zobus rūpīgi

UV dezinf. līdzekl. palīdz iznīcināt bakt. uz birstes uzgaļiem

- Atstarotājs raida dezinficējošu gaismu uz birstes uzgaļiem

Izceltie produkti

Likvidē līdz 10x vairāk aplikuma*




C3 Premium Plaque Control birstes uzgalis sniedz mūsu dziļākās tīrīšanas iespēju. Pateicoties mīkstajām un elastīgajām sānu malām, sariņi pielāgojas katra zoba virsmas formai, nodrošinot 4 reizes lielāku saskarsmi ar virsmu**, un likvidē līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma no grūti aizsniedzamām vietām*.

Pārāk liels spiediens?



Pacienti var pat nepamanīt, ka tīra zobus ar pārmērīgu spēku, bet to pamanīs viņu zobu birste. Līdzko uz smaganām tiks izdarīts pārmērīgs spiediens, zobu birste ar skaņas signālu aicinās spiedienu samazināt.

Clean režīms un smaganu kopšanas režīms Gum Care

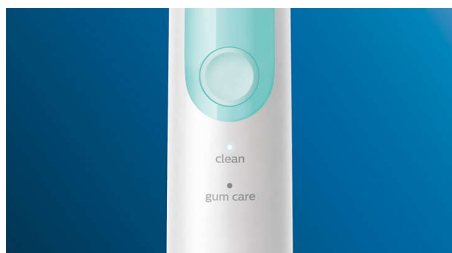


Neatkarīgi no tā, vai vēlaties pievērst īpašu uzmanību aplikuma likvidēšanai vai uzlabot smaganu veselību — šī zobu birste piedāvās optimālo režīmu ikvienai vajadzībai. Clean režīms nodrošina izcilu tīrīšanas rezultātu, savukārt Gum Care režīmā zobu birste papildus darbojas vienu minūti īpaši saudzīgā režīmā, ļaujot jums saudzīgi masēt smaganas.

BrushSync tehnoloģija



Tehnoloģija ar mikročipu nosaka izmantoto gudru zobu birstes uzgali un sinhronizē to ar gudro zobu birstes rokturi. Gudrais rokturis un gudrie uzgaļi ir jaudīga kombinācija, kurā ļauj izveidot smart pāri un atgādina par smart uzgaļa nomaiņu.

Viedā nomaiņšanas atgādināšanas funkcija

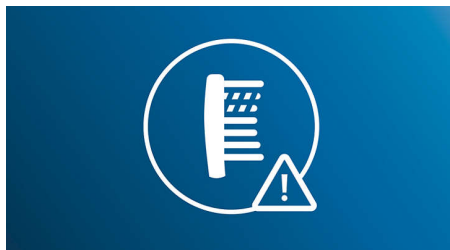

Visi zobu birstes uzgaļi ar laiku nolietojas. Philips tam ir radis risinājumu — viedā birstes uzgaļu atpazīšanas tehnoloģija nosaka, cik ilgi pacients ir lietojis konkrēto uzgali, kā arī to, cik spēcīgi ar to ir tīrīts. Kad būs pienācis laiks veikt uzgaļa nomaiņu, rokturī iedegsies gaismiņa un atskanēs īss skaņas signāls. Tādējādi pacienti var būt pārliecināti, ka birstes uzgalis vienmēr ir vislabākajā darba kārtībā.

Easy-start programma



Sākot kaut ko jaunu, vispirms ir nepieciešams iepazīšanās periods. Tādēļ mūsu Easy-Start programma sniedz jums iespēju pirmās 14 tīrīšanas reizēs pakāpeniski un saudzīgi palielināt tīrīšanas jaudu.

Noderīgi taimeri



Philips QuadPacer tehnoloģija palīdz pacientiem tīrīt katru mutes dobuma zonu tieši tik ilgi, cik tas būtu ieteicams, savukārt viedais taimeris informē, kad ir pagājušas ieteicamās zobu tīrīšanas divas minūtes.

Philips Sonicare tehnoloģija



Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

Dezinficējoša gaisma



UV dezinfekcijas līdzekļa atstarotājs raida dezinficējošu gaismu ap visu birstes uzgali, sniedzot optimālus rezultātus.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: 110–220 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2 nedēļām

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Balta un piparmētru

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 C3 Premium Gum Care, 1 W2c Optimal White, kompakts

Rokturis: 1 ProtectiveClean

Lādētājs: 1

UV dezinfekcijas līdzeklis: 1

Tīrīšanas veikspēja

Sniegums: Likvidē līdz 10x vairāk aplikuma*

Veselības ieguvumi: Samazina caurumu veidošanās risku

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Taimeris: Quadpacer un SmartTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Režīmi

3 intensitātes pakāpes: Zema, Vidēja, Augsta

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Smaganu kopšana: Saudzīgi masē smaganas

Smart sensoru tehnoloģija

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomaiņas brīdi

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens

