

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

ProtectiveClean
5100

Integrierter Drucksensor

3 Putzprogramme

BrushSync Funktion

mit Reinigungsgerät



HX6850/57



Weißere Zähne. Ganz sanft.

Hellt Zähne in nur einer Woche auf

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Ihre Zähne in nur einer Woche weißer werden.

Für eine gute Mundgesundheit

- Weißere Zähne in nur einer Woche

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Förderung einer gründlichen Reinigung
- Macht das Reisen einfacher
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Innovative Technologie

- Informiert dich, wenn du zu viel Druck ausübst
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Wählen Sie aus 3 Putzprogrammen

Kills germs on brush heads

- UV-Reinigungsgerät tötet bis zu 99 % der Bakterien und Viren*** ab


Besonderheiten

Natürlich weiße Zähne



Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erreichen. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

Drei Putzprogramme

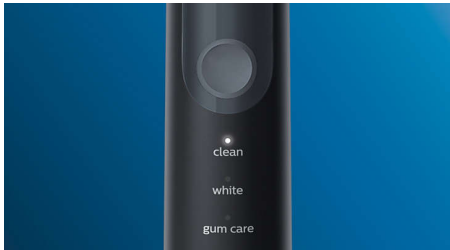

Dank dieser Zahnbürste mit drei Putzprogrammen können Sie Ihre Zahnreinigung an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das Programm "Clean" (Reinigen) ist der Standardmodus für eine hervorragende Reinigung. Das Programm "White" (Weiß) ist der ideale Modus für das Entfernen von Verfärbungen auf der Zahnoberfläche. Das Programm "Gum Care" (Zahnfleischpflege) bietet eine zusätzliche Putzminute bei geringerer Intensität. So können Sie das Zahnfleisch sanft massieren.

UV-Reinigungsgerät im Lieferumfang enthalten



Halten Sie Ihre Sonicare Bürstenköpfe sauber mit dem speziell entwickelten Philips UV-Reinigungsgerät. Legen Sie einfach 1 bis 2

Bürstenköpfe hinein und drücken Sie die Taste. Es dauert nur 10 Minuten. Tötet bis zu 99 % der Bakterien und Viren ohne Chemikalien.***

Überwachen deinen Putzdruck



Zu hartes Zähneputzen kann Zähne und Zahnfleisch schädigen. Um dies zu vermeiden, gibt deine Philips Sonicare ProtectiveClean ein sanftes, pulsierendes Geräusch aus, das dich daran erinnert, den Druck zu reduzieren.

BrushSync Technologie




Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück – eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton Sie darauf aufmerksam. So können Sie sicher sein, dass Ihr Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

Hilfreiche Timer

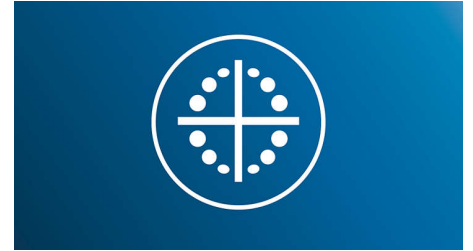

Du möchtest eine elektrische Zahnbürste mit Timer? Unser 4-Quadranten-Timer teilt dir mit, wenn du ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht hast, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann du die empfohlenen zwei Minuten erreicht hast.

Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Handliches Reiseetui und Ladegerät



In unserem hochwertigen Reiseetui können Sie Ihre Zahnbürste hygienisch aufbewahren, und mit unserer kompakten Ladestation geht Ihnen auch unterwegs nie der Strom aus. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden, doch das Ladegerät ist nur das Ticket für längere Reisen.

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):
14 Tage**

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz/Grau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte
Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück-Kompatibilität: Einfach
aufsteckbare Bürstenköpfe

Bürstenkopf-Erkennung: Wählt das optimale
Putzprogramm

Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet
auf

Artikel enthalten

Handstück: 1 ProtectiveClean

Bürstenköpfe: 1 W2 Optimal White

Ladegerät: 1

Reiseetui: 1

UV-Reinigungsgerät: 1

Reinigungsleistung

Leistung: Tötet bis zu 99 % der Bakterien, und
Viren***

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Verringert
Kariesbildung

Weißer Zähne: Hellt Zähne in 1 Woche auf

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-
Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur
Warnung des Benutzers

Reinigungsgerät: Zur Reinigung von Sonicare
entwickelt, Bürstenköpfe, Schaltet sich danach
automatisch aus, 10-Minuten-Zyklus, Einfach
und sicher zu bedienen, funktioniert auf
Knopfdruck, Integriertes Sonicare Zahnbürsten,
Ladegerät**

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem
Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie
immer, wann, Sie die Bürstenköpfe
austauschen sollten



* Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine
Handzahnbürste

** nicht kompatibel mit DiamondClean, DiamondClean
9000 oder DiamondClean Smart

** basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei
Minuten pro Tag

*** H.A., E. coli, S. mutans, HSV-1. Zur Verwendung mit
InterCare (I), DiamondClean (W2), Sensitive (S),
ProResults (C1) und Premium Plaque Control (C3).