

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste mit App

DiamondClean Smart

Personalisiertes Coaching

Intelligente  
Bürstenkopfsensoren

Smart-Bürstenkopferkennung

4 Putzprogramme,  
3 Intensitätsstufen



HX9901/63



## Unsere bislang beste Zahnbürste, für eine vollständige Mundpflege

Gutes Gewissen dank 100 % Reichweite

Die DiamondClean Smart ist unsere beste Zahnbürste für eine vollständige Mundpflege. Mit dem Hochleistungsbürstenkopf können Sie sich auf alle Bereiche der Mundpflege konzentrieren, während unsere SmartSensor Technologie personalisiertes Feedback und Tipps bereitstellt.

### Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\* für eine gründliche Reinigung

### Personalisierte Tipps innerhalb der App für perfektes Putzen

- Führt Sie beim Putzen und weist auf ausgelassene Bereiche hin
- Bringt Sie zurück zu ausgelassenen Stellen für eine 100 %ige Abdeckung
- Pflegen Sie Problembereiche besser
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Vermeiden Sie zu starkes Scheuern

### Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus
- Holen Sie immer das Beste aus Ihrem Bürstenkopf
- Wählen Sie aus 4 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen


# Besonderheiten

## Verabschieden Sie sich von Plaque




Stecken Sie den C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz auf, und erleben Sie unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt\*\*\* und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen\* zu erzielen.

## Erreichen Sie jede Stelle

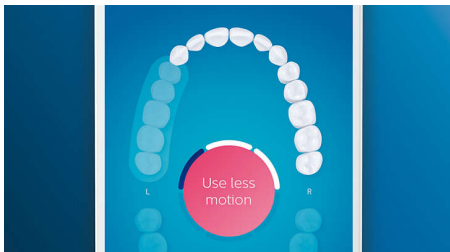


Die Philips Sonicare App zeigt Ihnen, wann die Reinigung gründlich war, und bringt Ihnen bei, wie Sie besser und genauer putzen.

## TouchUp-Funktion

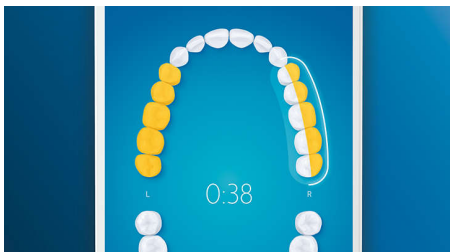


Die TouchUp-Funktion in Ihrer App zeigt Ihnen, ob Sie Stellen beim Bürsten ausgelassen haben. So können Sie diese erneut bürsten und darauf vertrauen, dass Sie jedes Mal eine vollständige Reinigung erzielen.

## Intelligente Erinnerungsfunktionen

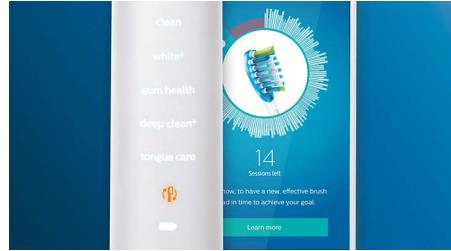


Bürstenköpfe nutzen sich im Laufe der Zeit ab und entfernen daher Plaque weniger effektiv. Unsere Smart-Bürstenkopferkennung erinnert Sie rechtzeitig daran, Ihren Bürstenkopf zu ersetzen. Ihre Zahnbürste zeichnet auf, wie lange und mit wie viel Druck Sie mit jedem Bürstenkopf geputzt haben, und gibt Ihnen Bescheid, wenn der Bürstenkopf ausgetauscht werden sollte. Sie können die Lebensdauer Ihrer Bürstenköpfe auch in der Philips Sonicare App verfolgen und sogar Ersatz bestellen, damit Ihnen die Bürstenköpfe nie ausgehen.

## Fokusbereiche und Zielsetzung

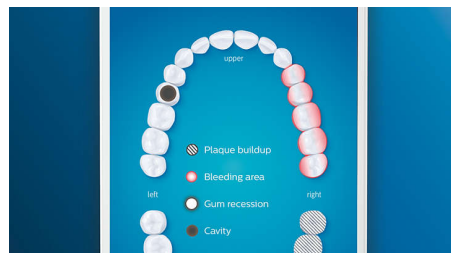

Ihr Zahnarzt hat Sie auf Problembereiche hingewiesen? Wir markieren diese in der App auf der 3D-Karte Ihres Mundes und erinnern Sie daran, besonders auf diese Bereiche zu achten.

## Zu viel Druck?

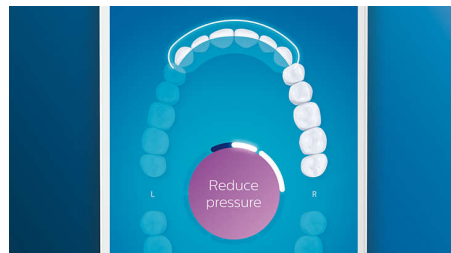

Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie zu hart putzen, aber Ihre DiamondClean Smart wird dies tun. Wenn Sie zu viel Druck ausüben,


blinkt der Leuchtring am Ende des Handstücks. So werden Sie sanft daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Bürstverhalten.

## Einfach einfach



Bei einer elektrischen Zahnbürste überlassen Sie der Zahnbürste die Arbeit. Wir haben einen Drucksensor in das Handstück integriert, der Sie sanft daran erinnert, keine potenziell schädlichen Putzbewegungen auszuführen. So verbessern Sie Ihre Technik und erreichen eine sanftere, effektivere Reinigung.

## Smart-Bürstenkopferkennung

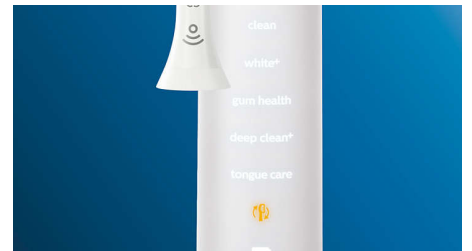

Sie fragen sich, welches Putzprogramm und welche Intensitätsstufe Sie verwenden sollten? Keine Sorge! Ein Mikrochip im Bürstenkopf meldet den verwendeten Bürstenkopf an die DiamondClean Smart. Wenn Sie also beispielsweise einen Bürstenkopf für die Zahnfleischpflege aufstecken, kann die Zahnbürste das optimale Putzprogramm sowie die Intensität wählen und eine sanfte und effektive Zahnfleischpflege ermöglichen. Sie müssen nur noch den Ein-/Aus-Schalter drücken.

# Daten

## Anschlüsse

**Kabellose Bluetooth®-Technologie:**  
Verbundene Zahnpflege-App

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar  
**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):**  
14 Tage\*\*\*\*\*  
**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Rose Gold

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte  
Garantie

## Kompatibilität

**Android-Kompatibilität:** Android Smartphones,  
Bluetooth 4.0-fähige Tablets  
**iOS-Kompatibilität:** iPad der 3. Generation  
oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7  
oder höher

## Benutzerfreundlichkeit

**Akkuanzeige:** Beleuchtetes Symbol zeigt  
Akkustand an  
**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design  
**Anzeige:** Beleuchtetes Display  
**Handstück-Kompatibilität:** Einfach  
aufsteckbare Bürstenköpfe  
**Bürstenkopf-Erkennung:** Wählt das optimale  
Putzprogramm  
**Erinnerungsfunktion:** Stellt jederzeit optimale  
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet  
auf

## Artikel enthalten

**Handstück:** 1 DiamondClean Smart  
**Bürstenköpfe:** 1 C3 Premium zum Plaque-  
Schutz  
**Ladeglas:** 1  
**Ladestation:** 1

## Reinigungsleistung

**Leistung:** Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*  
**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000  
Bürstenkopfbewegungen/Min.  
**Vorteile für die Gesundheit:** Für gesünderes  
Zahnfleisch  
**Timer:** BrushPacer und 2-Minuten-Timer  
**Druck-Feedback:** Ring leuchtet violett,

Vibrierendes Handstück zur Warnung des  
Benutzers  
**TouchUp:** Stellt 100 %ige Abdeckung sicher

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung  
**3 Intensitätsstufen:** Niedrig, Mittel, Hoch  
**Deep Clean+:** Für eine besonders gründliche  
Reinigung  
**Gesundes Zahnfleisch:** Pflegt Backenzähne  
besonders gründlich  
**White+:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

## Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem  
Druck  
**Positionssensor:** Verfolgt und verbessert die  
Abdeckung  
**Scheuersensor:** Hinweise zur Vermeidung von  
Scheuern  
**3D-Karte Ihres Mundes:** Hebt Problembereiche  
hervor  
**TouchUp:** Weist auf ausgelassene Stellen hin

## Software-Support

**Softwareaktualisierungen:** Philips bietet für  
2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende  
Softwareaktualisierungen an.



\* Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine  
Handzahnbürste  
\*\* im Vergleich zu einer Handzahnbürste mit einer  
führenden Zahnpasta für weiße Zähne  
\*\* im Vergleich zur DiamondClean  
\*\*\*\* im "Gum Health"-Putzprogramm im Vergleich zu  
einer Handzahnbürste nach 2 Wochen  
\*\*\*\*\* nach 3 Tagen im "White+"-Putzprogramm im  
Vergleich zu einer Handzahnbürste  
\*\*\*\*\* basierend auf zwei Zahnputzyklen von jeweils zwei  
Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm