

PHILIPS

sonicare

Sonic elektriskā
zobu birste

FlexCare Platinum

3 režīmi, 3 intens. pakāpes

2 zobu birstes uzgaļi

Ar spiediena sensoru



HX9112/12

Rūpīga, saudzīga tīrīšana

10x labāka aplikuma notīrīšana un veselīgākas smaganas*

Izmantojot FlexCare Platinum, pat rūpīgākā tīrīšana ir pietiekami saudzīga, lai aizsargātu jūsu zobus un smaganas. Pateicoties AdaptiveClean birstes uzgaliņam un intuitīvajam spiediena sensoram, varat maksimāli likvidēt aplikumu, netraumējot mutes dobumu tīrīšanas laikā.

Proven to improve oral health

- Uzlabo smaganu veselību tikai 2 nedēļās
- Likvidē līdz pat 10 x vairāk aplikuma ar AdaptiveClean*
- Droša un saudzīga tīrīšana, kas nodrošina zobu un smaganu veselību

Designed around you

- Taimeri nodrošina, ka zobi netiks tīrīti mazāk par 2 minūtēm
- Ilgs bateriju darbības laiks un ceļojumu futrālis
- Brīdina, ja pārāk stipri uzspiežat

Provides a superior clean

- AdaptiveClean birstes uzgaliņš izliecas gar smaganu līniju
- Deep Clean režīms tiek galā ar jūsu problēmzonām

Uzlabo zobu tīrīšanu

- Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina efektīvu un saudzīgu tīrīšanu
- Izvēlieties kādu no 3 režīmiem un 3 intensitātes iestatījumiem


Izceltie produkti

Likvidē līdz pat 10 x vairāk aplikuma




Uzlieciet AdaptiveClean birstes uzgali un tīriet zobus pamatīgāk nekā jebkad. Birstes saskare ar zobu virsmu ir uzlabota 4 reizes**, tāpēc grūti aizsniedzamās vietās aplikums tiek likvidēts 10 reizes labāk*, nodrošinot īpaši pamatīgu tīrīšanu gar smaganu līniju un zobstarpās.

Smaganu kopšana

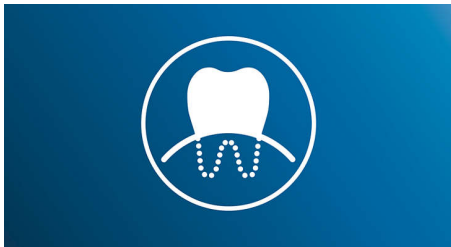

FlexCare optimālā tīrīšana 2 nedēļu laikā padara smaganas veselīgākas. Tiek likvidēts līdz 7 reizēm vairāk aplikuma gar smaganu līniju nekā ar parasto zobu birsti, un jūs iegūsiet veselīgāko smaidu.

3 režīmi, 3 intensitātes iestatījumi

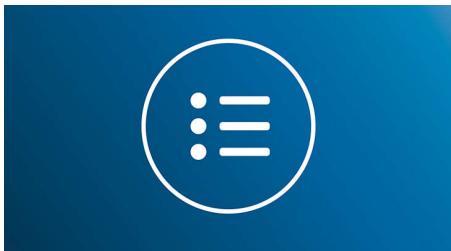


FlexCare Platinum Connected nodrošina patiešām dziļu tīrīšanu. Ar 3 intensitātes iestatījumiem zobus var tīrīt intensīvāk, savukārt 3 darbības režīmi ļauj pielāgot tīrīšanas procesu individuālām vajadzībām. Tīrīšanas režīms rūpīgai ikdienas tīrīšanai, baltināšana — plankumu likvidēšanai uz zobu virsmām un dziļā tīrīšana — īpaši svaigai sajūtai.

Īpaši dziļa tīrīšana



Izmantojot dziļās tīrīšanas režīmu, jūs varat papildus rūpīgāk notīrīt īpašas zonas. Mēs apvienojām birstes uzgala unikālo kustību un pagarinātu 3 minūtes ilgu tīrīšanas laiku, lai nodrošinātu jūsu zobiem patiešām pamatīgu tīrīšanu.

Pārāk liels spiediens?

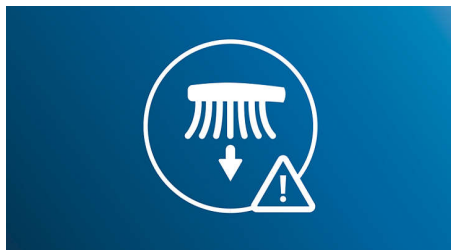


Jūs varbūt nepamanīsiet, ja spiedīsiet zobu birsti pārāk stipri, bet FlexCare Platinum to konstatēs. Ja spiediens būs pārāk spēcīgs, zobu birstes rokturis viegli pulsēs. Šī pulsācija atgādina samazināt spiedienu un ļaut birstes uzgalam veikt savu darbu. 7 no 10 cilvēkiem atzīst, ka šī funkcija palīdz tīrīt zobus pareizāk.

Philips Sonicare tehnoloģija




Spēcīgas Sonic vibrācijas saputo zobu pastu aplikumu likvidējošos burbuļos, un ievirza šos burbuļus dziļi zobu starpās un gar smaganu līniju. Vienlaikus jūsu zobi izjutīs 62 000 saudzīgas, bet efektīvas zobu birstes kustības. 2 minūšu laikā zobi saņems tik daudz kopšanas, cik ar manuālu tīrīšanu ir iespējams sasniegt mēneša laikā.

Līdz 2x veselīgāki zobi

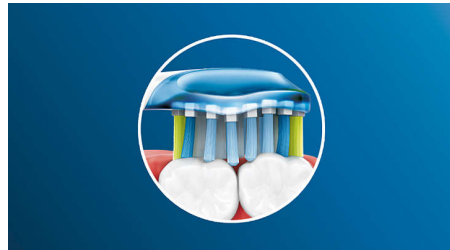

Uzlieciet AdaptiveClean birstes uzgali un tīriet zobus īpaši pamatīgi un saudzīgi, padarot smaganas 2 reizes veselīgākas nekā ar parasto zobu birsti. Mikstas gumijas maliņas pielāgojas katrai zobu un smaganu kontūrai, lai absorbētu pārmērīgu spiedienu. Tādējādi sariņi var iesniegties dziļi zobstarpās un ērti, efektīvi un pamatīgi iztīrīt zobus.

QuadPacer un Smartimer

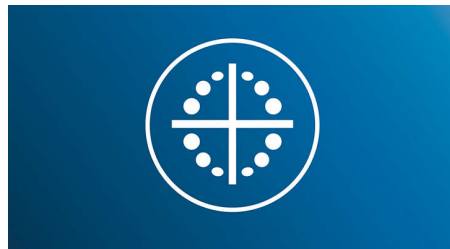

Kārtīgai zobu tīrīšanai nepieciešamas tikai 2 minūtes. QuadPacer norāda, cik ilgi jātīra katra mutes daļa, bet Smartimer signāls atskan, kad tīrīšanas laiks beidzas. Tādējādi zobu tīrīšana ir plānveidīga, efektīva un precīza.

Pārliecināta tīrīšana



Neatkarīgi no individuālām vajadzībām jūs varat nešaubīties, ka zobu tīrīšana ar FlexCare Platinum ir droša. Mūsu Sonic tehnoloģija ir piemērota izmantošanai ar tiltiņiem, plombām, kroniem un venīriem un to var lietot pat smaganu sasilšanu ārstēšanai ikdienā.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

Tehnikā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 3 nedēļām**

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Šifera pelēks

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Displejs: Izgaismots displejs

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 3 nedēļām***

Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standarts

Ceļojumu futrālis: 1

Rokturis: 1 FlexCare Platinum

Lādētājs: 1

Tīrīšanas veiktspēja

Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās

Sniegums: Likvidē līdz 10x vairāk aplikuma*

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Spiediena sensors: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Balinošās īpašības: Palīdz dabiski notīrīt plankumus

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

Režīmi

3 intensitātes pakāpes: Zema, Vidēja, Augsta

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Rūpīga tīrīšana: Atsvaidzinošai un rūpīgai tīrīšanai

Balta: Notīra aplikumu

