



Philips Sonicare AirFloss
Interdentalna četkica s
punjivom baterijom

s jednom mlaznicom



HX8221/02

Ne čistite zube koncem? U tom slučaju, koristite AirFloss.

Uklanja naslage s mesta do kojih četkica ne dopire

Za one koji ne čiste zube koncem redovito, AirFloss predstavlja jednostavan način početka čišćenja područja između zuba. AirFloss se može koristiti s vodicom za ispiranje usta ili vodom te ima jedinstvenu tehnologiju mlaza zraka i mikro kapi koja olakšava uklanjanje naslaga s teško dostupnih mesta.

Improves oral health

- Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna
- Pomaže u sprječavanju karijesa između zuba
- Uklanja do 5 puta više naslaga između zuba*

Achieve a 30-second clean

- Čisti cijela usta za samo 30 sekundi
- Usmjerite. Pritisnite. Očistite!

Easy to use

- Tehnologija za čišćenje dodirom
- Vrh za navođenje osigurava odgovarajući položaj
- Udobna ergonomski drška


Helps build a healthy habit

- Jednostavan način za poboljšanje čišćenja područja između zuba

PHILIPS
sonicare

Istaknute znač.

Tehnologija mlaza zraka i mikro kapi

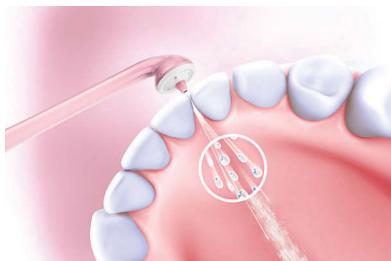

AirFloss koristi jedinstvenu tehnologiju mlaza zraka i mikro-kapi koja omogućava prodiranje zraka pod tlakom i vode ili vodice za ispiranje usta u područje između zuba. Gumb za aktivaciju jednim dodirom koristi se jednostavno poput tipke miša.

Čišćenje u roku od 30 sekundi



Uz AirFloss čišćenje cijele usne šupljine traje samo 30 sekundi. Jednostavno jednom pritisnite gumb za jedan mlaz, a zatim pomaknite i ponovite. Kako biste koristili novu značajku automatskog mlaza, zadržite gumb i pomičite vrh za navođenje s jednog mesta na drugo. Mlaz će se automatski aktivirati svake sekunde.

Zdravije desni



Sonicare AirFloss klinički dokazano poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna.

Spremnik koji se lako puni



Spremnik na držci napunite vodicom za ispiranje usta ili vodom za osvježavajuće čišćenje, a zatim usmjerite i aktivirajte mlaz. Spremnik sadrži dovoljno tekućine za do dvije uporabe.

Vrh za navođenje




Tanki zakrivljeni vrh za navođenje i mlaznica olakšavaju pronalaženje odgovarajućeg položaja. Samo prelazite uzduž površine zuba blizu ruba desni dok vrh ne sjedne u prostor između zuba.

Ergonomска drška



Dizajniran za lako pomicanje u uskim prostorima, AirFloss ima udobnu ergonomsku dršku čija površina nije skliska.

Pomaže u sprječavanju karijesa

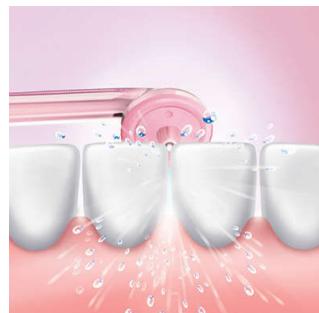

Nježno mlazom uklanjajući naslage koje ste propustili četkanjem, Sonicare AirFloss pomaže u sprječavanju karijesa u prostoru između zuba.

Uklanja više naslaga



Čišćenje prostora između zuba važan je dio oralne higijene. Sonicare AirFloss koristi zrak i mikrokapljice te uklanja do 5x više naslaga između zuba no što ih možete ukloniti četkanjem.

Jednostavan početak



Čišćenje područja između zuba vrlo je važno za oralno zdravje. AirFloss pruža jednostavan način čišćenja dublje između zuba, čime vam pomaže da razvijete zdravu naviku. Nakon tri mjeseca uporabe aparata AirFloss, 96 % osoba koje nisu redovito koristile konac za zube nastavilo je koristiti AirFloss četiri ili više dana tjedno.

Specifikacije

Snaga

- Napon: Višenaponski punjač

Tehničke specifikacije

- Baterija: Može se puniti
- Vrijeme rada: Mlaznicu je potrebno zamijeniti 6 mjeseci
- Vrsta baterije: Linij-ionska
- Vrijeme punjenja: 24 sata za potpuno punjenje

Dizajn i završna obrada

- Boja: Ružičasta
- Boja mlaznice: Ružičasta s bijelim vrhom

Jednostavnost uporabe

- Indikator baterije: Bljeskanjem naznačuje nisku razinu baterije
- Drška: Tanak ergonomski dizajn

- Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja
- Trajanje baterije: Do 3 tjedna kada je potpuno napunjeno

Predmeti u kompletu

- Punjač: 1 višenaponski punjač
- AirFloss mlaznica: 1
- Držač za mlaznicu: 1

Radne značajke čišćenja

- Značajka automatskog mlaza: Čisti cijela usta u roku od 30 sekundi
- Mlaznice: Za najbolje rezultate mijenjajte svakih 6 mjeseci
- Prednosti za zdravlje: Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna
- Rad: Uklanja do 5 puta više naslaga*



Datum izdavanja
2024-02-18

Verzija: 5.0.2

EAN: 87 10103 68992 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](#)

* u odnosu na četkanje samo običnom četkicom