

PHILIPS

sonicare



Sonisk eltandborste

ProtectiveClean 4300

Inbyggd trycksensor

Ett rengöringsläge

1 st BrushSync-funktion

Resefodral



HX6800/35

Renare tänder. Fint ska det vara.

Tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste

Känn skillnaden mellan en skonsam rengöring med vår trycksensor medan du tar bort upp till sju gånger mer plack än med en manuell tandborste

Ger bevisat bättre munhälsa

- Ta bort upp till 7x mer plack med vårt InterCare-borsthuvudet*
- Säker och skonsam för känsliga områden, ortodonti och tandbehandlingar

Utformad för dig

- Du kommer in i Philips Sonicare-rutinen med hjälp av vårt mjukstartsprogram
- Uppmuntran att borsta noggrant
- Gör resan enklare för dig

Innovativ teknik

- Meddelar dig om du trycker för hårt
- Lär dig när det är dags att byta ut borsthuvudena
- Ansluter det smarta borsthandtaget och smarta borsthuvuden
- Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Funktioner

Ta bort upp till sju gånger mer plack



Klicka på våra InterCare-borsthuvuden och förbättra munhälsan på bara 2 veckor. Extra långa borst hjälper till att ta bort mer plack på svåråtkomliga ställen och mellan tänderna för ett friskt tandkött.

Övervaka borsttrycket



Om du borstar för hårt kan tänder och tandkött skadas. För att förhindra detta avger Philips Sonicare ProtectiveClean ett försiktigt pulserande ljud för att påminna dig om att lätta på trycket.

Säkert och skonsamt



Du får en säker borstningsupplevelse: vår sonic-teknik är lämplig för användning med tandställning, fyllningar, kronor, och fasader, och hjälper till att förhindra hål och förbättra munhälsan.

Philips Sonicare-teknik




Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.

Påminnelse om att byta BrushSync



Alla borsthuvuden slits ut med tiden. Men med vår BrushSync-teknik ser du hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat. När det är dags att byta ut det lyser handtaget och en kort ljudsignal meddelar dig. På så sätt kan du vara säker på att borsthuvudet gör ett bra jobb.

Praktiska timers

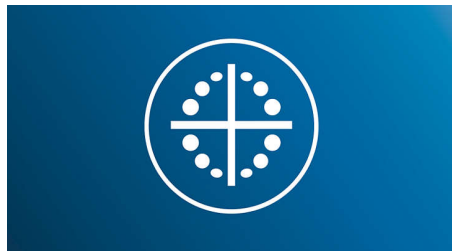


Behöver du en eltandborste med en timer? Vår QuadPacer informerar dig när du har lagt ned precis rätt mängd tid på rengöring av alla tänder i munnen medan vår Smartimer informerar om när du har borstat i de rekommenderade två minuterna.

BrushSync-teknik



En mikrochip-aktiverad teknik som känner av och synkroniserar det smarta borsthuvudet med det smarta handtaget. Det smarta handtaget och smarta borsthuvudet är en kraftfull kombination som aktiverar påminnelse av smart borsthuvud.

Anpassa dig till den nya rutinen

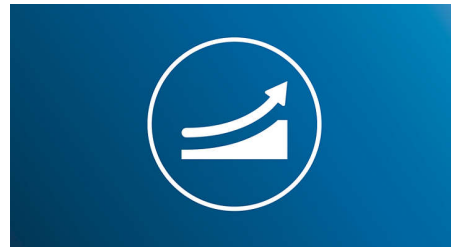

När du börjar med något nytt krävs en viss tillvänjningstid. Med vårt mjukstartsprogram ökar du borstningseffekten gradvis och skonsamt under de 14 första gångerna som den nya tandborsten används.

Praktiskt resefodral och laddare



Med vårt förstklassiga resefodral kan du förvara din tandborste på ett hygieniskt sätt, och med vår kompakta laddningsenhet kan du hålla igång dina enheter när du är ute och reser. Du får två veckors regelbunden användning från en laddning, men laddaren är perfekt för långa resor.

Specifikationer

Effekt

Spänning: 110–220 V

Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): 14 dagar**

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Svart, Pastellrosa

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Batteriindikator: Lampan visar batteristatusen

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Medföljande tillbehör

Handtag: 2 ProtectiveClean

Laddare: 1

Borsthuvuden: 2 InterCare

Resefodral: 2

Rengöringsprestanda

Prestanda: Tar bort upp till 7 gånger mer plack*

Hälsöfördelar: Förbättrar munhälsan på bara två veckor, Bidrar till att minska risken för hål

Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min

Timer: Quadpacer och SmarTimer

Tryckfeedback: Handtag som vibrerar för att varna användaren

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Två intensitetsnivåer: Låg, Hög

Smart-sensorteknologi

Påminnelse om att byta BrushSync: Du vet alltid när det är dags, att byta borsthuvud

Tryksensor: Varnar när du borstar för hårt

