

# PHILIPS

## sonicare

Elektriskā zobu  
birste

ProtectiveClean  
4300

Iebūvēts spiediena sensors

1 tīrīšanas režīms

1 BrushSync funkcija



HX6888/98



## Veselīgākas smaganas. Saudzīga tīrīšana.

Uzlabo smaganu veselību līdz pat 100 % vairāk nekā parastā zobu suka

Izjūtiēt atšķirību, pateicoties saudzīgai tīrīšanai ar spiediena sensoru, vienlaikus uzlabojot smaganu veselību līdz pat 100 % vairāk nekā ar parasto zobu suku

### Proven to improve oral health

- Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija

### Innovative technology

- Viegls atgādinājums tīrīt maigi un saudzīgi
- Zobu birstes uzgaļi maksimālam rezultātam un pacientu labsajūtai
- Savieno viedo zobu birstes rokturi ar viedajiem uzgaļiem

### Improves patients' oral health

- Uzlabo smaganu veselību līdz pat 100%\*
- Plombes, kroņi vai jutīgas zonas? Nav pamata uztraukumiem.

### Designed around your patient

- Lielisks veids, kā pierast pie savas jaunās zobu birstes
- Aicinājums tīrīt zobus rūpīgi

# Izceltie produkti

## Uzlabo smaganu veselību



Blīvi izvietoti augstas kvalitātes sariņi ļauj veikt tīrīšanu īpaši saudzīgi — jo īpaši likvidējot aplikumu gar smaganu līniju, ļaujot jums uzlabot smaganu veselību par 100% efektīvāk, nekā tīrot ar zobu birsti manuāli. Īpašas formas izliektais elektriskais uzgalis ļauj viegli aizsniegt zobus dziļi mutes dobuma aizmugurē.

## Pārāk liels spiediens?



Pacienti var pat nepamānīt, ka tīra zobus ar pārmērīgu spēku, bet to pamanīs viņu zobu birste. Līdzko uz smaganām tiks izdarīts pārmērīgs spiediens, zobu birste ar skaņas signālu aicinās spiedienu samazināt.

## Drošs un saudzīgs




Varat būt pārliecināti, ka zobu tīrīšana ir droša — Philips sonic tehnoloģija ir piemērota lietošanai breketēm, plombēm, kroņiem un venīriem, un tā palīdz novērst kariesa veidošanos un uzlabo smaganu veselību.

## Philips Sonicare tehnoloģija



Philips Sonicare uzlabotā ultraskaņas tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

## Viedā nomaiņšanas atgādināšanas funkcija

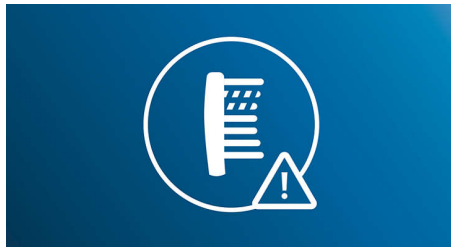

Visi zobu birstes uzgaļi ar laiku nolietojas. Philips tam ir radis risinājumu — viedā birstes uzgaļu atpazīšanas tehnoloģija nosaka, cik ilgi pacients ir lietojis konkrēto uzgali, kā arī to, cik spēcīgi ar to ir tīrīts. Kad būs pienācis laiks veikt uzgaļa nomaiņu, rokturī iedegsies gaismiņa un atskanēs īss skaņas signāls. Tādējādi pacienti var būt pārliecināti, ka birstes uzgalis vienmēr ir vislabākajā darba kārtībā.

## BrushSync tehnoloģija



Tehnoloģija ar mikročipu nosaka izmantoto gudru zobu birstes uzgali un sinhronizē to ar gudro zobu birstes rokturi. Gudrais rokturis un


gudrie uzgaļi ir jaudīga kombinācija, kurā ļauj izveidot smart pāri un atgādina par smart uzgaļa nomaiņu.

## Noderīgi taimeri



Philips QuadPacer tehnoloģija palīdz pacientiem tīrīt katru mutes dobuma zonu tieši tik ilgi, cik tas būtu ieteicams, savukārt viedais taimeris informē, kad ir pagājušas ieteicamās zobu tīrīšanas divas minūtes.

## Easy-start programma

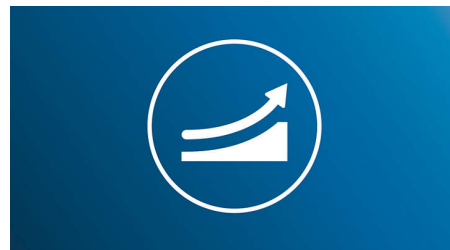

Sākot kaut ko jaunu, vispirms ir nepieciešams iepazīšanās periods. Tādēļ mūsu Easy-Start programma sniedz jums iespēju pirmās 14 tīrīšanas reizēs pakāpeniski un saudzīgi palielināt tīrīšanas jaudu.

# Specifikācijas

## Strāvas padeve

Spriegums: 110-220 V

## Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): Līdz 2 nedēļām

Akumulatora tips: Litija jonu

## Dizains un apdare

Krāsa: Gaiši zila

## Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

## Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Zobu tīrīšanas ilgums: Līdz 2 nedēļām

Nomainas atgādinājums: Izcila rezultāta nodrošināšanai katru reizi, iedegas atgādinājuma ikona

## Komplektā iekļautie piederumi

Suku uzgaļi: 1 C3 Premium Gum Care, 1 InterCare standarts, 1 W2c Optimal White, kompakts

Rokturis: 1 ProtectiveClean

Lādētājs: 1

## Tīrīšanas veiktspēja

Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās, Samazina caurumu veidošanās risku

Ātrums: Līdz 62 000 birstes kustību/min

Taimeris: Quadpacer un SmartTimer

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

## Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

## Smart sensoru tehnoloģija

BrushSync uzgaļa nomainas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomainas brīdi

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens

