

PHILIPS

sonicare



Spazzolino elettrico
sonico con app

ExpertClean 7300

Spazzolamento connesso e
semplice

Sensore di pressione integrato

Riconoscimento intelligente
testina

3 modalità, 3 intensità



HX9681/01

Tecnologia intelligente per sane abitudini di igiene orale

Una pulizia completa per le esigenze dei tuoi pazienti

Philips Sonicare ExpertClean funge da guida personalizzata alla pulizia dei denti per i tuoi pazienti, utilizzando la tecnologia SmartSensor e i report dei progressi per monitorare le abitudini e fornire feedback, migliorando quindi la tecnica di pulizia dei denti e la routine di igiene orale quotidiana.

Proven to improve oral health

- Superficie di contatto più ampia per la rimozione della placca
- Cura delle gengive per una migliore salute

Aiuta a migliorare l'igiene orale dei pazienti


- Rimuove 10 volte più placca* per una pulizia profonda
- Gengive fino a 7 volte più sane* in sole 2 settimane

Progettato su misura per il tuo paziente

- 3 modalità, 3 intensità
- Avvisa i pazienti in caso di batteria scarica
- Per una pulizia più efficace ogni giorno
- Guida i pazienti a utilizzare la corretta quantità di pressione
- Aiuta i pazienti a migliorare le proprie abitudini di igiene orale
- Le testine selezionano automaticamente le impostazioni ottimali


In evidenza

Rimuove fino a 10 volte più placca*

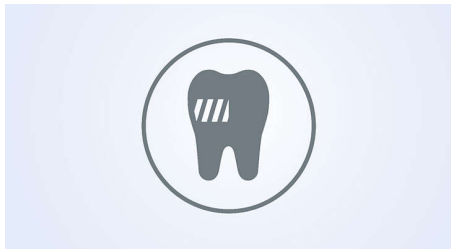


La testina C3 Premium Plaque Defence offre una pulizia più profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma di ciascun dente per offrire una superficie di contatto fino a 4 volte più ampia*** e rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere*.

Gengive fino a 7 volte più sane*

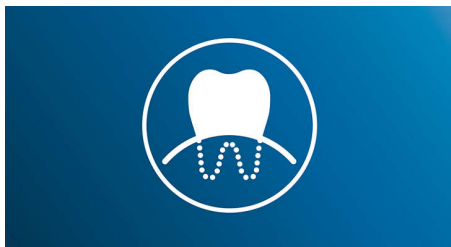

La testina G3 Premium Gum Care migliora la salute delle gengive dei pazienti. Le dimensioni ridotte e le setole specifiche offrono una pulizia delicata ma efficace lungo il bordo gengivale, dove hanno origine i problemi alle gengive. È clinicamente testata per ridurre le infiammazioni delle gengive fino al 100%* e per garantire gengive fino a 7 volte più sane in appena due settimane.*

Progress Report

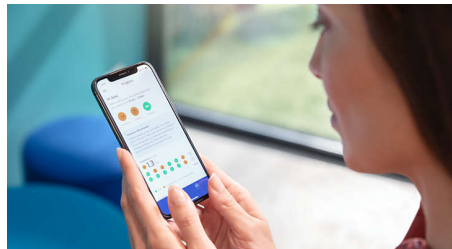

I sensori monitorano e misurano i comportamenti di pulizia dei pazienti mentre l'impugnatura dello spazzolino Philips Sonicare ExpertClean fornisce un feedback immediato. Nel tempo, l'app Sonicare registra e analizza queste abitudini e genera un report dei progressi per promuovere una migliore tecnica di pulizia.

3 modalità, 3 intensità



Con tre modalità di pulizia (Clean, Gum Health, DeepClean+) e tre impostazioni di intensità (bassa, media, alta), i tuoi pazienti possono personalizzare la propria esperienza di pulizia per ottenere un comfort ottimale e una pulizia completa. Visualizza le specifiche per informazioni più dettagliate sulle modalità.

Riconoscimento intelligente testina



Un microchip nella testina si sincronizza con l'impugnatura di Philips Sonicare ExpertClean. Se un paziente inserisce una testina C3 Premium

Plaque Control/Defense/Defence, G3 Premium Gum Care o W3 Premium White, lo spazzolino seleziona automaticamente la modalità e il livello di intensità ottimali. I pazienti devono solo iniziare a spazzolare. Aiuta i pazienti ad avere le impostazioni migliori per le migliori prestazioni in base alle loro esigenze.

Sensore di pressione



Se i pazienti applicano una pressione eccessiva, il sensore intuitivo della pressione farà pulsare lievemente l'impugnatura e fornirà ai pazienti il feedback in tempo reale di cui hanno bisogno per esercitare meno pressione. Da uno studio condotto su pazienti americani, 7 pazienti su 10 che spazzolavano troppo energicamente hanno ridotto la pressione esercitata proprio grazie all'intervento del sensore di pressione.***

C3 Premium Plaque Defence



C3 Premium Plaque Control è la nostra testina che offre la pulizia più profonda. Le setole, dotate di bordi morbidi e flessibili, si adattano alla forma di ciascun dente per offrire una superficie di contatto 4 volte più ampia e rimuovere fino a 10 volte più placca dalle zone difficili da raggiungere.*

ExpertClean 7300

Spazzolino elettrico sonico con app

HX9681/01

In evidenza

Testina Premium Gum Care G3



G3 Premium Gum Care è la nostra miglior testina per la salute delle gengive. Le sue dimensioni ridotte e le setole specifiche offrono una pulizia delicata ma efficace lungo il bordo gengivale, dove hanno origine i problemi alle gengive. È clinicamente testata per garantire gengive fino a 7 volte più sane* in appena 2 settimane.

Testina di ricambio per spazzolina



Dopo tre mesi di normale utilizzo, le setole e le testine risultano consumate e meno efficaci. Philips Sonicare ExpertClean fornisce un accurato promemoria intelligente per la sostituzione della testina in base alla frequenza con cui i pazienti puliscono i denti, alla durata della pulizia e alla quantità di pressione che esercitano. Quando è arrivato il momento di sostituire la testina, una

spia sull'impugnatura avvisa i pazienti, in modo che possano continuare a ottenere i migliori risultati possibili.

Indicatore di stato della batteria



Se la carica è completa, Philips Sonicare ExpertClean ha abbastanza batteria per tre settimane di uso regolare. L'indicatore di stato della batteria si illumina e segnala chiaramente ai pazienti quando la batteria è scarica e deve essere ricaricata.

Specifiche

Connettività

Tecnologia wireless Bluetooth®: App per la pulizia denti connessa

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica):

14 giorni***

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco e blu chiaro

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Compatibilità

Compatibilità Android: Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

Compatibilità iOS: iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo, con sistema operativo iOS7

Facilità d'uso

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

Accessori inclusi

Testine: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 G3 Premium Gum Care

Manico: 1 ExpertClean

Caricabatterie: 1

Custodia da viaggio: 1

Prestazioni di pulizia

Benefici per la salute: Gengive fino a 7 volte più sane*

Prestazioni: Rimuove fino a 10 volte più placca*

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Effetto denti più bianchi: Aiuta a rimuovere in modo naturale le macchie

Timer: BrushPacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata: Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

3 intensità: Bassa, Media, Alta

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Deep Clean+: Per una pulizia profonda

Gum Health: Attenzione particolare per i molari

Associazione con modalità BrushSync

C3 Premium Plaque Defence: Associazione con la modalità Clean

Testina Premium Gum Care G3: Associazione con la modalità Gum Health

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

Tecnologia BrushSync: Connette il manico e, la testina intelligente

