

# PHILIPS

## sonicare



Elektrische sonische  
tandenborstel met app

ExpertClean 7300

Verbind eenvoudig met de app

Ingebouwde poetsdruksensor

Slimme herkenning van  
opzetborstels

3 poetsstanden, 3 sterktes



HX9681/01

## Slimme technologie voor een gezonde mondverzorgingsroutine

### De volledige reiniging voor uw patiënten

Philips Sonicare ExpertClean is de persoonlijke poetsbegeleider voor uw patiënten. Door middel van slimme sensortechnologie en voortgangsrapporten kunnen uw patiënten hun gewoonten bijhouden en krijgen ze feedback over hoe ze hun poetstechniek en dagelijkse mondverzorgingsroutine kunnen verbeteren.

#### **Bewezen verbetering van de mondhygiëne**

- Meer contact met het oppervlak om tandplak te verwijderen
- Betere verzorging van het tandvlees om het gezond te houden

#### **Verbeterd de mondhygiëne**


- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak\* voor een grondige reiniging
- Tot wel 7x gezonder tandvlees\* in slechts 2 weken

#### **Ontworpen voor u**

- 3 poetsstanden, 3 sterktes
- Waarschuwt patiënten dat de batterij bijna leeg is
- De meest effectieve reiniging, elke dag
- Helpt patiënten om de juiste druk uit te oefenen
- Helpt patiënten om mondverzorgingsgewoonten te verbeteren
- Opzetborstels selecteren automatisch optimale instellingen

## Kenmerken

### Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak\*

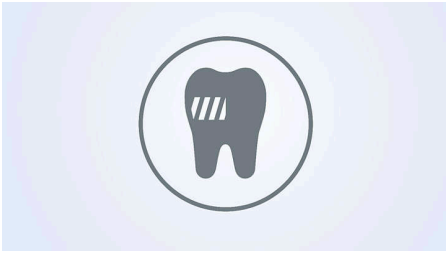


De C3 Premium Plaque Control-opzetborstel biedt onze grondigste reiniging. Door de zachte, buigzame zijanten volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand, waardoor de borstel de tand 4x beter raakt\*\* en tot 10x meer tandplak verwijdert op moeilijk bereikbare plaatsen\*.

### Tot 7x gezonder tandvlees\*



De G3 Premium Gum Care-opzetborstel zorgt voor gezonder tandvlees van de patiënt. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels reinigen zacht maar effectief langs de tandvleesrand, waar het tandvlees het eerst ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat met deze opzetborstel 100% minder kans is op ontstoken tandvlees en het tandvlees binnen twee weken tot 7 keer gezonder is.\*

### Voortgangsrapport

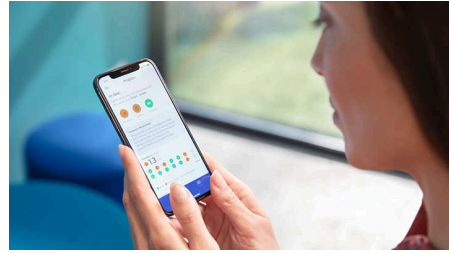

Sensoren houden de poetsgewoonten van patiënten bij en het Philips Sonicare ExpertClean handvat geeft directe feedback. De Sonicare-app onthoudt en analyseert de poetsgewoonten en genereert een Voortgangsrapport op basis waarvan de poetstechniek kan worden verbeterd.

### 3 poetsstanden, 3 sterktes



Met drie poetsstanden (Clean, Gum Health, DeepClean+) en drie intensiteitsniveaus (laag, gemiddeld, hoog) kunnen uw patiënten hun poetservaring personaliseren voor optimaal comfort en complete reiniging. Zie de specificaties voor meer gedetailleerde informatie over de poetsstanden.


### BrushSync-herkenning van opzetborstels



Een microchip in de opzetborstel synchroniseert met het Philips Sonicare ExpertClean-handvat. Als een patiënt een C3 Premium Plaque

Control/Defense/Defence, G3 Premium Gum Care of W3 Premium White opzetborstel vastklikt, selecteert de tandenborstel automatisch de optimale poetsmodus en intensiteit. Uw patiënten hoeven alleen maar te gaan poetsen. Patiënten maken op deze manier gebruik van de beste instellingen voor de beste resultaten die voldoen aan hun behoeften

### Poetsdruksensor

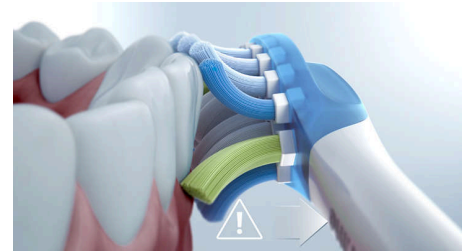

Als de patiënt te veel druk uitoefent, zorgt de intuïtieve druksensor dat het handvat zachtjes gaat trillen, waarmee het de patiënt direct laat weten dat er minder druk moet worden uitgeoefend. In een onderzoek met Amerikaanse patiënten verminderden 7 van de 10 agressieve poetsers de poetsdruk vanwege de druksensor.\*\*\*\*

### C3 Premium Plaque Defence



De C3 Premium Plaque Control-opzetborstel is bestemd voor de grondigste reiniging. Door de zachte, buigzame zijanten volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand, waardoor de borstel de tand 4x beter raakt en tot wel 10x meer tandplak verwijdert op moeilijk bereikbare plaatsen.\*

# ExpertClean 7300

Elektrische sonische tandenborstel met app

HX9681/01

## Kenmerken

### G3 Premium Gum Care-opzetborstel



De G3 Premium Gum Care is onze beste opzetborstel voor gezonder tandvlees. Het kleinere formaat en de gerichte tandvleesborstels reinigen zacht maar effectief langs de tandvleesrand, waar het tandvlees het eerst ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat met deze opzetborstel het tandvlees 7x gezonder wordt\* binnen twee weken.

### De opzetborstel vervangen



Opzetborstels en de borstelharen vertonen slijtage na drie maanden normaal gebruik. Philips Sonicare ExpertClean geeft een nauwkeurige herinnering voor het vervangen van de slimme opzetborstel. Dit is gebaseerd op hoe vaak patiënten poetsen, hoe lang ze poetsen en hoeveel druk ze uitoefenen. Als het tijd is voor een nieuwe opzetborstel, gaat een lampje op het handvat branden. Zo weet de

patiënt dat de opzetborstel aan vervanging toe is en kan de patiënt de beste poetsresultaten blijven behalen.

### Batterij-indicator



Zodra de Philips Sonicare ExpertClean volledig is opgeladen, gaat de batterij drie weken mee bij regelmatig gebruik. Als de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen, licht de batterij-indicator duidelijk op om dit aan te geven aan de patiënt.

# ExpertClean 7300

Elektrische sonische tandenborstel met app

HX9681/01

## Specificaties

### Connectiviteit

**Draadloze Bluetooth®-technologie:** Verbonden tandenpoetsapp

### Vermogen

**Spanning:** 110 - 220 V

### Technische specificaties

**Batterij:** Oplaadbaar

**Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):** 14 dagen\*\*\*

**Batterijtype:** Lithium-ion

### Ontwerp en afwerking

**Kleur:** Wit en lichtblauw

### Service

**Garantie:** 2 jaar beperkte garantie

### Compatibiliteit

**Compatibiliteit met Android:** Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

**Compatibel met iOS:** iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger, met iOS7-besturingssysteem

### Gebruiksgemak

**Compatibel met handvat:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Handvat:** Slang, ergonomisch design

**Vervangingsherinnering:** Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

### Meegeleverde artikelen

**Handvat:** 1 ExpertClean

**Opzetborstels:** 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 Premium Gum Care

**Reisetui:** 1

**Docking station:** 1

### Reinigingsprestaties

**Prestaties:** Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak\*

**Gezondheidsvoordelen:** Tot 7x gezonder tandvlees\*

**Timer:** BrushPacer en SmarTimer

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Wittere tanden:** Helpt verkleuringen op natuurlijke wijze te verwijderen

**Feedback bij te veel druk:** Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

### Poetsstanden

**3 sterktes:** Laag, Medium, Hoog

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**Deep Clean+:** Voor een verkwikkend grondige reiniging

**Gum Health:** Speciale aandacht voor kiezen

### BrushSync-koppeling van poetsstanden

**C3 Premium Plaque Defence:** Koppelt met de Clean-poetsstand

**G3 Premium Gum Care-opzetborstel:** Koppelt met de Gum Health-poetsstand

### Slimme sensortechnologie

**BrushSync-ervangingsherinnering:** Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

**Poetsdruksensor:** Waarschuwt wanneer u te hard poest

**BrushSync-technologie:** Koppelt de slimme tandenborstel met, slimme opzetborstel

