

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische Schallzahnbürste  
mit App - Weiß

DiamondClean 9000

Vernetztes Putzen leicht  
gemacht

Integrierter Drucksensor

Smart-Bürstenkopferkennung

4 Putzprogramme,  
3 Intensitätsstufen



HX9914/55



## Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang Weißere Zähne nach nur einem Tag\*

Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.

### Genießen Sie ein elegantes und benutzerfreundliches Design

- Einfaches Aufladen und stilvoller Start

### DiamondClean Benutzer erleben eine verbesserte Mundgesundheit

- Effektiv gegen Plaque, sanft zu Ihrem Zahnfleisch
- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\* für eine gründliche Reinigung

### Passen Sie die DiamondClean 9000 an Ihre Bedürfnisse an

- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Macht dich darauf aufmerksam, wenn du zu fest drückst
- Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

### Dank persönlichem Fortschrittsbericht auf dem Laufenden bleiben

- Lege dir dauerhaft gesunde Gewohnheiten zu


# Besonderheiten

## Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*



Mit dem C3 Premium Plaque Defense Bürstenkopf wissen Sie, dass Sie die bestmögliche Reinigung erhalten. Die weichen, flexiblen Borsten passen sich der Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt\*\* und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen.

## Fortschrittsbericht

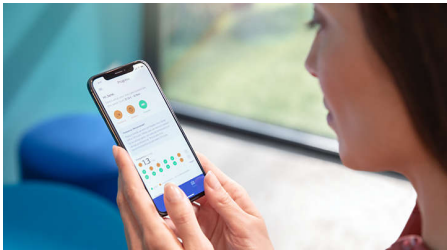

Die DiamondClean 9000 gibt dir die Anleitung, die du benötigst, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren informieren dich, wenn du zu viel Druck ausübst.

## 4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Die DiamondClean 9000 verfügt über die Putzprogramme Clean, White+, Gum Health and Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: "Clean"-Putzprogramm für eine außergewöhnliche

tägliche Reinigung, "White+"-Putzprogramm zum Entfernen von Verfärbungen, "Gum Health"-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und das "Deep Clean+"-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.

## Smart-Bürstenkopferkennung



Die intelligenten Bürstenköpfe sorgen dafür, dass Sie das richtige Putzprogramm und die richtige Intensitätsstufe für die bestmögliche Reinigung verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden den W3 Premium White Bürstenkopf. Die BrushSync Technologie Ihrer DiamondClean 9000 synchronisiert Ihren Bürstenkopf automatisch mit dem White+-Modus für weißere Zähne.

## Integrierter Drucksensor



Du bemerkst es vielleicht nicht, wenn du zu fest putzt, aber deine DiamondClean 9000 schon. Wenn du zu viel Druck ausübst, vibriert das Handstück der Zahnbürste sanft. So wirst du daran erinnert, weicher zu bürsten und deinem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

## BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

## Langlebiger Akku



Deine DiamondClean 9000 hält bei regelmäßiger Anwendung mit einer einzigen Ladung bis zu zwei Wochen.

## C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung



Mit dem Premium-Bürstenkopf zur Plaque-Bekämpfung putzen Sie gründlicher als je zuvor. Sanfte, flexible Seiten und Borsten passen sich hervorragend an die Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt und reinigen auch schwer erreichbare Stellen\*.

# Daten

## Anschlüsse

**Kabellose Bluetooth® -Technologie:**  
Verbundene Zahnpflege-App

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar  
**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):**  
14 Tage\*\*\*  
**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Weiß

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte  
Garantie

## Kompatibilität

**Android-Kompatibilität:** Android Smartphones,  
Bluetooth 4.0-fähige Tablets  
**iOS-Kompatibilität:** iPad der 3. Generation  
oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7  
oder höher, mit iOS7-Betriebssystem

## Benutzerfreundlichkeit

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach  
aufsteckbare Bürstenköpfe  
**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design  
**Erinnerungsfunktion:** Stellt jederzeit optimale  
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet  
auf

## Artikel enthalten

**Handstück:** 2x DiamondClean 9000  
**Bürstenköpfe:** 2 C3 Premium zur Plaque-  
Bekämpfung  
**Ladeglas:** 1  
**Ladestation:** 2

## Reinigungsleistung

**Leistung:** Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*  
**Timer:** BrushPacer und 2-Minuten-Timer  
**Druck-Feedback:** Vibrierendes Handstück zur  
Warnung des Benutzers

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung  
**3 Intensitätsstufen:** Hoch, Niedrig, Mittel  
**Deep Clean+:** Für eine besonders gründliche  
Reinigung

**Gesundes Zahnfleisch:** Pflegt Backenzähne  
besonders gründlich  
**White+:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

## Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem  
Druck  
**BrushSync Erinnerungsfunktion:** So wissen Sie  
immer, wann, Sie die Bürstenköpfe  
austauschen sollten  
**BrushSync Technologie:** dem intelligenten  
Bürstenkopf, Verbindet das intelligente  
Handstück mit

## Software-Support

**Softwareaktualisierungen:** Philips bietet für  
2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende  
Softwareaktualisierungen an.

