


Philips BlueTouch
Pain Relief Patch met
bediening via de app

Innovatieve blauwe LED-
technologie

Voor spierpijn in de rug
Compatibel met iOS en Android
Met een draagband voor de
bovenrug

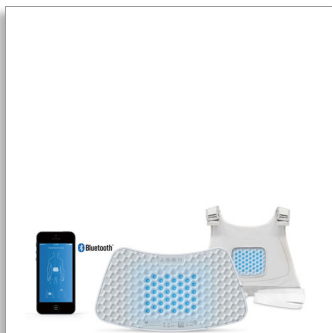

PR3741/00

Natuurlijk spierpijn in de rug verlichten zonder medicijnen

Klinisch bewezen* pijnverlichtende therapie met blauw licht

De Philips BlueTouch gebruikt innovatieve therapie met blauw licht met een dubbel effect. Het geeft rustgevende warmte af en stimuleert de afgifte van stikstofmonoxide van het lichaam om plaatselijk de bloedsomloop te verhogen, waarbij de natuurlijke herstelprocessen van het lichaam worden ondersteund.

Verbetert lokaal de bloedsomloop voor pijnverlichting

- Maakt gebruik van warmte en natuurlijke genezende werking van blauw licht
- Behandeling zonder gebruik van medicijnen

Innovatieve blauwe LED-technologie

- Maakt op een unieke manier gebruik van blauw LED-licht om de bloedsomloop lokaal te stimuleren
- Ontspannende warmte voor verlichting van rugpijn
- Informatie over contra-indicaties in de gebruiksaanwijzing

Gebruik max. 30 min., 2x per dag voor verlichting in 1-2 weken

- Korte behandel tijden, drie intensiteitsniveaus
- Probeer het nu: 30 dagen geld-teruggarantie
- Binnen één tot twee weken kunt u resultaat merken

Regel uw behandeling met een iOS-/Android-apparaat


- Volg voortgang van uw behandelingen in dagboekoverzicht

PHILIPS

Pain Relief Patch met bediening via de app
Innovatieve blauwe LED-technologie Voor spierpijn in de rug. Compatibel met iOS en Android, Met een draagband voor de bovenrug

Kenmerken


40 geoptimaliseerde blauwe LED's

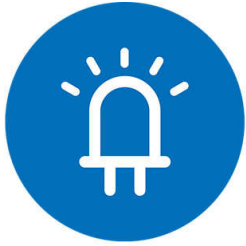

40x

BlueTouch-patch bevat 40 blauwe LED's die therapeutisch licht uitstralen. Blauw licht zorgt voor warmte en stimuleert de natuurlijke aanmaak van NO door het lichaam, waardoor de bloedsomloop wordt gestimuleerd. Dit zorgt weer voor toevoer van voedingsstoffen en zuurstof en afvoer van metaboliëten om het herstelproces van de spieren in de te behandelen gebieden te ondersteunen.

Aangename warmte

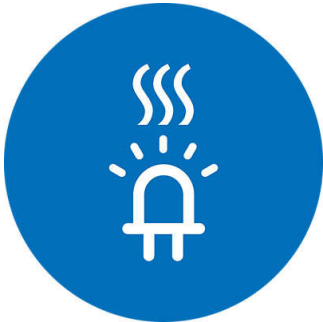

BlueTouch produceert ook heilzame warmte die de spieren ontspant ter verlichting van rugpijn en geeft de gebruiker een gevoel van welzijn.

Contra-indicaties

Gebruik geen BlueTouch als u een van de contra-indicaties hebt die zijn vermeld in de gebruiksaanwijzing. U vindt het volledige overzicht in de gebruiksaanwijzing. Enkele voorbeelden zijn: - Als u een bekende zonneallergie hebt - Als u steroïden gebruikt. Deze geneesmiddelen maken de huid ontvankelijker voor irritatie - als u een

geïmplant medisch apparaat hebt (schroef, enz.) in of in de buurt van het te behandelen gebied of een actief implanteerbaar medisch hulpmiddel, zoals hartpacemaker, defibrillator, neurostimulator, cochleair implantaat, actief implantaat voor de toediening van medicijnen waar dan ook in het lichaam - als u zwanger bent

Verlichting van rugpijn zonder medicijnen

Philips BlueTouch maakt gebruik van de warmte en activeert natuurlijke genezingsprocessen met blauw licht om rugpijn te verlichten zonder het gebruik van medicijnen.

Natuurlijke verlichting van rugpijn

Het belangrijke voordeel van therapie met blauw LED-licht is de natuurlijke aard. Het blauwe licht stimuleert de lichaamseigen processen. Wanneer het blauwe LED-licht op de huid komt, komen de lichaamseigen stikstofmonoxidemoleculen (NO) vrij en worden ze getransporteerd naar de spier die de rugpijn veroorzaakt. Deze kleine moleculen heeft een geweldig effect: de rugpijn wordt op een natuurlijke manier verlicht.

Gebruik met gratis Treatment app



Philips BlueTouch wordt bediend met onze speciaal ontworpen app die het eenvoudig maakt uw pijnverlichtende behandeling te kiezen en zelf uit te voeren. De Behandeling-app is beschikbaar voor smartphones en tablets, en is compatibel met iOS 7 tot en met


PR3741/00

iOS 10 en met Android 4.4 KitKat tot en met Android 7.

Behandelingsoverzicht in dagboek

Het behandeldagboek maakt deel uit van de Treatment app. Met één druk op de dagboekknop krijgt u een volledig beeld van uw behandelgeschiedenis. U kunt dit overzicht gebruiken om uw rugpijnbehandeling te optimaliseren.

Duur van behandeling

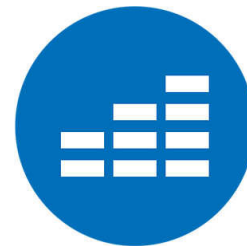

3x

De Philips BlueTouch kan tweemaal per dag worden opgebruikt. De duur van elke behandeling hangt af van het geselecteerde intensiteitsniveau. In stand 1 (laag) kunt u het apparaat maximaal 30 minuten gebruiken, in stand 2 (medium) maximaal 20 minuten en in stand 3 (hoog) maximaal 15 minuten per behandeling. U selecteert zelf het gewenste intensiteitsniveau. De lichtintensiteit en temperatuur verschillen per niveau. Door de manier waarop het blauwe LED-licht werkt, draagt de BlueTouch bij dagelijks gebruik effectief bij aan pijnverlichting.

30 dagen geld-teruggarantie

Ervaar het zelf en probeer de Philips BlueTouch! Probeer het apparaat ten minste twee weken voor een optimaal effect. Als u niet tevreden bent, ontvangt u het geld binnen 30 dagen na de aankoopdatum terug.

Aanbevolen gebruik

Aanbevolen gebruik is twee keer per dag maximaal 30 minuten. Binnen één tot twee weken kunt u resultaat merken.

Pain Relief Patch met bediening via de app

Innovatieve blauwe LED-technologie Voor spierpijn in de rug. Compatibel met iOS en Android, Met een draagband voor de bovenrug

Specificaties

Software

- Compatibiliteit met iPhone®: Versie iOS 7 tot iOS 10, iPhone® 4S en nieuwer
- Compatibiliteit met iPad®: Versie iOS 7 tot iOS 10, iPad® 3e generatie, iPad Air™, iPad mini™ en nieuwer
- Compatibiliteit met Android: Android 4.4 KitKat tot en met Android 7
- Compatibiliteit met iPod®: Versie iOS 7 tot iOS 10, iPod touch® 5e generatie en nieuwer

Gewicht en afmetingen

- Gewicht BlueTouch: 0,168 kg
- Afmetingen patch (B x H x D): 280 x 155 x 12,5 mm

Inclusief

- BlueTouch pijnverlichtende patch
- Adapter
- Draagband voor bovenrug

Toepassing

- Voor spierpijn in de rug
- Bovenrug

Specificaties

- Gemiddeld voltage: 100 - 240 V
- Nominale frequentie: 50 - 60 Hz
- Gemiddeld ingangsvermogen: 15 W
- Klasse: Medische hulpmiddel klasse IIa
- Classificatie: Risicogroep 1
- Waterbestendigheid: IP22
- Maximale dagelijkse hoeveelheid: < 108,5 J/cm²
- Batterijtype: Li-ion
- Golflengte blauw LED-licht: 453 nm

Gebruik

- Stand 1 (laag): 30 min. twee keer per dag
- Stand 2 (medium): 20 min. twee keer per dag
- Tot twee keer per dag
- Stand 3 (hoog): 15 min. twee keer per dag



Publicatiedatum
2023-05-06

Versie: 2.0.1

EAN: 87 10103 70421 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Prof. dr. Hubert J. Bardenheuer (universiteitskliniek Heidelberg, Duitsland), 24e interdisciplinaire congres over pijntherapie en palliatieve zorg, Frankfurt/Main, Duitsland, lezing 7 maart 2013 over het gebruik van BlueTouch bij chronische musculoskeletale rugpijn.