

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische Schallzahnbürste  
- Praxismodell

FlexCare Platinum

3 Putzprogramme,  
3 Intensitäten

2 Bürstenköpfe

Mit Drucksensor

UV-Reinigungsstation für  
Bürstenköpfe



HX9182/32

## Gleicht unregelmäßige Putztechniken aus

Unsere erste Zahnbürste mit AdaptiveClean-Technologie

Die AdaptiveClean-Technologie besteht aus zwei Komponenten: Dem AdaptiveClean Bürstenkopf und einem intuitiven Drucksensor. Beide ermöglichen es Ihren Patienten, ihre Zähne intelligenter und schonender zu putzen.

### Für eine gute Mundgesundheit

- 4-Quadranten-Timer
- 2-Minuten-Timer
- UV-Reinigungsgerät

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- InterCare Bürstenkopf

### Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Intuitiver Drucksensor

### Hervorragende Reinigung

- AdaptiveClean Bürstenkopf
- Individuell anpassbare Reinigungseinstellungen
- Patentierte Sonicare Schallechnologie

### Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Das neue Deep Clean-Putzprogramm: Problemstellen mühelos pflegen


# Besonderheiten

## AdaptiveClean Bürstenkopf



Weiche, flexible Seiten aus Gummi sorgen dafür, dass sich die Borsten des Bürstenkopfes der Kontur der Zähne und des Zahnfleisches anpassen. Dies sorgt für bis zu 4 Mal mehr Oberflächenkontakt\* zwischen Borsten und Zahn. Dank des flexiblen Bürstenkopfes werden die Borsten sanft am Zahnfleischrand entlang geführt und übermäßiger Druck während des Putzens wird absorbiert. Durch die optimierte Schwingbewegung entsteht ein einzigartiges Putzgefühl und die Reinigung entlang des Zahnfleischrands und an schwer erreichbaren Stellen wird unterstützt\*. So werden nachweislich bis zu 10 Mal mehr Plaque als mit einer Handzahnbürste an schwer erreichbaren Stellen entfernt\*.

## Intuitiver Drucksensor

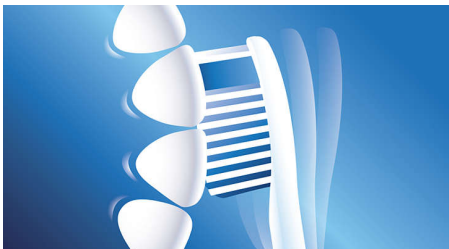


Wenn zu viel Druck ausgeübt wird, vibriert das Handstück sanft, um den Patienten darauf aufmerksam zu machen und ihm die richtige Technik zu vermitteln. In einer Studie unter Patienten in den USA reduzierten 7 von 10 Patienten, die zu aggressiv putzten, ihren Bürstendruck bei Verwendung des Drucksensors.

## Deep Clean-Putzprogramm



Unser neues "Deep Clean"-Putzprogramm reinigt selbst schwer erreichbare Stellen besonders effektiv. Die einzigartige Bewegung des Bürstenkopfes in diesem Putzprogramm sowie eine erweiterte dreiminütige Putzzeit machen es zur idealen Wahl für die gründliche Pflege von Problemstellen.

## Individualisierbare Reinigungseinstellungen

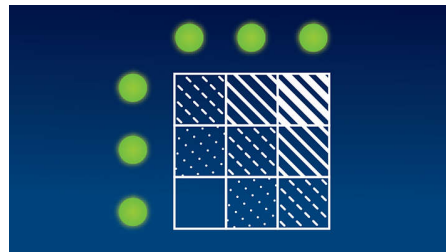

Drei Intensitätsstufen und drei Putzprogramme ermöglichen ein optimal auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Reinigungserlebnis, welches die Behandlungstreue der Patienten erhöht. Das dreiminütige "Deep Clean"-Programm bietet eine hervorragende Reinigung an schwer erreichbaren Stellen. Es ist das optimale Putzprogramm für Patienten, die auf problematische Stellen achten müssen.

## InterCare Bürstenkopf



Extra lange und dichte Borsten reichen tiefer zwischen die Zähne und entfernen somit deutlich mehr Plaque\* in den

Zahnzwischenräumen. Optimal für Patienten mit Zahnfleischbluten oder erhöhtem Risiko von Zahnfleischentzündungen.

## UV-Reinigungsgerät




Tötet 99 % der Bakterien und Viren ab\*. Eventuell als Zubehör in einem der Praxismodelle erhältlich.

## 2-Minuten-Timer



Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

## 4-Quadranten-Timer

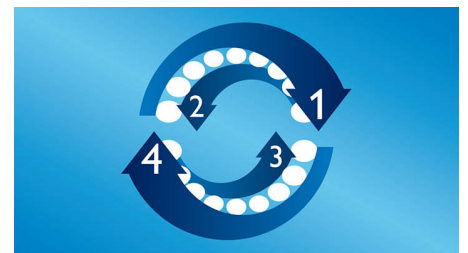

Der 30-Sekunden-Intervall-Timer gewährleistet gründliches Bürsten aller vier Quadranten im Mund.

# Daten

## Design und Materialausführung

Farbe: Platin-Grau

## Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

## Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 3 Wochen\*\*

Batterietyp: Lithium-Ionen

## Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Anzeige: Beleuchtetes Display

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Reinigungsdauer: Bis zu 3 Wochen\*\*\*

## Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Transporttasche: 1

Handstücke: 1 FlexCare Platinum

Bürstenköpfe: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare, Standard

UV-Reinigungsgerät: 1

## Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Drucksensor: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Weißer Zähne: Hilft, Verfärbungen auf natürliche Weise zu entfernen

## Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch

Deep Clean: Für eine besonders gründliche Reinigung

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

