

PHILIPS



Elektrische sonische tandenborstel met app

ExpertClean 7300

Verbind eenvoudig met de app

Ingebouwde poetsdruksensor

Slimme herkenning van opzetborstels

3 poetsstanden, 3 sterktes



HX9601/02

Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne

Tot 7x gezonder tandvlees*

Het is lastig om goede poetsgewoonten vast te houden. In de periode tussen controles bij de tandarts helpt ExpertClean u hierbij. Dankzij de ingebouwde slimme sensoren weet u wanneer u de druk moet aanpassen en het voortgangsrapport in de app helpt u om uw tandenpoetsroutine vast te houden.

Geniet van een stijlvol en gebruiksvriendelijk design

- Eenvoudig om op te laden en ook nog eens stijlvol
- Maakt reizen makkelijker voor u

Gebruikers van ExpertClean merken dat hun mondhygiëne verbetert

- Hard tegen tandplak, zacht voor het tandvlees
- Reinigt diep en beschermt gevoelig tandvlees
- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een grondige reiniging
- Tot wel 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken

ExpertClean past zich aan naar uw behoeften


- Gepersonaliseerde poetservaring
- Laat u weten wanneer u te hard poetst
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- BrushSync selecteert automatisch de beste stand voor u

Houd uw doelen vol met gepersonaliseerde begeleiding

- Begeleiding om te beginnen met gezonde gewoontes en ze vast te houden


Kenmerken

Tot 7x gezonder tandvlees*

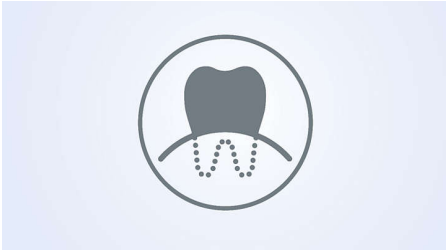


Verbeter de gezondheid van uw tandvlees met de G3 Premium Gum Care-opzetborstel. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels zijn ideaal om uw tandvlees gezond te houden. Gebruikers van deze opzetborstel hebben 100% minder tandvleesontstekingen* en tot 7x gezonder tandvlees in slechts twee weken.*

Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*

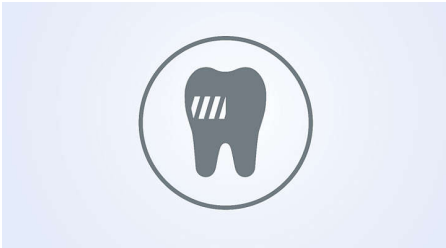

Dankzij de C3 Premium Plaque Defence-opzetborstel weet u zeker dat uw gebit grondig wordt gereinigd. De zachte, flexibele borstelharen hebben een gebogen design, waardoor ze de contouren van uw tanden volgen, 4x meer contact** maken en tot 10x meer plak verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.

Voortgangsrapport

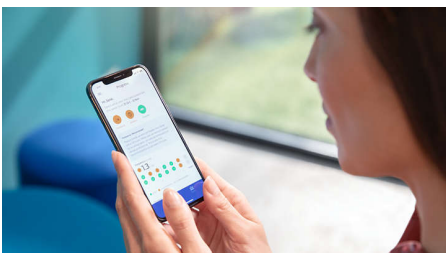

ExpertClean geeft u de begeleiding die u nodig hebt om gezonde poetsgewoonten te verbeteren en vast te houden tussen de

tandartscontroles door. De ingebouwde slimme sensoren laten u weten wanneer u te hard poetst. Door uw tandenborstel aan de Sonicare-app te verbinden, krijgt u een gepersonaliseerd voortgangsrapport dat u helpt om uw poetsgewoontes vast te houden en krijgt u een overzicht van uw verbeteringen.

3 poetsstanden, 3 sterktes




ExpertClean heeft de standen Clean, Gum Health en Deep Clean+ voor al uw poetsbehoeften. De Clean-poetsstand is bedoeld voor buitengewone dagelijkse reiniging, Gum Health reinigt het tandvlees voorzichtig maar effectief en Deep Clean+ geeft u een verfrissende, grondige reiniging. De tandenborstel heeft drie sterktes, zodat u kunt kiezen voor een sterkere reiniging of een mildere reiniging voor een gevoelige mond.

Slimme herkenning van opzetborstels



Slimme opzetborstels zorgen ervoor dat u de juiste stand en sterkte gebruikt voor de best mogelijke reiniging. Als u bijvoorbeeld de G3 Premium Gum Care-opzetborstel gebruikt, koppelt de BrushSync-technologie van uw ExpertClean uw opzetborstel aan de Gum Health-stand. Dit helpt u om uw tandvlees gezond te houden.

Ingebouwde poetsdruksensor

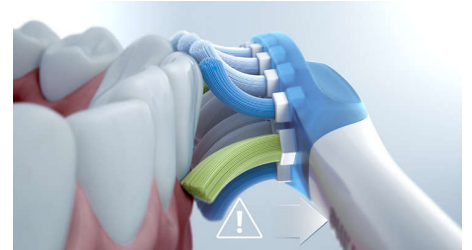

U merkt wellicht niet dat u te hard poetst maar uw ExpertClean ontgaat dat niet. Als u te hard drukt, gaat de intelligente tandenborstel licht pulseren en weet u dat u minder hard moet poetsen. Laat de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen vonden deze functie handig en gingen daardoor beter hun tanden poetsen.

BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepoetst. De BrushSync-vervangingsherinnering op uw handvat en een korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.

ExpertClean 7300

Elektrische sonische tandenborstel met app

HX9601/02


Kenmerken

C3 Premium Plaque Defence



De Premium Plaque Defence-opzetborstel is ontworpen voor de diepste reiniging ooit. Zachte, flexibele zijanten en gebogen borstelharen bewegen mee met de contouren van uw tanden, maken 4x meer contact met het oppervlak en helpen u aandacht te besteden aan moeilijk bereikbare plekken.*

G3 Premium Gum Care-opzetborstel

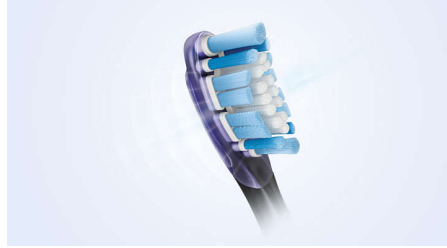

De G3 Premium Gum Care-opzetborstel is ontworpen om de gezondheid van uw tandvlees te verbeteren. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels reinigen de tandvleesrand voorzichtig maar effectief, precies op de plekken waar tandvleesproblemen gewoonlijk ontstaan.

Maakt reizen makkelijker voor u



In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

Batterij met lange levensduur



Uw ExpertClean gaat bij regelmatig gebruik tot twee weken mee op een volle accu.

ExpertClean 7300

Elektrische sonische tandenborstel met app

HX9601/02

Specificaties

Product-update

Ondersteuningstermijn: Philips biedt de noodzakelijke beveiligingsupdates tot 31 december 2026.

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie: Verbonden tandenpoetsapp

Vermogen

Spanning: 110-220 V

Technische specificaties

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

14 dagen***

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Compatibiliteit

Compatibiliteit met Android: Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

Compatibel met iOS: iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger, met iOS7-besturingssysteem

Gebruiksgemak

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Handvat: Slang, ergonomisch design

Vervangingsherinnering: Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 ExpertClean

Reisetui: 1

Opzetborstels: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 Premium Gum Care

Docking station: 1

Reinigingsprestaties

Prestaties: Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Tot 7x gezonder tandvlees*

Timer: BrushPacer en SmarTimer

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

3 sterktes: Laag, Medium, Hoog

Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen

BrushSync-koppeling van poetsstanden

G3 Premium Gum Care-opzetborstel: Koppelt met de Gum Health-poetsstand

C3 Premium Plaque Defence: Koppelt met de Clean-poetsstand

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

BrushSync-vervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

BrushSync-technologie: Koppelt de slimme tandenborstel met, slimme opzetborstel

Software-ondersteuning

Software-updates: Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.

