

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

ProtectiveClean  
5100

Integrierter Drucksensor

3 Putzprogramme

BrushSync Funktion

Reisetui



HX6851/53



## Weißere Zähne. Ganz sanft.

Hellt Zähne in nur einer Woche auf

Spüre den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während deine Zähne in nur einer Woche weißer werden.

### Für eine gute Mundgesundheit

- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz
- Weißere Zähne in nur einer Woche
- Wähle aus 3 Putzprogrammen

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Förderung einer gründlichen Reinigung
- Macht das Reisen einfacher

### Innovative Technologie

- So weißt du immer, wann du die Bürstenköpfe austauschen solltest
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen
- Macht dich darauf aufmerksam, wenn du zu fest drückst

# Besonderheiten

## Natürlich weiße Zähne



Stecke den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf deine Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

## Drei Putzprogramme

Dank dieser Zahnbürste mit drei Putzprogrammen und drei Intensitätsstufen kannst du deine Zahnreinigung an deine Bedürfnisse anpassen. Das Clean-Putzprogramm ist der Standardmodus für eine hervorragende Reinigung. Das White-Putzprogramm ist das ideale Programm für das Entfernen von Verfärbungen auf der Zahnoberfläche. Das Gum Care-Putzprogramm bietet eine zusätzliche Putzminute bei geringerer Intensität. So kannst du das Zahnfleisch sanft massieren. Die drei Intensitäten können zwischen "hoch" und "niedrig" je nach Intensität von links nach rechts angepasst werden.

## Sicher und sanft



Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen,

Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit deines Zahnfleisches zu verbessern.

## Zu viel Druck?



Vielleicht bemerkst du selbst es nicht, wenn du beim Putzen zu fest drückst, aber deine elektrische Zahnbürste mit Drucksensor schon. Wenn du dein Zahnfleisch zu sehr strapazierst, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch, um dich daran zu erinnern, weniger Druck auszuüben.

## BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück – eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.


## BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange du deinen Bürstenkopf bereits

verwendest und wie intensiv du putzt. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton dich darauf aufmerksam. So kannst du sicher sein, dass dein Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

## Hilfreiche Timer

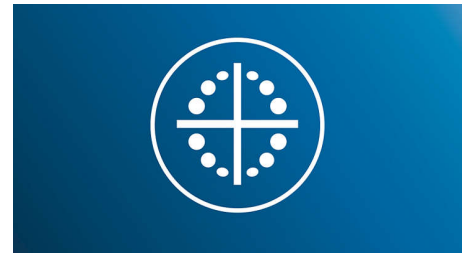

Unser 4-Quadranten-Timer teilt dir mit, wenn du ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht hast, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann du die empfohlenen zwei Minuten erreicht hast.

## Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

## Handliches Reiseetui und Ladegerät

In unserem hochwertigen Reiseetui kannst du deine Zahnbürste hygienisch aufbewahren und mit unserer kompakten Ladestation geht dir auch unterwegs nie der Strom aus. Du kannst die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):**  
14 Tage\*\*

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** marineblau

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte  
Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach  
aufsteckbare Bürstenköpfe

## Artikel enthalten

**Handstück:** 1 ProtectiveClean

**Bürstenköpfe:** 1 W2 Optimal White

**Ladegerät:** 1

**Reiseetui:** 1

## Reinigungsleistung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Vorteile für die Gesundheit:** Verringert  
Kariesbildung

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-  
Timer

**Weißer Zähne:** Hellt Zähne in 1 Woche auf

**Druck-Feedback:** Vibrierendes Handstück zur  
Warnung des Benutzers

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Weiß:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

**Gum Care:** Massiert sanft das Zahnfleisch

## Intelligente Sensor-Technologie

**BrushSync Erinnerungsfunktion:** So wissen Sie  
immer, wann, Sie die Bürstenköpfe  
austauschen sollten

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem  
Druck

