

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste mit App

ExpertClean 7300

Vernetztes Putzen leicht  
gemacht

Integrierter Drucksensor

Smart-Bürstenkopferkennung

3 Putzprogramme, 3 Intensitäten



HX9681/01



## Intelligente Technologie für eine gesunde Zahnpflege

Perfekte Reinigung für die Bedürfnisse Ihrer Patienten

Die Philips Sonicare ExpertClean hilft Ihren Patienten dabei, mithilfe der Smart Sensor-Technologie und Fortschrittsberichten ihre Gewohnheiten aufzuzeichnen und Feedback zu erhalten, um ihre Putztechnik und tägliche Zahnpflege zu verbessern.

### Für eine gute Mundgesundheit

- Erhöhter Oberflächenkontakt zur Entfernung von Plaque
- Bessere Zahnfleischpflege für die allgemeine Gesundheit

### Verbessert die Mundgesundheit Ihrer Patienten

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\* für eine gründliche Reinigung
- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\* in nur 2 Wochen

### Speziell für Ihre Patienten entwickelt

- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Einfaches Aufladen und stilvoller Start
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Verhilft Patienten zu besseren Zahnpflegegewohnheiten
- Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus

# Besonderheiten

## Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*




Der C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz bietet Ihnen unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt\*\* und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen\* zu erzielen.

## Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\*



Der G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches Ihres Patienten. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf sorgt klinisch erwiesen für bis zu 100 % weniger Zahnfleischartzündungen\* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.\*

## Fortschrittsbericht

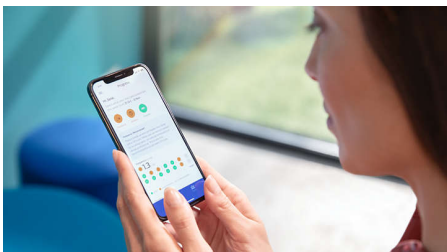

Sensoren verfolgen und messen das Putzverhalten der Patienten, während das Philips Sonicare ExpertClean Handstück

sofortiges Feedback liefert. Im Laufe der Zeit speichert und analysiert die Sonicare App diese Gewohnheiten und erstellt einen Fortschrittsbericht, um eine bessere Putztechnik zu fördern.

## 3 Putzprogramme, 3 Intensitäten




Die ExpertClean verfügt über die Putzprogramme Clean, Gum Health und Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: "Clean"-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, "Gum Health"-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und das "Deep Clean+"-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.

## Intelligente Bürstenkopf-Erkennung



Die intelligenten Bürstenköpfe sorgen dafür, dass Sie das richtige Putzprogramm und die richtige Intensitätsstufe für die bestmögliche Reinigung verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden den G3 Premium Gum Care Bürstenkopf. Die BrushSync Technologie Ihrer ExpertClean synchronisiert Ihren Bürstenkopf automatisch mit dem "Gum Health"-Putzprogramm, um Ihr Zahnfleisch gesund und sauber zu halten.

## Integrierter Drucksensor

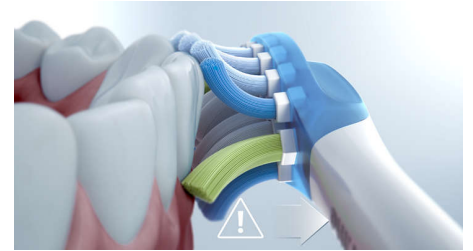

Vielleicht bemerken Sie selbst es nicht, wenn Sie zu fest putzen, aber Ihre ExpertClean schon. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück dieser intelligenten Zahnbürste sanft. So werden Sie daran erinnert, weniger Druck auszuüben und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

## C3 Premium zum Plaque-Schutz



Der C3 Premium zum Plaque-Schutz ist unser bester Bürstenkopf zur gründlichen Tiefenreinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x Mal mehr Oberflächenkontakt und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen\* zu erzielen.

# Daten

## Anschlüsse

**Kabellose Bluetooth®-Technologie:**  
Verbundene Zahnpflege-App

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar  
**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):**  
14 Tage\*\*\*  
**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Weiß und hellblau

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte  
Garantie

## Kompatibilität

**Android-Kompatibilität:** Android Smartphones,  
Bluetooth 4.0-fähige Tablets  
**iOS-Kompatibilität:** iPad der 3. Generation  
oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7  
oder höher, mit iOS7-Betriebssystem

## Benutzerfreundlichkeit

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach  
aufsteckbare Bürstenköpfe  
**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design  
**Erinnerungsfunktion:** Stellt jederzeit optimale  
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet  
auf

## Artikel enthalten

**Ladegerät:** 1  
**Reiseetui:** 1  
**Bürstenköpfe:** 1 C3 Premium zum Plaque-  
Schutz, 1 G3 Premium Gum Care  
**Handstück:** 1 ExpertClean

## Reinigungsleistung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000  
Bürstenkopfbewegungen/Min.  
**Leistung:** Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*  
**Vorteile für die Gesundheit:** Bis zu 7 x  
gesünderes Zahnfleisch\*  
**Weißer Zähne:** Hilft, Verfärbungen auf  
natürliche Weise zu entfernen  
**Timer:** BrushPacer und 2-Minuten-Timer  
**Druck-Feedback:** Vibrierendes Handstück zur  
Warnung des Benutzers

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung  
**3 Intensitätsstufen:** Niedrig, Mittel, Hoch  
**Deep Clean+:** Für eine besonders gründliche  
Reinigung  
**Gesundes Zahnfleisch:** Pflegt Backenzähne  
besonders gründlich

## Smart-Bürstenkopferkennung

**C3 Premium zum Plaque-Schutz:** Die perfekte  
Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm  
**G3 Premium Gum Care Bürstenkopf:** Die  
perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-  
Putzprogramm

## Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem  
Druck  
**BrushSync Erinnerungsfunktion:** So wissen Sie  
immer, wann, Sie die Bürstenköpfe  
austauschen sollten  
**BrushSync Technologie:** Verbindet das  
intelligente Handstück mit, dem intelligenten  
Bürstenkopf

## Software-Support

**Softwareaktualisierungen:** Philips bietet für  
2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende  
Softwareaktualisierungen an.

