

PHILIPS

Epilator IPL

Lumea Seria 7000

5 setări de intensitate a luminii

2 accesorii: corp, față

Aplicația Lumea IPL

Utilizare cu fir

BRI922/00



Rezultate vizibile după doar 3 tratamente*

Bucură-te de 12 luni de reducere a părului**

Obține o piele fină, fără păr cu epilatorul IPL Lumea Seria 7000. Tratamentele sunt delicate și eficiente datorită accesoriilor pentru fiecare zonă a corpului.

Delicat și eficient pentru piele fină de lungă durată

- Pentru rezultate rapide, tratamentul se aplică doar de 2 ori pe lună
- Dezvoltat împreună cu dermatologi pentru a fi ușor și eficient
- Cablu foarte lung pentru un plus de flexibilitate în timpul tratamentului

Soluție completă pentru față și corp

- Soluție completă pentru față și corp cu 2 accesorii
- Livrat cu o mini-perie de curățare facială VisaPure
- Adecvat pentru o gamă largă de tonuri ale pielii și culori ale părului

Tratament personalizat IPL pentru îndepărtarea părului

- Senzor de nuanță a pielii și 5 setări de intensitate
- Îmbunătățește-ți rutina cu aplicația Philips Lumea IPL

Repere

De 2 ori pe lună pentru rezultate rapide



La fiecare 2 săptămâni pentru a începe – aceasta înseamnă jumătate din numărul de tratamente de la alte mărci. Urmată de retușuri doar o dată pe lună. Asta e tot. Tratarea ambelor gambe durează 15 minute.

Senzor de nuanță a pielii



Alegeți din 5 setări de intensitate pentru o experiență confortabilă. Senzorul de nuanță a pielii vă împiedică să tratați zone ale pielii care sunt prea închise la culoare pentru tratamentul IPL.

Cablu foarte lung




Ușor de utilizat grație unui cablu foarte lung pentru acces facil și manevrabilitate crescută.

2 accesorii dedicate



Capetele diferite pentru corp și față funcționează cu viteză și precizie pentru o utilizare delicată chiar și pe suprafețele sensibile. Accesoriul pentru față are un filtru ușor integrat pentru tratamentul de precizie.


Dezvoltat împreună cu dermatologi

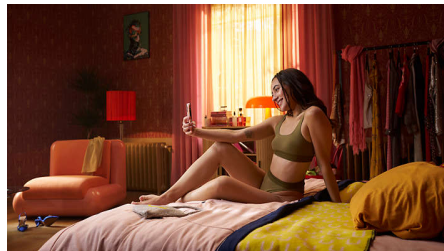

Ca lider în tehnologia pentru sănătate, Philips a dezvoltat Lumea IPL în consultare cu dermatologi, pentru utilizare ușoară și eficiență în siguranța casei tale. Derivat din tehnologia

utilizată în saloanele profesionale, Lumea IPL oferă un tratament delicat, chiar și în zonele sensibile.

Aplicația Philips Lumea IPL

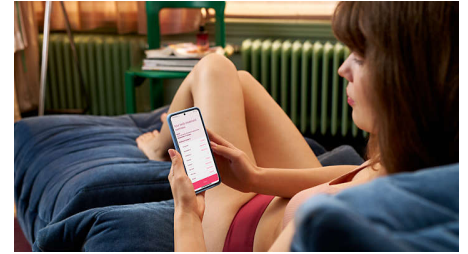

Aplicația noastră gratuită vă ajută să planificați tratamentul și să îl respectați, apoi vă ghidează pas cu pas prin fiecare sesiune. Descărcată de peste 2,1 milioane de utilizatori.

Perie mini de curățare facială VisaPure

Complează-ți rutina de îngrijire: Peria mini de curățare facială VisaPure este un dispozitiv de curățare a pielii, compact și ușor de folosit, pentru piele vizibil mai curată și suplă.

Potrivit pentru multiple tipuri de piele și păr

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



Tehnologia IPL are nevoie de contrast între pigmentul din culoarea părului și pigmentul din tonul pielii, prin urmare funcționează pe părul natural blond închis, castaniu și negru și cu tonuri ale pielii de la nuanțe deschise până la maro mediu (I-IV).

Specificații

Siguranță și setări reglabile

Filtru UV integrat: Îți protejează pielea de lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în funcție de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea neintenționată

Mod de aplicare

Slide și Flash: Pentru aplicare rapidă

Utilizare cu cablu / fără fir: Utilizare cu fir

Stamp și Flash: Pentru tratarea suprafețelor mici

Specificații tehnice

Lampă cu performanță ridicată: Conceput pentru a dura, 250.000 pulsații, echivalent a 20 de ani de durată de viață a lămpii***

Tensiune: 100-240 V

Serviciu

Garanție: 2 ani garanție globală + 1 an suplimentar de garanție la înregistrarea produsului în termen de 90 de zile

Articole incluse

Instrucțiuni de folosire: Manual de utilizare

Depozitare: Husă

Adaptor: 24 V/1500 mA

Timp de aplicare

Membrului inferior: 15 min

Zonele axilare: 2,5 min

Zona inghinală: 4 min

Zonele feței: 2 min

Perie mini de curățare facială VisaPure

Accesorii: Cap de perie pentru ten normal, Adaptor de alimentare

Alimentare: Adaptor de alimentare

Specificații tehnice pentru accesorii

Accesoriu pentru corp: Dimensiunea ferestrei: 4,0#160;cm2, Tratament pentru corp: picioare, brațe, abdomen și axile

Accesoriu pentru față: Dimensiunea ferestrei: 2#160;cm2, filtru suplimentar, Tratament pentru față: buza superioară, barbă și maxilar



* Măsurat pe picioare, 67% din cele 45 de femei obțin rezultate de 85% sau superioare

** Reducerea medie a părului de pe gambe după 12 tratamente este de 82%

*** La urmarea unui program de tratament. Calculat pentru utilizarea pe gambe, în zona inghinală, în zona axilară și pe față. Durata de viață a lămpii nu prelungește durata de 2 ani a garanției internaționale Philips.