

PHILIPS

sonicare

Sonický zubní
kartáček s aplikací

DiamondClean
Smart

Personalizované rady

Senzory inteligentní hlavice
kartáčku

Detekce inteligentní hlavice
kartáčku

4 režimy, 3 intenzity



HX9912/18



Zubní kartáček pro kompletní péči o zuby a dásně Můžete se cítit sebejistě díky 100% péči

Kartáček DiamondClean Smart umožňuje kompletní péči o ústní dutinu. Čtyři vysoce výkonné kartáčkové hlavice vám dovolí zaměřit se na všechny oblasti zdraví zubů a dásní a technologie Smart Sensor vám poskytne přizpůsobenou zpětnou vazbu a rady.

Proven to improve oral health

- Odstraní až 10krát více plaku* a zajišťuje hloubkové čištění

Personalized in-app coaching to perfect brushing

- Navádí vás při čištění a upozorňuje na vynechaná místa
- Navede vás zpět na místa, která jste vynechali, pro zajištění 100% pokrytí
- Začněte se lépe starat o problematické oblasti
- Upozorní vás, když na zuby příliš tlačíte
- Navede vás, abyste zmírnili drhnutí

Optimize your brushing

- Hlavice kartáčku automaticky vybere optimální nastavení
- Využijte hlavici kartáčku co nejúčinněji
- Vyberte si ze 4 režimů a 3 nastavení intenzity
- Prémiová nabíjecí sklenice a cestovní pouzdro


Přednosti

Rozlučte se s plakem




Nasadte hlavici C3 Premium Plaque Defense pro zajištění unikátního hlubkového čištění. Jemná flexibilní vlákna na stranách hlavice se přizpůsobí tvaru každého zubu a zajišťují tak 4x větší kontakt s povrchem*** a odstranění až 10x více plaku z obtížně dostupných oblastí*.

Nevynechá ani místečko

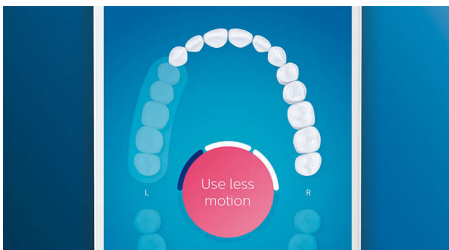


Aplikace Philips Sonicare vás upozorní, až dosáhnete dokonalého vyčištění, a poradí vám, jak si zuby čistit lépe a důkladněji.

Funkce TouchUp

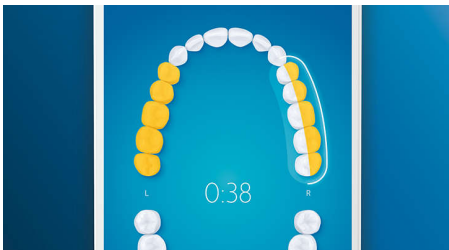


Pokud při čištění zubů vynecháte nějaké místečko, funkce TouchUp aplikace vám ukáže, kam se vrátit, abyste měli jistotu, že pokaždé dosáhnete kompletně čistého chrupu.

Automatické upozornění na potřebu výměny

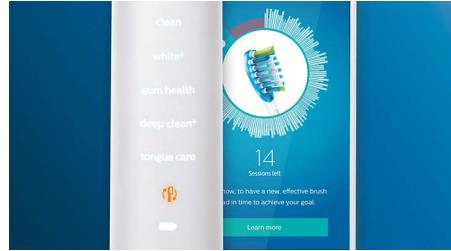


Hlavice kartáčku se průběžně opotřebuje a její účinnost při odstraňování plaku se postupně snižuje. Díky inteligentnímu rozpoznávání hlavice kartáčku nikdy neztratíte přehled o tom, kdy hlavici vyměnit. Kartáček na zuby sleduje, jak dlouho a s jakou intenzitou jste si zuby čistili jednotlivými hlavicemi, a upozorní vás, kdy nastává čas na výměnu. Životnost hlavic kartáčku můžete sledovat také pomocí aplikace Philips Sonicare a dokonce si v ní i objednat náhradní hlavice, aby vám nikdy nedošly.

Nastavení oblastí zaměření a cíle

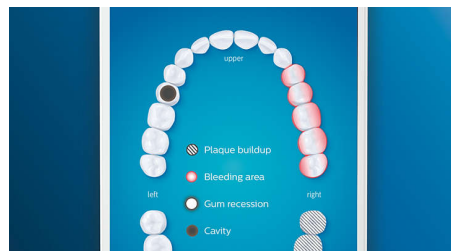

Máte v ústech nějaká problematická místa, na které vás upozornil zubní lékař? Pomůžeme vám je zvýraznit na 3D mapě vašich úst v aplikaci a připomeneme vám, abyste těmto oblastem věnovali více pozornosti.

Příliš velký tlak?

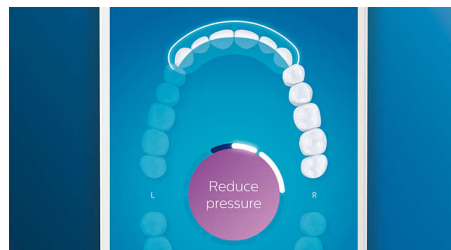

Pravděpodobně si ani nemusíte všimnout, když při čištění zubů vyvíjíte příliš velký tlak, ale DiamondClean Smart si toho všimne.


Pokud vyvíjíte příliš velký tlak, světelný kroužek na konci těla začne blikat. Tím vás jemně upozorní, že byste měli tlak zmírnit, a nechat to vše na hlavici kartáčku. 7 z 10 lidí uvádí, že jim tato funkce pomohla lépe čistit zuby.

Jen snadno



Když používáte elektrický kartáček, můžete nechat práci na něm. V těle kartáčku je zabudovaný senzor pohybu, který vás jemně upozorní, že byste měli zmírnit. Díky tomu můžete vylepšit techniku čištění a zuby si vyčistit šetrněji a účinněji.

Párování režimů BrushSync

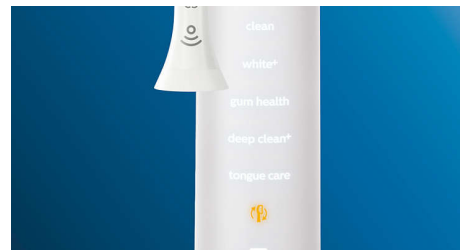

Lámete si hlavu nad tím, jaký režim a intenzitu použít? Už nemusíte. Mikročip v hlavici kartáčku sdělí aplikaci DiamondClean Smart, který režim a intenzita to je. Takže pokud například nasadíte hlavici pro péči o dásně, kartáček ví, že má vybrat optimální režim a intenzitu zajišťující jemnou, ale efektivní péči pro vaše dásně. Stačí stisknout aktivační tlačítko.

Specifikace

Design a provedení

Barva: Černá, Bílá

Možnosti připojení

Bezdrátová technologie Bluetooth®: Aplikace pro čištění zubů

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití):

14 dní*****

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Kompatibilita

Kompatibilita se systémem Android: Telefony Android, Tablety s funkcí Bluetooth 4.0

Kompatibilita se systémy iOS: iPad

3. generace nebo vyšší, iPhone 4S nebo vyšší, se systémem iOS7 nebo vyšším

Snadné použití

Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává životnost baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Displej: Osvětlený displej

Rozpoznání kartáčkové hlavice: Synchronizace s optimálním režimem

Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky, ikona připomenutí se rozsvítí

Balení obsahuje

Rukojeť: 2 DiamondClean Smart

cestovní pouzdro: 2, Nabíjecí cestovní pouzdro s USB

Kartáčkové hlavice: 2 kartáčkové hlavice C3 Premium Plaque Defence

Nabíjecí sklenice: 2

Výkon čištění

Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku*

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Pomáhá zlepšit zdravotní stav dásní

Časovač: Technologie BrushPacer a Smartimer

Kontrola tlaku: Nachové zabarvení kroužku,

Vibrace těla kartáčku jako upozornění

TouchUp: Zajišťuje 100% pokrytí

Režimy

3 intenzity: Nízká, Střední, Vysoká

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Deep Clean+: Unikátní hloubkové čištění

Gum Health: Speciální pozornost věnovaná stoličkám

White+: Odstraňuje povrchové skvrny

Párování režimů BrushSync

Kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care:

Kompatibilní s režimem Gum Health

Kartáčková hlavice W3 Premium White:

Kompatibilní s režimem White+

Premium Plaque Defence: Kompatibilní s režimem Clean

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

Polohový senzor: Sleduje a vylepšuje pokrytí

Tlakový senzor: Návod na redukci drhnutí

3D mapa úst: Zvýrazní problémová místa

TouchUp: Pro řešení vynechaných míst

Softwarová podpora

Aktualizace softwaru: Společnost Philips nabízí příslušné aktualizace softwaru po dobu 2 let od data zakoupení.

