

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische Schallzahnbürste  
– Testmodell

FlexCare Platinum

3 Putzprogramme,  
3 Intensitäten

2 Bürstenköpfe

Mit Drucksensor



HX9142/31



## Gleicht unregelmäßige Putztechniken aus

Unsere erste Zahnbürste mit AdaptiveClean-Technologie

Die AdaptiveClean-Technologie besteht aus zwei Komponenten: Dem AdaptiveClean Bürstenkopf und einem intuitiven Drucksensor. Beide ermöglichen es Ihren Patienten, ihre Zähne intelligenter und schonender zu putzen.

### Für eine gute Mundgesundheit

- 4-Quadranten-Timer
- 2-Minuten-Timer
- UV-Reinigungsgerät

### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- InterCare Bürstenkopf

### Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Intuitiver Drucksensor

### Hervorragende Reinigung

- AdaptiveClean Bürstenkopf
- Patentierte Sonicare Schalltechnologie
- Individuell anpassbare Reinigungseinstellungen

### Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Das neue Deep Clean-Putzprogramm: Problemstellen mühelos pflegen

# Besonderheiten

## Sonicare Schalltechnologie



Dank des dynamischen Flüssigkeitseffekts werden Zahnpasta und Speichel in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült, für eine gründliche und dennoch sanfte Reinigung.

## Deep Clean-Putzprogramm



Unser neues "Deep Clean"-Putzprogramm reinigt selbst schwer erreichbare Stellen besonders effektiv. Die einzigartige Bewegung des Bürstenkopfs in diesem Putzprogramm sowie eine erweiterte dreiminütige Putzzeit machen es zur idealen Wahl für die gründliche Pflege von Problemstellen.

## AdaptiveClean Bürstenkopf



Weiche, flexible Seiten aus Gummi sorgen dafür, dass sich die Borsten des Bürstenkopfes der Kontur der Zähne und des Zahnfleischs anpassen. Dies sorgt für bis zu 4 Mal mehr Oberflächenkontakt\* zwischen Borsten und Zahn. Dank des flexiblen Bürstenkopfes werden die Borsten sanft am Zahnfleischrand entlang geführt und übermäßiger Druck während des Putzens wird absorbiert. Durch die optimierte Schwingbewegung entsteht ein einzigartiges

Putzgefühl und die Reinigung entlang des Zahnfleischrands und an schwer erreichbaren Stellen wird unterstützt\*. So werden nachweislich bis zu 10 Mal mehr Plaque als mit einer Handzahnbürste an schwer erreichbaren Stellen entfernt\*.

## InterCare Bürstenkopf




Extra lange und dichte Borsten reichen tiefer zwischen die Zähne und entfernen somit deutlich mehr Plaque\* in den Zahnzwischenräumen. Optimal für Patienten mit Zahnfleischbluten oder erhöhtem Risiko von Zahnfleischentzündungen.

## Intuitiver Drucksensor



Wenn zu viel Druck ausgeübt wird, vibriert das Handstück sanft, um den Patienten darauf aufmerksam zu machen und ihm die richtige Technik zu vermitteln. In einer Studie unter Patienten in den USA reduzierten 7 von 10 Patienten, die zu aggressiv putzten, ihren Bürstendruck bei Verwendung des Drucksensors.

## Individualisierbare Reinigungseinstellungen

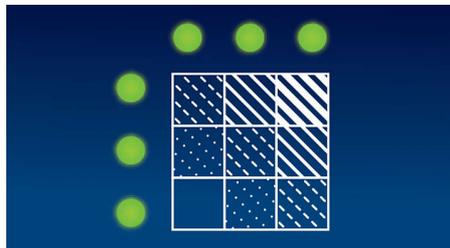

Drei Intensitätsstufen und drei Putzprogramme ermöglichen ein optimal auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmtes


Reinigungserlebnis, welches die Behandlungstreue der Patienten erhöht. Das dreiminütige "Deep Clean"-Programm bietet eine hervorragende Reinigung an schwer erreichbaren Stellen. Es ist das optimale Putzprogramm für Patienten, die auf problematische Stellen achten müssen.

## UV-Reinigungsgerät



Tötet 99 % der Bakterien und Viren ab\*. Eventuell als Zubehör in einem der Praxismodelle erhältlich.

## 4-Quadranten-Timer

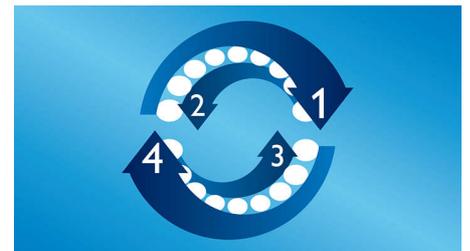

Der 30-Sekunden-Intervall-Timer gewährleistet gründliches Bürsten aller vier Quadranten im Mund.

## 2-Minuten-Timer



Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 3 Wochen\*\*

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Platin-Grau

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Bürstenkopfsystem:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Anzeige:** Beleuchtetes Display

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Reinigungsdauer:** Bis zu 3 Wochen\*\*\*

## Artikel enthalten

**Ladegerät:** 1

**Reiseetui:** 1

**Handstücke:** 1 FlexCare Platinum

**Bürstenköpfe:** 1 AdaptiveClean, 1 InterCare, Standard

## Reinigungsleistung

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Leistung:** Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*

**Vorteile für die Gesundheit:** Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

**Drucksensor:** Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

**Timer:** 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

**Weißer Zähne:** Hilft, Verfärbungen auf natürliche Weise zu entfernen

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**3 Intensitätsstufen:** Hoch, Niedrig, Mittel

**Deep Clean:** Für eine besonders gründliche Reinigung

**Weiß:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

