

# PHILIPS

## sonicare



2x Elektrische  
Schallzahnbürsten - Weiß

3100 series

Drucksensor

2-Minuten-Timer

Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque

14 Tage Betriebsdauer



HX3675/13

## Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.

### Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung\*

Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr\* als eine Handzahnbürste.

#### Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Akkulaufzeit von 14 Tagen
- Das ergonomische Design macht das Halten und die Verwendung der Zahnbürste einfach
- Auf Wiedersehen Adapter. Hallo USB.

#### Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

#### Einfacher Übergang zu Sonicare

- Easy-Start erleichtert den Übergang

#### Schützt Ihr Zahnfleisch

- Der integrierte Drucksensor schützt Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch

#### Hervorragende Reinigung

- Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste\*
- Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung


# Besonderheiten

## Fortschrittliche Schalltechnologie




Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikroböhlen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.\*\* 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.

## Entfernt 3 x mehr Plaque\*

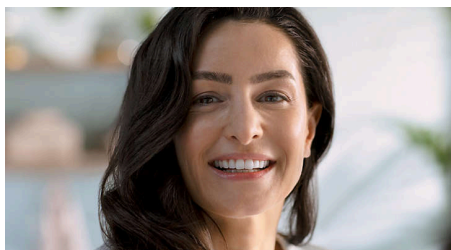

Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque\* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.


## Schützt Ihr Zahnfleisch

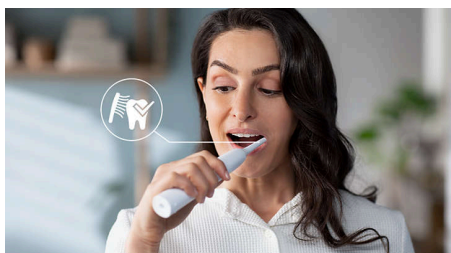

Der integrierte Drucksensor erkennt automatisch den von Ihnen ausgeübten Druck, warnt Sie und reduziert die Vibrationen der Zahnbürste

automatisch, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. Die Zahnbürste gibt ein pulsierendes Geräusch aus, um den Druck zu reduzieren. 7 von 10 Personen fanden, dass diese Funktion ihnen zu einem besseren Putzerlebnis verhalf.

## 2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer

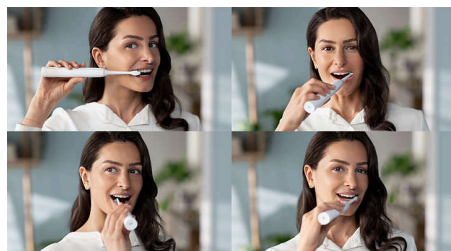

Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.

## Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse



Das schlanke, leichte und ergonomische Design erleichtert das Halten und die Verwendung der Zahnbürste, sodass Sie eine erstaunliche Reinigung ohne jede Belastung erhalten können.

## BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie

intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

## Easy-Start-Funktion



Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

## Lange Akkulaufzeit



Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können.

## Auf Wiedersehen Adapter. Hallo USB.

Netzteile mögen klein erscheinen, aber zusammengenommen hat der Kunststoff, aus dem sie bestehen, einen großen Einfluss auf die Umwelt. Allein durch die Umstellung auf ein USB-Ladegerät in unseren Philips Sonicare Serien 1000 bis 4000 können wir bis zu 189.210 kg Kunststoff in vier Jahren einsparen\*\*\*. Das ist ganz schön viel, oder?

## 3100 series

2x Elektrische Schallzahnbürsten - Weiß

HX3675/13

# Daten

### Leistung

Stromspannung: DC5V

### Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):

14 Tage\*\*\*\*\*

Batterietyp: Lithium-Ionen

### Consumer Trade Item

Height: 22 cm

Width: 16.9 cm

Length: 6.3 cm

Net weight: 0.409 kg

Gross weight: 0.536 kg

GTIN: 8710103985686

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

### Außenkarton

Height: 23.5 cm

Width: 17.6 cm

Length: 19.8 cm

Net weight: 1.227 kg

Gross weight: 1.737 kg

GTIN: 18710103985683

### Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

### Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte

Garantie

### Pallet Layer

Height: 23.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

### Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare  
Bürstenköpfe

BrushSync Erinnerungsfunktion:

Erinnerungsfunktion, So wissen Sie immer, wann,  
Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten,  
Erinnerungssymbol leuchtet auf, Stellt jederzeit  
optimale Ergebnisse sicher

### Artikel enthalten

Handstück: 2 Serie 3100

Bürstenköpfe: 2 C1 ProResult Bürstenköpfe

Ladegerät: 2

### Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque\*

Geschwindigkeit: Bis zu

31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-  
Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur  
Warnung des Benutzers

### Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

### Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem  
Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie  
immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen  
sollten

