

PHILIPS

sonicare

„Sonic“, elektrinis dantų
šepetėlis su programėle

DiamondClean Smart
9400

Asmeniniai mokymai

Išmanieji šepetėlio galvutės
jutikliai

Išmanus šepetėlio galvutės
atpažinimas

4 režimai, 3 intensyvumai

HX9917/88



Visapusiška priežiūra sveikesnei burnai

Pasitikėkite savimi, nes jis veikia 100 %

„DiamondClean Smart 9400“ – mūsų geriausias dantų šepetėlis visapusiškai priežiūrai. Naudodami labai veiksmingas šepetėlio galvutes sutelksite dėmesį į visas burnos sveikatos sritis, o mūsų „Smart Sensor“ technologija pateiks jums asmeniškai skirtą atsiliepimą ir mokymus.

Proven to improve oral health

- Pašalina iki 20 kartų daugiau apnašų* ir giliai valo

Asmeniniai mokymai programoje, kad valytumėtės idealiai

- Sutelkia dėmesį į valymą ir pabrėžia praleistas vietas
- Primena apie praleistas vietas, kad išsivalytumėte 100 %
- Pradėkite labiau rūpintis daugiau dėmesio reikalaujančiomis vietomis
- Praneša, jei per daug spaudžiate
- Padeda sumažinti trynimą

Optimize your brushing

- Šepetėlio galvutės automatiškai parenka optimalius nustatymus
- Įsitikinkite, kad geriausiai išnaudojate šepetėlio galvutę
- Rinkitės iš 4 režimų 3 intensyvumų nustatymų
- Lengvai ir stilingai įkraunamas tiek namuose, tiek kelionėje

Ypatybės

Atsiveikinkite su apnašomis




Uždėkite „G3 Premium Plaque Control“ šepetėlio galvutę, kuri suteiks giliausią valymą. Ji turi minkštus, lanksčius kraštus, o šereliai prisitaiko prie dantų paviršiaus formos, kad kontaktas su paviršiumi būtų 4 didesnis*** ir pašalintų iki 20 kartų daugiau apnašų iš sunkiai pasiekiamų vietų*.

4 režimai, 3 intensyvumo nustatymai




Su „DiamondClean Smart“ darbas atliekamas iki galo. Su mūsų 3 intensyvumo nustatymais pagerinsite valymą, o su 4 režimais patenkinsite visus valymo poreikius; „Clean“ režimas – išskirtiniam kasdieniam valymui, „White+“ – dėmėms šalinti, „Deep Clean+“ – stiprinančiam giliam valymui, o „Gum Health“ švelniai valyti pagal dantenų liniją.

Niekada nepraleiskite jokios vietos

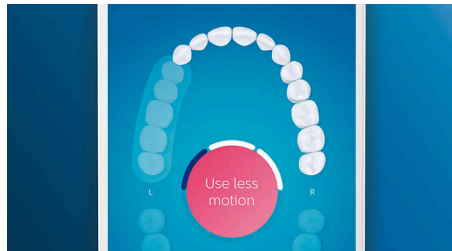


Su „Philips Sonicare“ programėle žinosite, kada išsivalėte kruopščiai ir švariai, bei mokysitės būti geresni, atidesni dantų valymo metu.

„TouchUp“ funkcija

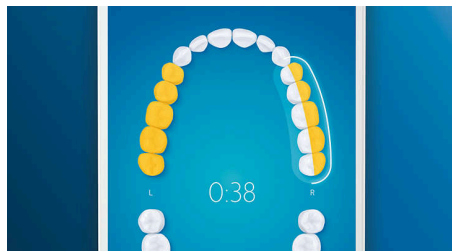

Jei valydami dantis praleisite kurią nors vietą, programėlės „TouchUp“ funkcija tai parodys. Galėsite dar kartą išvalyti tą vietą ir būti tikri, kad kaskart iki galo išsivalote dantis.


Išmanusis galvutės keitimo priminimas

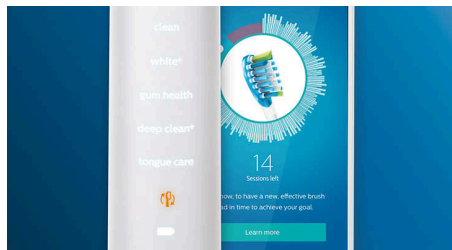

Bėgant laikui šepetėlio galvutės nusidėvi ir nebe taip veiksmingai šalina apnašas. Su išmaniuoju šepetėlio galvutės atpažinimu visada žinosite,


kada pakeisti šepetėlio galvutę. Dantų šepetėlis seka, kiek ilgai ir kaip stipriai valėtės su kiekviena šepetėlio galvute, ir įspėja, kai galvutę reikia pakeisti. Be to, „Philips Sonicare“ programėlėje galite stebėti, kiek laiko naudojote šepetėlio galvutes, ir net užsisakyti galvučių pakeitimui, kad jų niekada nepritrūktumėte.

Vietos, kurioms skiriamas dėmesys, ir tikslų nustatymas

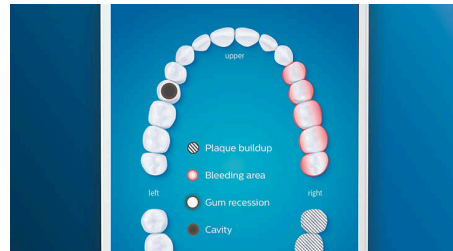

Ar odontologas atkreipė dėmesį į rūpesčių keliančias vietas? Mes jas akcentuosime programėlės 3D burnos schemoje ir priminsime skirti papildomo dėmesio šioms vietoms.

Per daug spaudžiate?

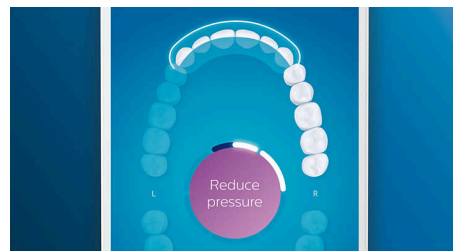

Galite nepastebėti, kada valote dantis per stipriai, tačiau „DiamondClean Smart“ tai pastebės. Jei per daug spausite, užsidegs rankenos gale esantis šviečiantis žiedas. Tai – neįkylus priminimas mažiau spausti ir leisti šepetėlio galvutei atlikti savo darbą. 7 iš 10 žmonių ši funkcija padėjo geriau valyti dantis.


DiamondClean Smart 9400

„Sonic“, elektrinis dantų šepetėlis su programėle

HX9917/88


Ypatybės

Taip lengva naudotis

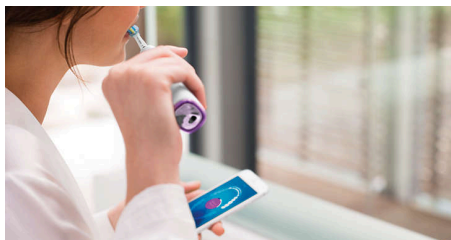

Naudodami elektrinį dantų šepetėlį leidžiate jam atlikti darbą. Rankenoje įmontavome trynimo jutiklį, kuris neįkyriai primena, kad mažiau šveistumėte. Tokiu būdu patobulinsite techniką ir dantis išsivalysite švelniau bei efektyviau.

„BrushSync“ režimas-poravimas

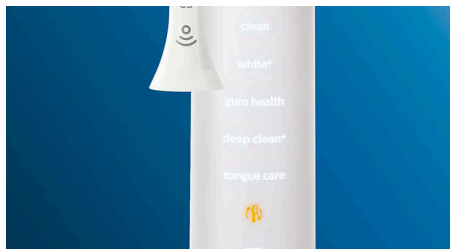

Svarstote, kurį režimą ir intensyvumą naudoti? Daugiau nesvarstykite. Integruotas lustas šepetėlio galvutėje nurodo „DiamondClean Smart“, ką naudojate. Tad, jei, pvz., uždėsite dantenų priežiūrai skirtą šepetėlio galvutę, dantų šepetėlis pasirinks optimalų režimą ir intensyvumą, kad švelniai, bet veiksmingai nuvalytų danteną. Jums tereikia paspausti įjungimo mygtuką.

Sukurta galvojant apie laikymą



Mėgausitės reguliariai naudodami dvi savaites visiškai įkrovę vieną kartą. Tačiau, jei išsikrautų keliaujant, prabangus USB kelioninis dėklas veikia ir kaip įkroviklis. Įdėkite dantų šepetėlį į dėklą ir prijunkite prie nešiojamojo kompiuterio arba įjunkite į sieninį lizdą. Norėdami įkrauti namuose, tiesiog įdėkite šepetėlį į blizgančią stiklinę-įkroviklį. Ji stilingai atrodys vonios kambaryje bei galėsite ją naudoti kaip stiklinę burnai skalauti.

DiamondClean Smart 9400

„Sonic“, elektrinis dantų šepetėlis su programėle

HX9917/88

Specifikacijos

Produkto atnaujinimas

Palaikymo laikotarpis: „Philips“ iki 2026 m. gruodžio 31 d. teiks būtinus saugumo atnaujinimus.

Prijungimo galimybė

„Bluetooth®“ belaidė technologija: Valymo programa prisijungus

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 14 dienų***

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Energijos sąnaudos: Budėjimo režimu be ekrano <0,5 W

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Suderinamumas

Suderinamumas su „Android“: „Android“ OS 8.0 arba naujesnė versija

Suderinamumas su „iOS“: „iPhones“ su „iOS“ 13.0 arba naujesnė versija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Šepetėlio galvutės atpažinimas:

Sinchronizuojama su optimaliu režimu

Pakeitimo priminimas: Kad visada užtikrintų geriausius rezultatus, užsidega priminimo piktograma

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „DiamondClean Smart“

Šepetėlių galvutės: 1 „viskas viename“

aukščiausio lygio šepetėlio galvutė, 1 „G3

Premium Gum Care“

Stiklinis kroviklis: 1

Kelioninis dėklas: USB įkroviklis-kelioninis dėklas

Valymo veiksmingumas

„Performance“: Pašalina iki 20 k. daugiau apnašų*

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Žiedas užsidega violetine spalva, Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

„TouchUp“: Užtikrintas 100 % valymas

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

3 intensyvumo nustatymai: Žemas, Vidutinis, Aukštas

„Deep Clean+“: Stiprinantis gilus valymas

„Gum Health“: Skirta švelniam, bet veiksmingam dantenų valymui

„White+“: Paviršinėms dėmėms šalinti

„BrushSync“ režimas-poravimas

Šepetėlio galvutė „G3 Premium Gum Care“:

Suderinama su „Gum Health“ režimu

Viskas viename „Premium“: Suderinama su valymo režimu

Išmanioji jutiklinė technologija

Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai

Vietos jutiklis: Seka valomas vietas ir pagerina valymą

Trynimo jutiklis: Padeda sumažinti trynimą

3D burnos schema: Pabrėžia rūpesčių keliančias vietas

„TouchUp“: Kad nukreiptų į praleistas vietas

Programinės įrangos palaikymas

Programinės įrangos naujiniai: „Philips“ siūlo atitinkamus programinės įrangos naujinius 2 metų po pirkimo datos.

