

PHILIPS

sonicare

Bielsze zęby,
zdrowsze dziąsła

DiamondClean
Smart

5 programów czyszczenia

Intensywność: wysoka, średnia,
niska

Aplikacja mobilna: mapa jamy
ustnej

Czujnik siły nacisku: wibracje
oraz podświetlenie



HX9924/27



Bielsze zęby, zdrowsze dziąsła

Nasza najlepsza szczoteczka do zębów z technologią inteligentnych czujników

5 programów czyszczenia (clean, white+, gum health, deep clean+, tongue care), 3 poziomy intensywności (niski, średni, wysoki), Aplikacja mobilna (mapa jamy ustnej, śledzenie postępów), Czujnik siły nacisku na zęby i dziąsła, Zaawansowany Timer (30 sek. / 2min.), Przypomnienie o wymianie końcówki dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Na jednym ładowaniu pracuje do 14 dni.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Usuwa do 10x więcej płytki nazębnej*
- Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła* już w 2 tygodnie
- Usuwa do 100% więcej przebarwień** w ciągu zaledwie 3 dni
- Stale ciesz się świeżym oddechem

Spersonalizowane porady w aplikacji ułatwiają idealne czyszczenie

- Podaje wskazówki dotyczące szczotkowania i wskazuje pominięte obszary
- Wskazuje pominięte miejsca podczas szczotkowania, co pozwala umyć 100% powierzchni zębów
- Rozpocznij lepszą pielęgnację kłopotliwych obszarów
- Ostrzega, gdy zbyt mocno naciskasz
- Pomaga ograniczyć ścieranie zębów

Zoptymalizuj czyszczenie

- Łatwe i stylowe ładowanie w domu i w podróży
- Główki szczoteczki automatycznie wybierają optymalne ustawienie
- Do wyboru jest 5 programów i 3 ustawienia intensywności

Zalety

Zapomnij o płytce nazębnej



Przymocuj główkę szczoteczki C3 Premium Plaque Control, aby poczuć, na czym polega głębokie czyszczenie. Dzięki miękkim elementom bocznym włosie dopasowuje się do kształtu każdego zęba, czterokrotnie zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami***. Pozwala także usunąć nawet 10 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc*.

Dba o dziąsła



Nałóż główkę szczoteczki G3 Premium Gum Care, aby poprawić zdrowie swoich dziąseł. Mniejszy rozmiar oraz specjalne włosie do linii dziąseł zapewnia delikatne i jednocześnie efektywne czyszczenie wzdłuż linii dziąseł, tam gdzie rozpoczyna się zapalenie dziąseł. Badania kliniczne wykazały, że zmniejsza ryzyko zapalenia dziąseł o 100%* i pozwala uzyskać nawet 7-krotnie zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie*.

Białe zęby w krótkim czasie.



Nałóż główkę szczoteczki W3 Premium White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalnie bielszy uśmiech. Badania


klinicznie wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu zaledwie 3 dni**.

Szczoteczka do języka TongueCare+




Zalóż szczoteczkę do języka TongueCare+, aby delikatnie usunąć z porów na języku powodujące nieprzyjemny zapach bakterie. Jej 240 specjalnie zaprojektowanych mikrowłosek dociera do wszystkich nierówności na języku, aby usunąć bakterie i zanieczyszczenia, które powodują nieświeży oddech. W połączeniu ze sprayem do języka BreathRx zapewnia to doskonałe czyszczenie i bardzo świeży oddech.

Obszary, którym należy poświęcić więcej uwagi i ustawianie celów

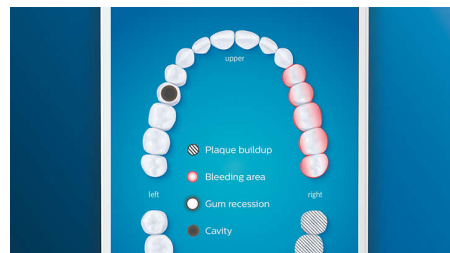

Masz jakieś kłopotliwe obszary, które wskazał dentysta? Pokażemy je na trójwymiarowej mapie uzębienia w aplikacji i przypomnimy o zwróceniu na nie szczególnej uwagi.

Dokładne mycie zębów

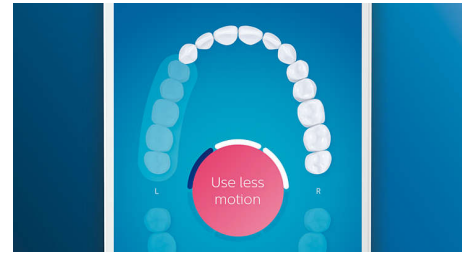


Aplikacja Philips Sonicare informuje o dokładnym wymyciu zębów oraz uczy, jak lepiej i uważniej je szczotkować.

Zrób to z łatwością



Korzystając z elektrycznej szczoteczki, pozwalasz jej szczotkować zęby. Umieściliśmy w ręczce szczoteczki czujnik ścierania, który przypomina, aby ograniczyć zbyt mocne szczotkowanie. W ten sposób można udoskonalić technikę i czyścić zęby w bardziej delikatny oraz skuteczniejszy sposób.

Funkcja Brush Sync

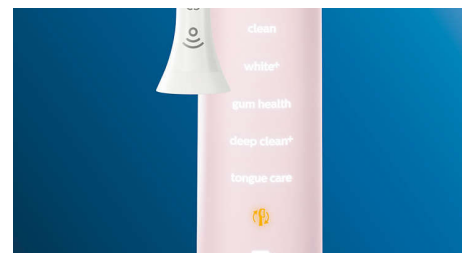

Zastanawiasz się, jakiego trybu lub poziomu intensywności użyć? Koniec z rozterkami. Mikrochip w główce szczoteczki informuje szczoteczkę DiamondClean Smart, z jakiego programu korzystasz. Jeśli nałożysz główkę szczoteczki Gum Care, szczoteczka do zębów będzie wiedziała, że ma wybrać optymalny tryb i intensywność, aby zapewnić delikatną i skuteczną pielęgnację dziąseł. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania.

Dane techniczne

Możliwości połączeń

Bluetooth®: Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: 14 dni*****

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Różowy

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z systemem Android, Tablety z włączoną funkcją Bluetooth 4.0

Zgodność z systemem iOS: Urządzenie iPad trzeciej generacji lub wyższej, Telefon iPhone 4S lub wyższy, z systemem iOS7 lub wyższym

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę

szczoteczki w łatwy sposób

Rozpoznawanie główki szczoteczki:

Synchronizacja z optymalnym programem
Przypomnienie o wymianie końcówki: Ikonka na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

Elementy zestawu

Rączka: 1 DiamondClean Smart

Końcówki szczoteczki: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 główka do czyszczenia języka TongueCare+

Etui podróżne: Etui podróżne z możliwością ładowania USB

Szklanka do ładowania: 1

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Korzyści dla zdrowia: Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła****

Wydajność: Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej*

Usuwanie przebarwień: Nawet 100% mniej przebarwień*****

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Odmierza zalecane przez dentystów 2 minuty oraz cykle 20 sekundowe

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Krąg świeci na fioletowo, Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

TouchUp: Gwarantuje czyszczenie 100% powierzchni

Tryby

3 poziomy intensywności: Wysoki, Średni, Niski
Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień
Deep Clean+: Pobudzające głębokie czyszczenie

Gum Health: Skuteczne czyszczenie bardzo delikatne dla dziąseł

TongueCare+: Świeży oddech na długo

White+: Usuwanie przebarwień

Parowanie w programie BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Łączy się z programem czyszczenia

Główka szczoteczki G3 Premium Gum Care:

Łączy się z trybem zdrowia dziąseł

Końcówka W3 Premium White: Łączy się z trybem White+

Szczoteczka do języka TongueCare+: Łączy się z trybem TongueCare

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

Czujnik położenia: Śledzi i poprawia dokładność szczotkowania

Czujnik ścierania: Pomaga ograniczyć ścieranie

Mapa jamy ustnej 3D: Wskazuje kłopotliwe obszary

TouchUp: Ułatwia powrót do miejsc, które zostały pominięte



* Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka

** W porównaniu ze zwykłą szczoteczką i pastą wybielającą wiodącej marki.

** w porównaniu ze szczoteczką manualną

**** W trybie zdrowia dziąseł Gum Health, w porównaniu ze zwykłą szczoteczką, w ciągu dwóch tygodni.

***** Po 3 dniach używania w trybie White+ w porównaniu ze zwykłą szczoteczką.

***** W przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie w trybie standardowym