

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
électrique

ProtectiveClean 4300

Capteur de pression intégré

1 mode de nettoyage

1 fonction BrushSync™



HX6800/44

Des dents plus blanches, en douceur.

Éclaircit les dents en seulement 1 semaine.

Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Éclaircit les dents en 1 semaine.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes
- Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Une excellente façon de vous habituer à votre nouvelle brosse à dents
- Encourage un brossage soigneux

Technologie innovante

- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes
- Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort

Points forts

Des dents naturellement plus blanches



Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Technologie BrushSync™



Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

Trop de pression ?



Si vous ne vous rendez pas compte que vous vous brossez les dents trop fort, votre brosse à dents électrique équipée d'un capteur de pression vous alertera par le biais d'impulsions sonores pour vous rappeler de réduire votre pression.

Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.


Fonction Easystart



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. C'est pour cela que notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une

augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

Minuteurs pratiques

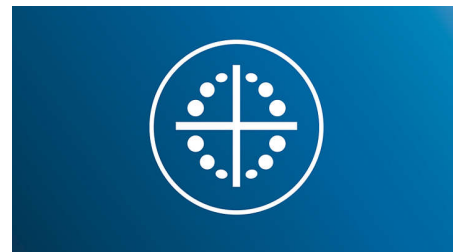

Notre fonction Quadpacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que notre fonction Smartimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

ProtectiveClean 4300

Brosse à dents électrique

HX6800/44

Caractéristiques

Alimentation

Tension : 100-240 V, 50-60 Hz

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Consommation d'énergie: Mode veille sans affichage : <0,5 W

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Noir/gris

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Manche: 1 ProtectiveClean

Têtes de brosse: 1 W2 Optimal White

Chargeur: 1

Performances de brossage

Bénéfices santé: Aide à réduire les caries

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Éclaircit les dents en une semaine

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

2 intensités: Faible, Fort

Technologie de capteur intelligent

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

