

# PHILIPS

## sonicare

TongueCare+-  
spraykit

TongueCare+

1 tongreiniger

1 tongspray

BrushSync-koppeling van  
poetsstanden

HX8071/17



## Schone tong, frisse adem

Reinig uw tong met Philips Sonicare

Klikken, spuiten, schoon. Onze baanbrekende slimme TongueCare+-tongreiniger en tongspray veranderen uw Philips Sonicare-tandenborstel direct in een krachtige oplossing voor een frisse adem. Uw tong krijgt een Sonicare-reiniging wat zorgt voor een langdurig frisse adem

### **An easy addition to your oral care routine**

- Van tandenborstel naar tongreiniger in slechts één klik
- Doodt bacteriën die slechte adem veroorzaken en neutraliseert geurtjes direct
- Bereik eenvoudig elk deel van uw tong

### **Innovative technology**

- 240 MicroBristles voor een zachte, grondige reiniging
- Reinig uw tong met Philips Sonicare
- De tongreiniger koppelt automatisch met uw tandenborstel

# Kenmerken

## MicroBristles




De TongueCare+-tongreiniger bestaat uit 240 rubberen MicroBristles en reinigt specifiek het zachte en poreuze oppervlak van uw tong. De flexibele MicroBristles volgen randen en groeven en verwijderen zo — in combinatie met de antibacteriële Philips Sonicare BreathRx-tongspray — opgehoopte bacteriën. Dankzij de compacte vorm kunt u comfortabel de hele tong reinigen.

## Sonische technologie



TongueCare+ is de enige tongreiniger van met de kracht van Philips Sonicare. Deze tongreiniger verwijdert met elke beweging bacteriën die een slechte adem veroorzaken. 31.000 trillingen per minuut maken een einde aan aanslag op de tong, verwijderen bacteriën die een slechte adem veroorzaken, en zorgen dat de antibacteriële ingrediënten van de Philips Sonicare BreathRx-tongspray diep binnendringen. Uw tong voelt schoner aan en uw adem blijft langer fris.

## Smart-koppeling van poetsstanden

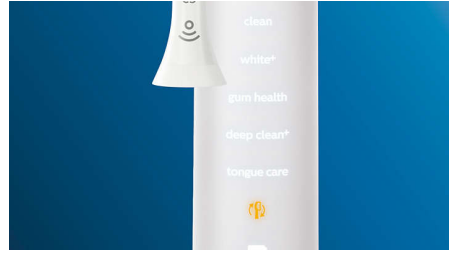

Onze slimme TongueCare+-tongreiniger heeft een microchip die communiceert met het handvat van de tandenborstel. Wanneer u de tongreiniger op het handvat klikt, wordt de tongreiniger automatisch herkend en worden de juiste poetsstand en het juiste intensiteitsniveau geselecteerd voor een optimale reiniging van uw tong. U hoeft alleen op de aan-uitknop te drukken.

## Eenvoudig vast te klikken



TongueCare+-opzetborstel verandert uw Philips Sonicare-tandenborstel snel in een sonische tongreiniger. Elke tongreiniger klikt u eenvoudig op uw Philips Sonicare-apparaat, net zoals een normale opzetborstel. Deze innovatieve tongreinigers zijn gemakkelijk te gebruiken, te vervangen en te reinigen en zijn geschikt voor alle Philips Sonicare-apparaten. Zo kunt u eenvoudig het reinigen van uw tong toevoegen aan uw dagelijkse mondverzorgingsroutine. Het product is


geschikt voor alle Philips Sonicare-apparaten, behalve voor de PowerUp Battery en de Essence.

## BreathRx-tongspray



Slechte adem is geen partij voor onze BreathRx-tongspray. De spray doodt bacteriën die slechte adem veroorzaken en neutraliseert geurtjes direct. De speciale formule brengt een laagje op uw tong aan en reinigt samen met de TongueCare+-tongreiniger uw tong. De muntsmaak zorgt voor een frisse en schone mond.

## Maakt uw tong écht schoon

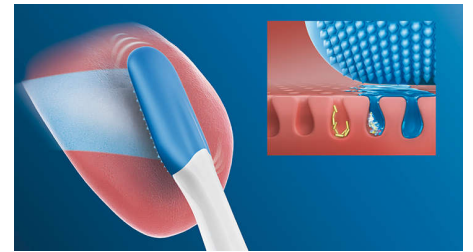

Om uw tong echt goed schoon te maken, moet u alle plekken goed kunnen bereiken. Dankzij de ergonomische vorm van de TongueCare+-tongreiniger kunt u overal comfortabel bij. Met het kleine en flexibele opzetstuk kunt u eenvoudig op alle plekken de bacteriën verwijderen die een slechte adem veroorzaken.

# Specificaties

## Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

## Materiaal

Elastomeer: Latexvrij

## Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Geschikt voor de volgende modellen: 2-serie

Plaque Defense, 2-serie Plaque Defense, 3-

Serie Gum Health, DiamondClean,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite+, PowerUp

BrushSync-koppeling van poetsstanden

## Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 1 TongueCare+-tongreiniger

Antibacteriële tongspray: 60 ml

## Ingrediënten

**Ingrediënten tongspray:** Water, propyleen glycerol, PEG-40 gehydrogeneerde castorolie, Aroma, zinkgluconaat, PEG-12 dimethicon, Cetylpyridinium chloride, Eucalyptus, citriodora-olie, Thymol, natriumsaccharine, Limoneen, CI42090

## Houdbaarheid

**Na openen:** 6 maanden

**Houdbaarheid tongspray:** 36 maanden

