

# PHILIPS

Cepillo dental  
eléctrico con SenseIQ

Sonicare 9900  
Prestige

Nuestro cepillo dental más  
avanzado

SenseIQ percibe, se adapta y te  
cuida

Cabezal de cepillado todo en  
uno

Aplic. Sonicare con tecn. basada  
en IA



HX9992/12



## Cuidado excepcional personalizado con SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige con tecnología SenseIQ es nuestro cepillo dental eléctrico más avanzado. Nuestra probada tecnología sónica es ahora más inteligente aún, ya que cuenta con capacidades de detección y adaptación para ofrecer siempre el cuidado integral más adecuado.

### Diseñado para ti

- Diseño elegante y compacto

### Always get it right with SenseIQ

- Se adapta a ti en tiempo real cuando te cepillas con demasiada fuerza
- Información de cepillado en tiempo real
- La tecnología SenseIQ detecta, adapta y cuida
- Detecta tu estilo de cepillado
- Cuida de forma intuitiva tus dientes y encías

### Personalized clean without compromise

- Un cabezal de cepillado todo en uno para un cuidado completo
- Recomendaciones personalizadas a través de la aplicación Philips Sonicare
- Cepillado sónico: la mejor forma de lograr una limpieza eficaz

### Premium accessories

- Carga sencilla gracias al soporte y la base minimalistas
- Estuche de viaje Prestige con USB para un transporte cómodo

# Destacados

## Tecnología SenseIQ



Durante el cepillado, la tecnología SenseIQ detecta la presión, el movimiento, la cobertura y otros aspectos, hasta 100 veces por segundo. Además, es capaz de adaptar la intensidad si cepillas con demasiada fuerza. Gracias a la inteligencia de la tecnología SenseIQ se adapta el modo de cepillado para lograr una mejor limpieza y cuidado sin esfuerzo.

## Cabezal de cepillado Todo en Uno Premium



Limpia sin concesiones con el cabezal de cepillado Todo en Uno A3 Premium. Nuestro mejor cabezal cuenta con cerdas en ángulo para ayudar a eliminar hasta 20 veces más placa incluso en zonas de difícil acceso\*. Las puntas triangulares eliminan hasta un 100 % más de manchas en menos de dos días\*\*\*. Y las cerdas más largas permiten conseguir unas encías hasta 15 veces más sanas en tan solo dos semanas\*\*. Todo ello sin necesidad de cambiar los cabezales de cepillado. ¿Sabías que los cabezales del cepillado pierden eficacia después de 3 meses de uso? Nuestra función BrushSync™ te avisará cuando llegue el momento de sustituir el cabezal.

## Recomendaciones personalizadas



La aplicación Philips Sonicare cuenta con tecnología basada en inteligencia artificial y trabaja en perfecta armonía con el cepillo dental. Úsala para realizar un seguimiento del cepillado en tiempo real con datos sobre la presión, el movimiento, la cobertura, la duración y la frecuencia. Consulta informes de progreso en función del día, la semana, el mes o el año. Obtén recomendaciones personalizadas y pasos prácticos para un mejor cepillado. Además, la sincronización automática te permite guardar los datos actualizados en la aplicación, incluso cuando no te cepillas usando la aplicación.

## Detecta tu estilo de cepillado



Durante el cepillado, el cepillo Philips Sonicare 9900 Prestige utiliza una serie de sensores para detectar la presión aplicada, el movimiento y la cobertura hasta 100 veces por segundo. Los sensores también analizan el tiempo y la frecuencia con la que te cepillas.

## Se adapta a ti en tiempo real



La mayoría de nosotros aplicamos demasiada presión durante el cepillado. Por eso nuestro cepillo dental ajusta automáticamente la intensidad cuando te cepillas con demasiada

fuerza. Además, con la aplicación gratuita Philips Sonicare, dispondrás de una guía personalizada y recomendaciones para llevar tu cepillado al siguiente nivel.

## Cuida tu salud bucal




El cepillo Philips Sonicare 9900 Prestige se ha diseñado pensando en tus necesidades. Su tecnología de vanguardia se adapta a ti y proporciona un manejo increíblemente sencillo. Además, los resultados hablan por sí mismos.

## Cepillado sónico probado



Elimina la placa con nuestra innovadora tecnología sónica y disfruta de una limpieza eficaz y suave. Durante el cepillado, los 62 000 movimientos de cerdas y la acción de fluido dinámico ayudan a limpiar incluso las zonas más difíciles, lo que permite lograr una sensación extraordinaria de limpieza y frescor.

## Respuesta en tiempo real

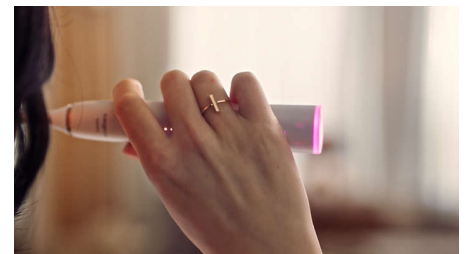

Aunque tu creas que no te cepillas con demasiada fuerza, el cepillo sí es capaz de detectarlo. Gracias al anillo luminoso en el extremo del mango, sabrás si debes aplicar menos fuerza o cepillarte más despacio.

# Especificaciones

## Conectividad

**Tecnología inalámbrica Bluetooth®:** App de cepillado conectada

## Potencia

**Alimentación:** 110-220 V

## Especificaciones técnicas

**Tiempo de funcionamiento (duración de la batería):** Más de 2 semanas\*\*\*\*

**Pila:** Recargable

**Tipo de batería:** Iones de litio

## Diseño y acabado

**Color:** Azul de medianoche

## Servicios

**Garantía:** Garantía limitada de dos años

## Compatibilidad

**Compatibilidad con Android:** Sistema operativo Android 8.0 o superior

**Compatibilidad con iOS:** iPhone con iOS 13.0 o superior

## Fácil de usar

**Mango:** Diseño elegante y compacto, Botón táctil integrado

**Compatibilidad con mangos:** Cabezales de cepillado fáciles de montar

**Indicador de batería:** Indicador de icono

iluminado

**Estuche de viaje:** Estuche de carga compacto y elegante, Piel sintética apta para veganos

**Recordatorio de sustitución BrushSync:** El icono de recordatorio se ilumina, para garantizar siempre los mejores resultados

## Piezas incluidas

**Cabezales:** 1 cabezal Todo en uno A3 Premium

**Mango:** 1 Sonicare 9900 Prestige

**Estuche de carga USB Prestige:** 1

**Base de carga:** 1

**Cable USB:** 1

## Rendimiento de limpieza

**Rendimiento:** Elimina hasta 20 veces más placa\*

**Beneficios para la salud:** Encías hasta 15 veces más sanas\*\*

**Velocidad:** Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

**Temporizador:** BrushPacer y SmarTimer

**Beneficios del blanqueamiento:** Hasta un 100 % menos de manchas\*\*\*

**Información sobre la presión aplicada:** El anillo se ilumina en morado, El mango vibra para avisar al usuario

**Información de cepillado:** El anillo se ilumina en ámbar, El mango vibra para avisar al usuario, Opción de encendido/apagado desde la aplicación

## Tecnología SenseIQ

**Sensor de presión:** Avisa al cepillar con demasiada fuerza

**Sensor de posición:** Realiza un seguimiento de tu cepillado, durante cada sesión

**Sensor de fricción:** Te guía para reducir la fricción

**Mapa de la boca en 3D:** Resalta las áreas sin cepillar

**Intensidad adaptativa:** Ajusta el nivel de intensidad, cuando se aplica demasiada presión

**Inteligencia artificial:** Detecta y sincroniza el cepillado

## Aplicación Sonicare con IA

**Recomendaciones en tiempo real:**

Recomendaciones personalizadas, Informe de progreso de día/mes/año

**Modos personalizados:** Limpieza, Blanqueamiento, Cuidado de las encías, Limpieza en profundidad, Sensibilidad

## Asistencia de software

**Actualizaciones de software:** Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra.



\* En comparación con un cepillo dental manual.

\*\* En comparación un cepillo dental manual durante 6 semanas

\*\*\* Pruebas realizadas en laboratorio en comparación con un cepillo dental manual

\*\*\*\* Basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar