


Philips Sonicare
DiamondClean Smart
ソニックケア ダイヤモンド
クリーン スマート
最適なオーラルケアを実現
タイムでガイド
ブラシヘッド交換時期お知らせ機能
ブラシヘッド認識機能
5つのモード、3段階の強さ設定

ソニックケア史上最高*1のブラッシング体験をあなた
に！

より優れたブラッシング体験を実現

ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアを実現する高性能電動歯ブラシです。4種類の高性能ブラシヘッドがお口の健康をサポートします。

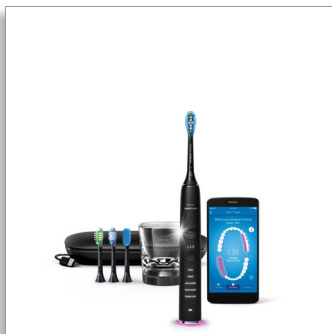

HX9924/15

お口の健康を推進

- 歯垢をしっかり除去
- 歯ぐきをケア
- 自然な白い歯へ
- 自然な白い歯へ

Personalized in-app coaching to perfect brushing

- 磨き残しを見つけてしっかり磨き上げる
- 過圧防止センサー機能
- 問題がある箇所をしっかりと手入れ
- 問題がある箇所に注目、目標を設定
- ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

ブラッシングを最適化

- ブラシヘッド認識機能

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ダイヤモンドクリーン スマート

最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド ブラシヘッド交換時期お知らせ機能, ブラシヘッド認識機能, 5つのモード、3段階の強さ設定

特長

歯垢をしっかり除去




高い歯垢除去力を体験するには、プレミアムクリーンブラシヘッドを取り付けましょう。ゴム製の柔軟な側部が歯と歯ぐきにフィットし、歯に触れる表面積が最大4倍に。*5 届きにくい部分の歯垢も最大10倍除去することができます。*2

歯ぐきをケア



歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。

自然な白い歯へ

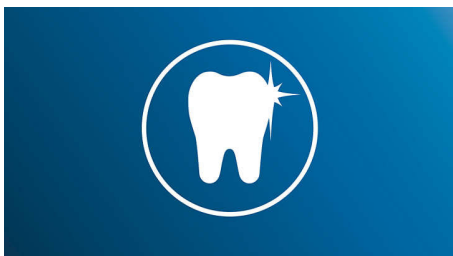


歯の表面のステインを除去し、白い歯で輝く笑顔を手に入れるには、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けましょう。密集した中央のステイン除去ブラシが、ステインを落として自然な白い歯に導きます。

舌磨きブラシヘッド




200個以上のミクロの凹凸が舌の汚れをやさしく除去し、口臭をケアします。/画像はイメージです

磨き方をサポート

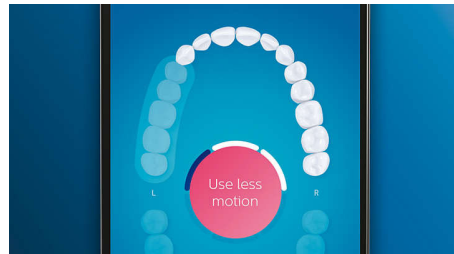

位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。


問題がある箇所注目、目標を設定

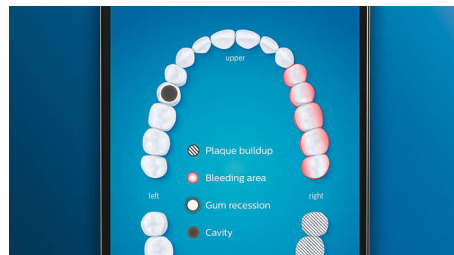

アプリの3D口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

HX9924/15

過圧防止センサー機能

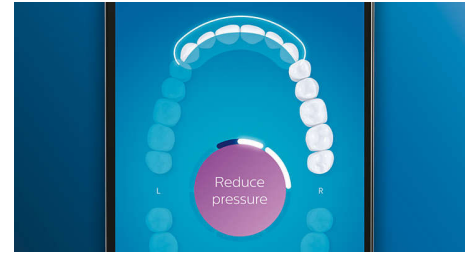


歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ



ブラッシングはハンドルに任せてしましましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

ブラシヘッド認識機能

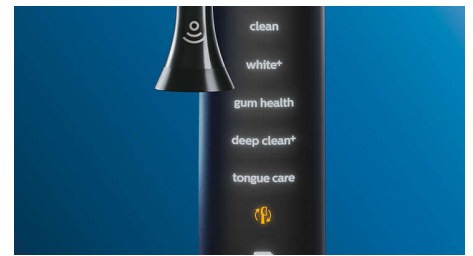

ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定(モード・強さは好みで変更可能)

ソニックケア ダイヤモンドクリーン スマート

最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド ブラシヘッド交換時期お知らせ機能, ブラシヘッド認識機能, 5つのモード、3段階の強さ設定

仕様

デザインと仕上げ

- 色: ブラック

アプリ対応

- Bluetooth®: Philips Sonicare アプリに接続

電源

- 対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

- 充電機: 充電式
- 使用時間: 14日間****
- 充電機の種類: リチウムイオン充電機

サービス

- 本体保証: 2年間保証

互換性

- Android: Android4.4.2以上 (Bluetooth4.0以降搭載機種)*iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。(Bluetooth 4.0以降搭載機種)
- iOS: iOS 9.3以上, (iPhone 6以降), iOS 9.3以上 (iPhone6以降)

使いやすさ

- 充電機表示ランプ: ランプで充電機残量を表示
- ディスプレイ: 照明付きディスプレイ
- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル: スリムなデザイン
- ブラシヘッド自動認識: ○*RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合
- シェービングヘッド交換時期お知らせ機能: ○*RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンの点灯

内容

- ハンドル: ダイヤモンドクリーン スマート 1本
- トラベルケース: USB充電トラベルケース
- ブラシヘッド: C3プレミアムクリーン 1本, G3プレミアムガムケア 1本, W3プレミアムホワイト 1本, 舌磨きブラシヘッド 1本
- 充電器用グラス: 1

洗浄性能

- ブラシ振動数: 約62000ブラシストローク/分
- 健康上の利点: 最大約7倍健康的な歯ぐき****
- 性能: 最大10倍*1の歯垢を除去 *1手磨きと比較した場合
- タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー
- ステイン除去効果: ステインを最大2倍多く除去*****
- 過圧に関するフィードバック: 紫色のライトリングが点灯, ハンドルが振動してお知らせ
- 仕上げ磨き: 磨き残しをゼロに

モード

- 3段階の強さ設定: 強, 中, 弱
- クリーン: 歯をキレイに
- ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
- ガムヘルス: 歯垢を落とし, 歯ぐきにやさしい刺激を
- 舌磨き: きれいな息が長続き
- ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ブラシヘッド認識機能

- プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択
- G3プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルスモードを自動選択
- プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラスモードを自動選択
- 舌磨きブラシヘッド: クリーンモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

- 過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ
- 位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善
- 摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導
- 3D口腔マップ: 問題の箇所をハイライト
- 仕上げ磨き: 磨き残しに対処
- 位置センサー: 磨き残し部分にガイド

株式会社フィリップス・ジャパン

© 2022 Philips Japan, Ltd.

All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

*1 モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較

*2 プレミアムクリーンブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014

*3 電動歯ブラシは手磨きと同様、歯ぐきの健康を推進します

*4 米国での調査。代表的な市販のホワイトニング用歯磨き粉を使用。ホワイトプラスモード使用時

*5 ダイヤモンドクリーンブラシヘッドと比べた場合

*6 Bluetooth®のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V. またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。*7 クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日2回



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-01-30

バージョン: 2.0.2

EAN: 08 71010 38021 50