

PHILIPS

sonicare

Szónikus
elektromos fogkefe

ProtectiveClean
4700

Beépített nyomásérzékelő

2 tisztítási mód

1 BrushSync funkció



HX6483/52



Tisztább fogak, kíméletesen.

Akár 10-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben akár 10-szer több lepedéket távolíthat el, mint egy kézi fogkefével

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

- Fokozott felületi érintkezés a lepedékképződés megakadályozása érdekében

Innovatív technológia

- Gyengéden óvatosságra int
- A páciensek a legtöbbet hozzathadják ki a kefefejekből
- Összeköti az intelligens fogkefemarkolatot és az intelligens kefefejeket
- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

Optimalizálja a fogmosást


- Clean (Tisztítás) és Gum Care (Fogínyápolás) mód

Páciensei igényeihez tervezve

- Nagyszerű módszer arra, hogy megszokja új fogkefét
- Alapos fogmosásra ösztönöz

Fénypontok

Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el*

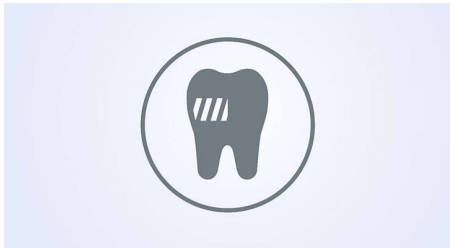


A C3 Premium Plaque Control kefefej minden eddiginél alaposabb tisztítást biztosít. A puha, rugalmas oldalú kefefej sörtéi pontosan követik az egyes fogak felületét, 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosítva** és akár 10-szer több lepedéket távolítva el még a nehezen elérhető helyekről is*.

Túl nagy nyomás?



Lehet, hogy a páciensek nem veszik észre, ha túl erősen mosnak fogat, de a fogkefájük igen. Ha túl nagy nyomást fejtenek ki az ínyre, a fogkefe pulzáló hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentsék a nyomást.

Clean (Tisztítás) és Gum Care (Fogínyápolás) mód

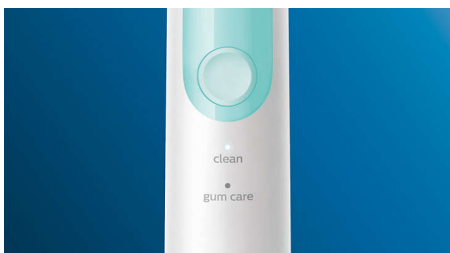

Akár a lepedék eltávolítása a cél, akár az íny egészségének a megőrzése, megvan a módja: a Clean (Tisztítás) mód kimagasló tisztítást tesz


lehetővé, míg a Gum Care (Fogínyápolás) mód egy további percig csökkentett üzemmódban működik, ami alatt gyengéden masszírozhatja az ínyét.

BrushSync technológia




A mikrochip technológia észleli és szinkronizálja az intelligens kefefejet az intelligens markolattal. Az intelligens markolat és az intelligens kefefej tökéletes párost alkot, lehetővé teszi az intelligens csere-émlékeztetőt.

Intelligens csere-émlékeztetők

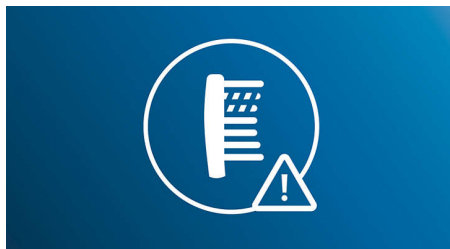

Minden fogkefe elhasználódik egy idő után. Azonban az intelligens kefefej-felismerés technológiánk nyomon követi, hogy egy páciens mennyi ideje használja a fogkefefejet, és hogy milyen erős nyomást fejt ki. Ha itt az idő a cserére, a markolaton egy jelzőfény figyelmeztet erre. Így biztos lehet abban, hogy fogkefeje mindig jó munkát végez.

Egyszerű bevezető program

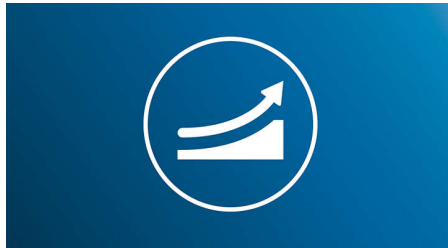

Amikor valami újba fogunk, eltarthat egy kis ideig, amíg hozzászokunk. Bevezető programunk segítségével új fogkeféje első 14 használata során lehetősége van fokozatosan és gyengéd lépésekben növelni a fogkefe tisztítóerejét.

Hasznos időzítők



A QuadPacer jelez, amikor a páciens optimális időt töltött a szája egy adott részének tisztításával, a Smartimer pedig jelzi, hogy mikor telt le a fogmosáshoz ajánlott két perc.

Philips Sonicare technológia



A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér menta

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen

rápattintható kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

Fogmosási idő: Akár 2 hét

Tartozékok

Utazótok: Kemény utazótok

Töltő: 1

Kefefejek: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W2c Optimal White kompakt

Markolat: 1 ProtectiveClean

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Egészségügyi előnyök: Segíti a fogszuvasodás csökkentését

Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el*

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer időzítő

Nyomásvisszajelzés: A markolat rezgésével figyelmezteti a használót

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Gum Care (Fogínyápolás): Gyengéden átmasszírozza az ínyt

Intelligens érzékelőtechnológia

BrushSync csere- emlékeztető: Mindig tudni fogja, mikor, cserélje ki a kefefejeket

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet

