

# PHILIPS

## sonicare

Sonický elektrický  
zubní kartáček – Trial

FlexCare Platinum

3 režimy, 3 intenzity

2 kartáčkové hlavice

S tlakovým senzorem

UV sanitizér hlavic kartáčku



HX9142/32



## Technika čištění se může lišit, ale výsledky budou stejné

### Náš první kartáček s technologií Adaptive Cleaning

Základem naší technologie Adaptive Cleaning Technology jsou dvě části: inovativní čisticí hlavice AdaptiveClean a intuitivní tlakový senzor. Obě funkce vašim pacientům pomohou čistit si zuby lépe, nikoli intenzivněji.

#### **Proven to improve oral health**

- Funkce Quadpacer
- Funkce Smartimer
- UV sanitizér

#### **Designed around you**

- Kartáčková hlavice InterCare

#### **Guides you to follow dental recommendations**

- Intuitivní tlakový senzor

#### **Provides a superior clean**


- Kartáčková hlavice AdaptiveClean
- Čištění, které lze přizpůsobit vašim potřebám
- Inovativní sonická technologie zubních kartáčků Philips Sonicare

#### **Offers a customized brushing experience**

- Nový režim Deep Clean: Poradte si bez námahy s problematickými místy

## Přednosti

### Kartáčková hlavice AdaptiveClean

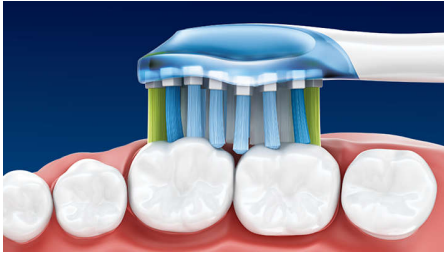


Pružné, flexibilní okraje hlavice vyrobené z gumy umožňují, aby se vlákna přizpůsobila jedinečnému tvaru zubů a dásní pacienta, takže zajistí až 4x větší kontakt\*. Flexibilita kartáčkové hlavice napomáhá tomu, aby mohla vlákna jemně kopírovat linii dásní a tlumit nadměrný tlak při čištění. Vylepšený sonický stíravý pohyb se postará o skvělý pocit v ústech a dokonalé čištění podél linie dásní i na těžko přístupných místech\*. Prokazatelně odstraní až 10x více plaku na těžko dostupných místech než manuální zubní kartáček\*.

### Kartáčková hlavice InterCare



Mimořádně dlouhá a hustě osázená vlákna s velkou hustotou se dostanou hlouběji mezi zuby a pomáhají prokazatelně odstranit více plaku\*. Ideální pro pacienty s krvácením dásní nebo zvýšeným rizikem jejich zánětu.

### Intuitivní tlakový senzor

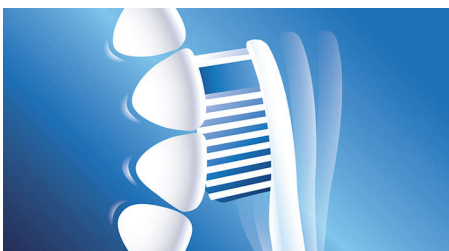

Pokud je aplikován nadměrný tlak, tělo kartáčku jemně pulzuje a upozorní tak pacienta, že na kartáček příliš tlačí, což


odporuje správné technice čištění. Ve studii uskutečněné na amerických pacientech při použití tlakového senzoru 7 z 10 osob, které na kartáček příliš tlačily, tlak při čištění zmírnilo.

### Režim Deep Clean



Náš zcela nový režim Deep Clean zajišťuje unikátní hloubkové čištění na obtížně přístupných místech. Jedinečný pohyb hlavice kartáčku v tomto režimu a doba čištění prodloužená na tři minuty představují ideální volbu v případě, že chcete problematickým místům věnovat zvýšenou pozornost.

### Čištění podle vašich potřeb

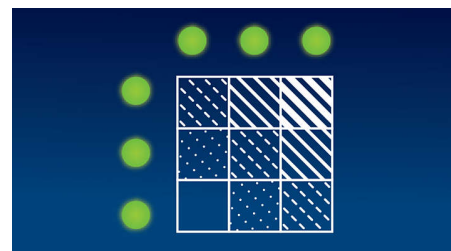

Tři nastavení intenzity a tři režimy čištění poskytují optimální pohodlí a výkon pro čištění, které je šité na míru a přispívá k dobrému pocitu pacienta. Třiminutový režim Deep Clean se postará o unikátní hloubkové čištění na těžko přístupných místech. Je to skvělý režim pro pacienty, kteří potřebují věnovat zvýšenou pozornost problematickým místům.

### UV sanitizér




Zabijí až 99 % bakterií a virů\*. Může být k dispozici i jako příslušenství.

### Funkce Smartimer



Dvouminutový časovač pomáhá dodržet odborníky doporučenou dobu čištění.

### Funkce Quadpacer

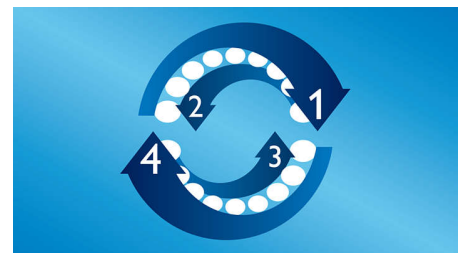

Časovač odměřuje třicetivteřinové intervaly pro důkladné vyčištění jednotlivých kvadrantů.

### Sonická technologie



Vhání tekutinu mezi zuby a podél linie dásní a čistí díky tomu účinně a zároveň velmi šetrně.

# Specifikace

## Design a provedení

Barva: Platinově šedá

## Spotřeba

Napětí: 110–220 V

## Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 3 týdny\*\*

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

## Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

## Snadné použití

**Indikátor baterie:** Kontrolka zobrazuje stav baterie

**Rukojeť:** Tenký ergonomický design

**Systém kartáčkových hlavic:** Zacvakávací hlavice kartáčku

**Displej:** Osvětlený displej

**Výdrž baterie:** Až 3 týdny\*\*\*

## Balení obsahuje

cestovní pouzdro: 1

Těla kartáčku: 1 FlexCare Platinum

Kartáčkové hlavice: 1 ks AdaptiveClean, 1 ks InterCare, standardní velikost

Nabíječka: 1

UV sanitizér: 1

## Výkon čištění

**Výkon:** Odstraňuje až 10x více plaku\*

**Frekvence:** Až 62 000 pohybů za minutu

**Přínos pro zdraví:** Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

**Tlakový senzor:** Vibrace těla kartáčku jako upozornění

**Časovač:** Quadpacer a SmartTimer

**Bělící účinky:** Pomáhá přirozeně odstranit skvrny

## Režimy

**3 intenzity:** Vysoká, Nízká, Střední

**Clean:** Pro výjimečné každodenní čištění

**Deep Clean:** Unikátní hloubkové čištění

**Bílá:** Odstraňuje povrchové pigmentace



\* Než kartáčková hlavice DiamondClean

\* Než manuální kartáček

\* Data v souboru

\* Po jednom použití každého zubního kartáčku vs. kartáček Oral-B 3000/6000 CrossAction

\*\* \*\* založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně