

# PHILIPS

## sonicare

Электрическая звуковая  
зубная щетка

HealthyWhite

3 режима

1 чистящая насадка

HX6781/02



## Для белых и здоровых зубов

Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют белизной. HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели регулярного использования режимов чистки и отбеливания.

### Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания
- Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

### Помогает следовать рекомендациям стоматолога

- Quadraseg способствует тщательному очищению каждого участка полости рта
- Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

### Обеспечивает тщательное очищение

- Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки
- Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

### Позволяет создать свой режим чистки зубов

- Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare
- Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали
- Режим чистки: стандартный двухминутный режим
- Режим Sensitive (Деликатная чистка): бережная чистка зубов и десен

## Особенности

### Звуковая технология



Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

### Расположенная под углом чистящая насадка



Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

### Возвращает зубам естественную белизну



Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.

### Безопасно и бережно




Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая насадка изнашивается быстрее замещений дефектов зубов пломб, коронок, коронок с покровными фасетками) и зубодесневых карманов.

### SmartTimer




Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

### Quadpacer

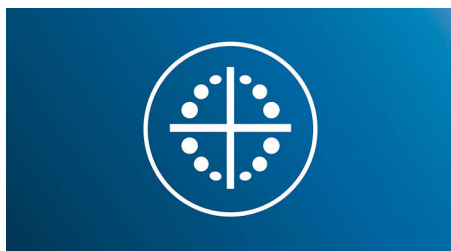


Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно

### Функция Easy-start

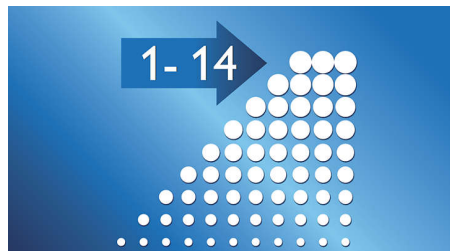

Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

### Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание)

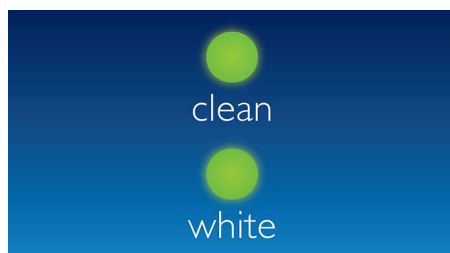


2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Отбеливание) для обработки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.\*

### Режим чистки

Для ежедневной тщательной чистки. Поддержание результата после процедуры осветления.

### Бережная чистка зубов и десен

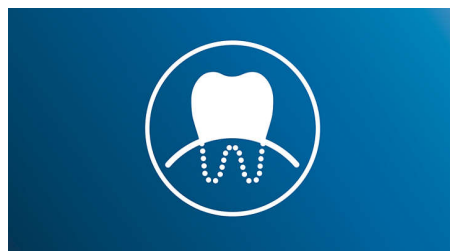

Зубная щетка Philips Sonicare с режимом деликатной чистки для тщательного, но деликатного очищения чувствительных зубов и десен



# Характеристики

## Дизайн и отделка

Цвет: Матовый белый

## Мощность

Напряжение: 110—220 В

## Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель\*\*

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

## Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

## Удобство использования

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Ручка: Изящный эргономичный дизайн, Прорезиненная ручка для удобства пользования

Время работы: До 3 недель\*\*

## В комплекте

Дорожный футляр: 1

Щетки: 1 HealthyWhite

Насадки: 1 стандартная насадка ProResults

Зарядное устройство: 1

## Качество чистки

Высокое качество: Удаляет до 90 % пятен\*

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен

Таймер: Функции Quadraseg и SmartTimer

Эффект осветления: Осветляет зубы до 2 тонов

## Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Sensitive (Деликатная чистка): Бережная чистка зубов и десен

Clean & White (Чистка и отбеливание): 2 минуты в режиме чистки + 30 секунд в режиме отбеливания

