

# PHILIPS

## sonicare



Elektromos fogkefe  
SenseIQ technológiával

DiamondClean Prestige  
9900

A legfejlettebb fogkefének

A SenseIQ érzékel, alkalmazkodik,  
ápol

All-in-One kefefej

MI-alapú Sonicare alkalmazás



HX9992/12

## Kivételes gondoskodás személyre szabva SenseIQ technológiával

A SenseIQ technológiával ellátott Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 a legfejlettebb elektromos fogkefének. Az intelligencia, az érzékelés és alkalmazkodás révén még magasabb szintre emeli a bevált szónikus technológiánkat, és mindig teszi a dolgát az átfogó gondoskodásért.

### Az Ön igényeihez tervezve

- Vonzó, kompakt kialakítás

### A SenseIQ segítségével mindig teszi a dolgát

- Valós időben igazodik Önhöz, ha túl erősen mos fogat
- Intuitívan ápolja a fogakat és a fogínyt
- A fogmosás valós idejű visszajelzése
- A SenseIQ érzékel, alkalmazkodik és ápol
- Érzékeli a fogmosás módját

### Személyre szabott tisztítás kompromisszumok nélkül


- All-in-One kefefej a tökéletes ápoláshoz
- Személyre szabott útmutatás a Philips Sonicare alkalmazásban
- Szónikus tisztítás: a hatékony fogmosás magasiskolája

### Prémium tartozékok

- Egyszerű töltés minimalista állvánnyal és alappal
- Prestige hordtáska USB-vel, melyet bárhová magával vihet

## Fénypontok

### SenseIQ technológia

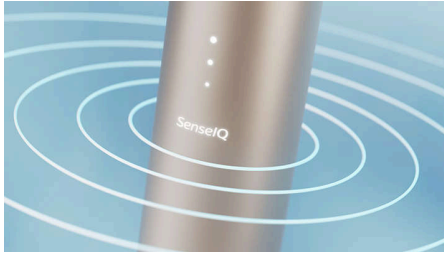

Fogmosás közben a SenseIQ technológia érzékeli a nyomást, a mozgást, a lefedettséget és sok más is, másodpercenként akár 100 alkalommal. Ha a nyomás túl erős, módosítja az intenzitást. A SenseIQ intelligenciája nem bízza a véletlenre a tisztítási üzemmódot, így Ön hosszú ideig élvezheti az erőfeszítés nélküli szájjápolás és a hatékonyabb tisztítás élményét.

### Premium All-in-One kefefej



Tisztítson kompromisszumok nélkül az A3 Premium All-in-One kefefejjel. Eddigi legjobb fogkefénk a döntött sörtéinek köszönhetően akár 20-szor több lepedéket távolít el még a nehezen elérhető helyekről is\*. A háromszög alakú sörtévek akár 100%-kal több elszíneződést távolítanak el alig két nap alatt\*\*\*. A hosszabb sörték pedig alaposan megtisztítják a fogínyt, amely akár 15-ször egészségesebbé válik mindössze két hét után\*\*. Mindezt anélkül, hogy egyszer is cserélné a kefefejeket. Tudta, hogy a kefefejek 3 havi használat után már kevésbé hatékonyak? A BrushSync™ funkció azonban emlékezteti Önt nem sokkal a csere előtt.

### Ápolja a száj egészségét



A Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 az Ön igényeihez lett tervezve. A csúcsmínőségű technológiája annyira igazodik Önhöz, és a használata annyira könnyű, hogy szinte észre sem lehet venni. Szerencsére az eredmények azonban mindent elárulnak.

### Személyre szabott útmutatás



A mesterséges intelligencia által működtetett Philips Sonicare alkalmazás tökéletes összhangban van a fogkefével. Használatával a fogmosáshoz valós idejű segítséget és tanácsokat kaphat a nyomással, a mozdulatokkal, a lefedettséggel, az időtartammal és a gyakorisággal kapcsolatban. Megtekintheti a napi, heti, havi és éves előrehaladási jelentéseket. Személyre szabott javaslatokat és alkalmazható lépéseket a jobb tisztítás érdekében. Eközben az automatikus szinkronizálás a fogmosással kapcsolatos adatokat naprakészen tárolja az alkalmazásban, még akkor is, ha fogmosáskor nincs Önnél az alkalmazás.

### Érzékeli a fogmosás módját




A Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 szenzorai érzékelik az Ön által alkalmazott nyomást, a tisztítómozdulatokat és a lefedettséget a fogmosás során, másodpercenként akár 100 alkalommal. A szenzorok észlelik a tisztítás időtartamát és gyakoriságát is.

### Valós időben igazodik Önhöz



Az emberek többsége túl erős nyomást alkalmaz fogtisztítás közben. A fogkefénk ezért automatikusan állítja be az intenzitást, ha Ön túl erősen dörzsöl vele. Az ingyenes Philips Sonicare alkalmazáson keresztül pedig személyre szabott útmutatást és javaslatokat kaphat, melyekkel a fogmosást a következő szintre emelheti.

### Igazolt szónikus tisztítás

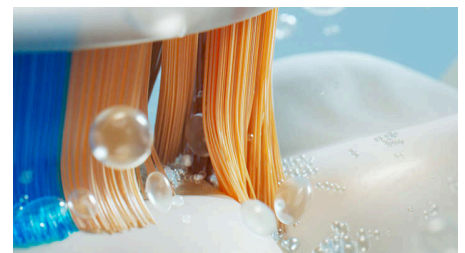

Távolítsa el a lepedéket a szónikus technológiával – amely etalon a hatékony és gyengéd fogtisztításban. Fogmosás közben a sörték által tett akár 62 000 tisztítómozdulat és a dinamikus folyadékos tisztítás segítenek megtisztítani még a nehezen elérhető területeket is, így biztosítva a szájban a rendkívüli frissesség és tisztaság érzését.


# DiamondClean Prestige 9900

Elektromos fogkefe SenseIQ technológiával

HX9992/12

## Fénypontok

### Valós idejű visszajelzés

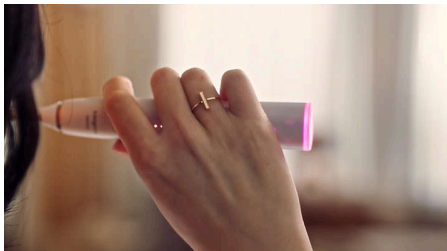

Lehetséges, hogy Ön észre sem veszi, ha túl erősen mossa a fogát vagy dörzsölni kezd, a fogkefe azonban észleli. A markolat végén található fénygyűrű finoman figyelmezteti Önt, hogy enyhítsen a nyomáson vagy a dörzsölő mozdulatokon.

### Prestige hordtáska USB-vel



A gondtalan kényelmet nyújtó elegáns és kompakt hordtáskát bármilyen táskában magával viheti, ha nem otthon tartózkodik. A strapabíró hordtáskát kellemes tapintású vegánbarát bőr borítja. Ezen kívül extra kényelmet biztosít a beépített USB-C port és az USB töltőkábel, melyek segítségével könnyedén fel tudja tölteni fogkefét anélkül, hogy kivenné azt a hordtáskából.

### Egyszerű töltés

Amikor fel kívánja tölteni a fogkefét, csak helyezze azt a töltőalapba. Remek alkalom arra, hogy megcsodálhassa a fogkefe erőteljes, modern kinézetét.

### Karcsú és kompakt



A Sonicare 9900 Prestige fogkefe használatával a technológia legnagyobb eredményeit stílusos és kompakt kivitelben veheti kézbe. Ez a fogkefe 18 mm-rel rövidebb a DiamondClean fogkefénél, és kiváló minőségű anyagokból készült, hogy szemrevaló és kellemes tapintású legyen.

# DiamondClean Prestige 9900

Elektromos fogkefe SenseIQ technológiával

HX9992/12

## Műszaki adatok

### Termékfrissítés

**Támogatási időszak:** A Philips 2026. december 31-ig biztosítja a szükséges biztonsági frissítéseket.

### Csatlakoztathatóság

**Bluetooth® vezeték nélküli technológia:**  
Fogmosási alkalmazás

### Tápellátás

**Tápellátás:** 110-220 V

### Műszaki adatok

**Működési idő (Telitől üresig):** 2+ hét\*\*\*\*

**Akkumulátor:** Újratölthető

**Elem típusa:** Lítium-ionos

### Formatervezés és kidolgozás

**Szín:** Éjkék

### Szerviz

**Jótállás:** 2 év korlátozott garancia

### Kompatibilitás

**Android-kompatibilis:** Android 8.0 vagy ennél újabb verzió

**iOS-kompatibilis:** iPhone iOS 13.0 vagy újabb verzióval

### Egyszerű használat

**Markolat kompatibilitás:** Könnyen rápatintható kefejek

**Markolat:** Vonzó, kompakt kialakítás, Tökéletes érintésvezérlés

**Töltöttségjelző:** Világító jelzőikon

**Utazótok:** Elegáns, kompakt töltőtök, Vegánbarát bőr

**BrushSync csere- emlékeztető:** Az emlékeztető ikon világítani kezd, így mindig a legjobb eredményt nyújthatja

### Tartozékok

**Markolat:** 1 DiamondClean Prestige 9900

**Kefefek:** 1 A3 Premium, univerzális

**Prestige USB-töltőtök:** 1

**Töltőtalap:** 1

**USB kábel:** 1

### Fogmosási teljesítmény

**Sebesség:** Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

**Egészségügyi előnyök:** Akár 15-ször egészségesebb fogíny\*\*

**Teljesítmény:** Akár 20-szor több lepedéket távolít el\*

**Időzítő:** BrushPacer és SmarTimer

**Fehérítő hatás:** Akár 100%-kal kevesebb elszíneződés\*\*\*

**Nyomásvisszajelzés:** Lilán világító gyűrű, A markolat rezgésével figyelmezteti a használót

**Dörzsölés-visszajelzés:** Sárgán világító gyűrű, A markolat rezgésével figyelmezteti a használót, Be- és kikapcsolási opció az alkalmazásban

### SenseIQ technológia

**Nyomásérzékelő:** Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet

**Dörzsölés-érzékelő:** Rávezet a dörzsölés csökkentésére

**Elhelyezkedésérzékelő:** Nyomon követi a fogtisztítás lefedettségét, minden fogmosás alkalmával

**3D-s térkép a szájról:** Megjelöli a kimaradt területeket

**Adaptív intenzitás:** Beállítja az intenzitás szintjét, amikor Ön túl nagy nyomást alkalmaz

**Mesterséges intelligencia:** Érzékeli és szinkronizálja a fogmosást

### Sonicare alkalmazás MI-vel

**Valós idejű útmutatás:** Személyre szabott javaslatok, Napi/havi/éves előrehaladási jelentés

**Személyre szabható üzemmódok:** Clean, White+, Gum health, Deep Clean, Sensitive

### Támogatott szoftverek

**Szoftverfrissítések:** A Philips a vásárlás dátumától számított 2 évig kínál szoftverfrissítéseket.

