

# PHILIPS

## sonicare



Elektrische  
Schallzahnbürste mit App

DiamondClean Smart

Personalisiertes Coaching per  
App

Automatische  
Bürstenkopferkennung

5 Putzprogramme & 3  
Intensitäten

4 Bürstenköpfe, Ladeglas & USB-  
Reisetui



HX9924/03

## Unsere bislang beste Zahnbürste, für eine vollständige Mundpflege

### Gutes Gewissen dank 100 % Reichweite

Die DiamondClean Smart ist unsere beste Zahnbürste für eine vollständige Mundpflege. Mit den vier Hochleistungsbürstenköpfen können Sie sich auf alle Bereiche der Mundpflege konzentrieren, während unsere Smart Sensor-Technologie personalisiertes Feedback und Tipps bereitstellt.

#### **Für eine gute Mundgesundheit**

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\* für eine gründliche Reinigung
- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\* in nur 2 Wochen
- Entfernen Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen\*\* in nur 3 Tagen
- Genießen Sie langanhaltend frischen Atem

#### **Personalisierte Tipps innerhalb der App für perfektes Putzen**

- Führt Sie beim Putzen und weist auf ausgelassene Bereiche hin
- Bringt Sie zurück zu ausgelassenen Stellen für eine 100 %ige Abdeckung
- Pflegen Sie Problembereiche besser
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Vermeiden Sie zu starkes Scheuern

#### **Optimieren Sie Ihre Zahnpflege**

- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus
- Holen Sie immer das Beste aus Ihrem Bürstenkopf
- Wählen Sie aus 5 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen

## Besonderheiten

### Verabschieden Sie sich von Plaque



Stecken Sie den C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz auf, und erleben Sie unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt\*\*\* und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen\* zu erzielen.

### Pflege für Ihr Zahnfleisch



Stecken Sie den G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf liefert klinisch erwiesen bis zu 100 % weniger Zahnfleischentzündungen\* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.\*


### Weißere Zähne in kürzester Zeit



Stecken Sie den W3 Premium White-Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erreichen. Mit seinen dicht platzierten zentralen


Borsten zur Entfernung von Flecken entfernt dieser Bürstenkopf klinisch erwiesen bis zu 100 % mehr Flecken in nur drei Tagen.\*\*

### TongueCare+-Zungenbürste

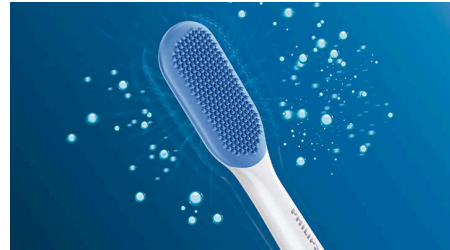


Stecken Sie die TongueCare+-Zungenbürste auf, um Mundgeruch verursachende Bakterien sanft aus den Poren Ihrer Zunge zu entfernen. Ihre 240 speziell entwickelten Mikroborsten gelangen in alle Rillen und Vertiefungen Ihrer Zunge, um Bakterien und Ablagerungen zu entfernen, die zu Mundgeruch führen. Kombinieren Sie die Bürste mit unserem antibakteriellen BreathRx-Zungenspray für eine hervorragende Reinigung und besonders frischen Atem.

### Erreichen Sie jede Stelle

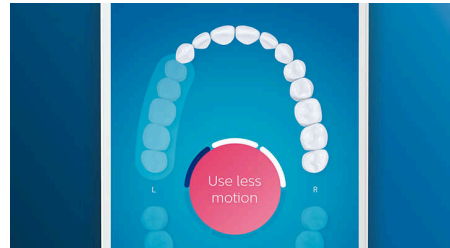


Die Philips Sonicare App zeigt Ihnen, wann die Reinigung gründlich war, und bringt Ihnen bei, wie Sie besser und genauer putzen.

### TouchUp-Funktion

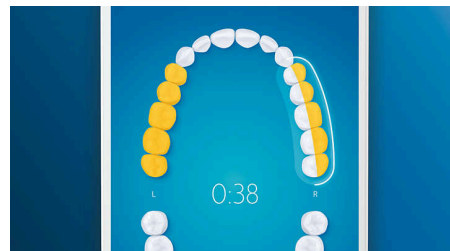


Die TouchUp-Funktion in Ihrer App zeigt Ihnen, ob Sie Stellen beim Bürsten ausgelassen haben. So können Sie diese erneut bürsten und darauf vertrauen, dass Sie jedes Mal eine vollständige Reinigung erzielen.

### Fokusbereiche und Zielsetzung

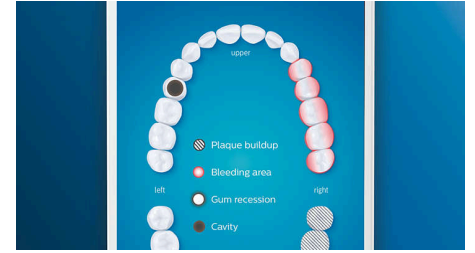


Ihr Zahnarzt hat Sie auf Problembereiche hingewiesen? Wir markieren diese in der App auf der 3D-Karte Ihres Mundes und erinnern Sie daran, besonders auf diese Bereiche zu achten.

### Zu viel Druck?

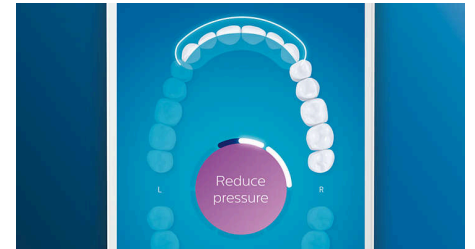

Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie zu hart putzen, aber Ihre DiamondClean Smart wird dies tun. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, blinkt der Leuchtring am Ende des Handstücks. So werden Sie sanft daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Bürstverhalten.


### Einfach einfach

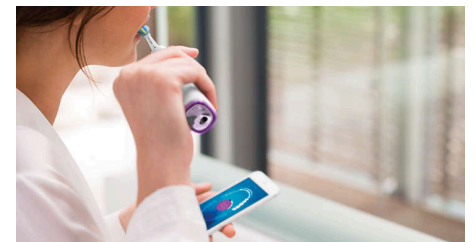

Bei einer elektrischen Zahnbürste überlassen Sie der Zahnbürste die Arbeit. Wir haben einen Drucksensor in das Handstück integriert, der Sie sanft daran erinnert, keine potenziell schädlichen Putzbewegungen auszuführen. So verbessern Sie Ihre Technik und erreichen eine sanftere, effektivere Reinigung.


## Besonderheiten

### Smart-Bürstenkopferkennung

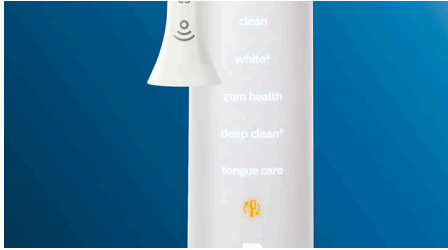

Sie fragen sich, welches Putzprogramm und welche Intensitätsstufe Sie verwenden sollten? Keine Sorge! Ein Mikrochip im Bürstenkopf meldet den verwendeten Bürstenkopf an die DiamondClean Smart. Wenn Sie also beispielsweise einen Bürstenkopf für die Zahnfleischpflege aufstecken, kann die Zahnbürste das optimale Putzprogramm sowie die Intensität wählen und eine sanfte und effektive Zahnfleischpflege ermöglichen. Sie müssen nur noch den Ein-/Aus-Schalter drücken.

### Intelligente Erinnerungsfunktionen

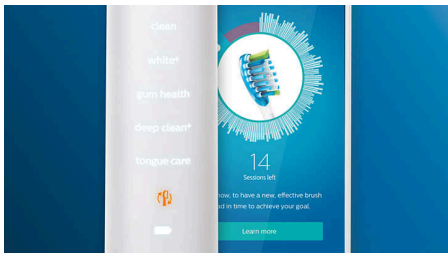

Bürstenköpfe nutzen sich im Laufe der Zeit ab und entfernen daher Plaque weniger effektiv. Unsere Smart-Bürstenkopferkennung erinnert

Sie rechtzeitig daran, Ihren Bürstenkopf zu ersetzen. Ihre Zahnbürste zeichnet auf, wie lange und mit wie viel Druck Sie mit jedem Bürstenkopf geputzt haben, und gibt Ihnen Bescheid, wenn der Bürstenkopf ausgetauscht werden sollte. Sie können die Lebensdauer Ihrer Bürstenköpfe auch in der Philips Sonicare App verfolgen und sogar Ersatz bestellen, damit Ihnen die Bürstenköpfe nie ausgehen.

### 5 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Die DiamondClean Smart verfügt über 5 verschiedene Putzprogramme, die eine Vielzahl an Zahnpflegeanforderungen abdecken: "Clean"-Programm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, "White+"-Programm zum Entfernen von Verfärbungen, "Deep Clean+"-Programm für eine belebende gründliche Reinigung, "Gum Health"-Programm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und das "Tongue Care"-Programm als perfektes Putzprogramm zur Reinigung Ihrer Zunge. Es beseitigt Ablagerungen auf der Zunge und entfernt Mundgeruch verursachende Bakterien. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die

für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliches Zahnfleisch und empfindliche Zähne.

### Entworfen für praktische Aufbewahrung



Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen regelmäßig verwenden. Wenn Ihnen jedoch auf Reisen die Energie ausgehen sollte, dient Ihr Deluxe-USB-Reiseetui auch als Ladegerät. Platzieren Sie Ihre Zahnbürste im Etui, und verbinden Sie sie mit Ihrem Laptop oder einer Steckdose. Stellen Sie Ihre Zahnbürste zuhause einfach in das elegante Ladeglas, das sich perfekt in Ihr Badezimmer einfügt und zudem zum Ausspülen verwendet werden kann.

# DiamondClean Smart

Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX9924/03

## Daten

### Anschlüsse

**Kabellose Bluetooth®-Technologie:** Verbundene Zahnpflege-App

### Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

### Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):**

14 Tage\*\*\*\*\*

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

### Design und Materialausführung

**Farbe:** Weiß

### Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

### Kompatibilität

**Android-Kompatibilität:** Android Smartphones, Bluetooth 4.0-fähige Tablets

**iOS-Kompatibilität:** iPad der 3. Generation oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7 oder höher

### Benutzerfreundlichkeit

**Akkuanzeige:** Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Anzeige:** Beleuchtetes Display

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Bürstenkopf-Erkennung:** Wählt das optimale Putzprogramm

**Erinnerungsfunktion:** Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

### Artikel enthalten

**Handstück:** 1 DiamondClean Smart

**Bürstenköpfe:** 1 C3 Premium zum Plaque-Schutz,

1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White,

1 TongueCare+ Zungenbürste

**Antibakterielles Zungenspray:** 60 ml

**Reiseetui:** USB-Reiseladeetui

**Ladeglas:** 1

### Reinigungsleistung

**Vorteile für die Gesundheit:** Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\*\*\*\*

**Leistung:** Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*

**Timer:** BrushPacer und 2-Minuten-Timer

**Weißer Zähne:** Bis zu 100 % weniger Flecken\*\*\*\*\*

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Druck-Feedback:** Ring leuchtet violett, Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

**TouchUp:** Stellt 100 %ige Abdeckung sicher

### Inhaltsstoffe

**Zungenspray – Inhaltsstoffe:** Wasser, Propylenglycerol, PEG-40, hydriertes Rizinusöl, Aroma, Zinkgluconat, PEG-12 Polydimethylsiloxan, Cetylpyridiniumchlorid, Eukalyptus, Citriodora-Öl, Thymol, Natriumsaccharin, Limonen, CI42090

### Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**3 Intensitätsstufen:** Hoch, Mittel, Niedrig

**Deep Clean+:** Für eine besonders gründliche Reinigung

**Gesundes Zahnfleisch:** Pflegt Backenzähne besonders gründlich

**TongueCare+:** Für langanhaltend frischen Atem

**White+:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

### Smart-Bürstenkopferkennung

**C3 Premium zum Plaque-Schutz:** Die perfekte Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm

**G3 Premium Gum Care Bürstenkopf:** Die perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-Putzprogramm

**W3 Premium White Bürstenkopf:** Die perfekte Ergänzung zum "White+"-Putzprogramm

**TongueCare+ Zungenbürste:** Die perfekte Ergänzung zum "TongueCare"-Putzprogramm

### Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warmmeldungen bei zu starkem Druck

**Positionssensor:** Verfolgt und verbessert die Abdeckung

**Scheuersensor:** Hinweise zur Vermeidung von Scheuern

**3D-Karte Ihres Mundes:** Hebt Problembereiche hervor

**TouchUp:** Weist auf ausgelassene Stellen hin

**Positionssensor:** Führt zu Stellen, die Sie ausgelassen haben

### Software-Support

**Softwareaktualisierungen:** Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

