

PHILIPS

sonicare

Električna zobna ščetka
s tehnologijo SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige

Naša najnaprednejša zobna
ščetka

SenseIQ zaznava, se prilagaja in
neguje

Glava ščetke vse v enem

Sonicare na osnovi umetne
inteligence



HX9992/12



Izjemna nega, osebno prilagojena s tehnologijo SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige s tehnologijo SenseIQ je naša najnaprednejša električna zobna ščetka. Naša dokazana sonična tehnologija je izboljšana z inteligenco, zaznavanjem in prilagajanjem za celotno nego, da boste vedno vse naredili prav.

Zasnova po vaši meri

- Elegantna in kompaktna zasnova

S tehnologijo SenseIQ boste vedno vse naredili prav

- Prilagaja se vam v realnem času, kadar premočno pritiskate
- Intuitivno neguje zobe in dlesni
- Povratne informacije o ščetkanju v realnem času
- Tehnologija SenseIQ zaznava, se prilagaja in neguje
- Zaznava vaš slog ščetkanja

Vam prilagojeno čiščenje brez kompromisov

- Glava ščetke vse v enem za popolno nego
- Osebno prilagojeno vodenje z aplikacijo Philips Sonicare
- Sonično ščetkanje: vadnica o učinkovitem čiščenju

Vrhunska dodatna oprema

- Enostavno polnjenje z minimalističnim stojalom in podstavkom
- Potovalna torbica Prestige z USB-jem za na pot


Značilnosti

Tehnologija SenseIQ



Med ščetkanjem tehnologija SenseIQ do 100-krat na sekundo zazna pritisk, gibanje, površino ščetkanja in še več. Nato prilagodi moč, če preveč pritiskate. Ob inteligenci SenseIQ ni več treba razmišljati o načinih ščetkanja, zato boste lahko z lahkoto skrbeli za svoje zobe in trajno boljšo higieno.

Glava ščetke Premium vse v enem

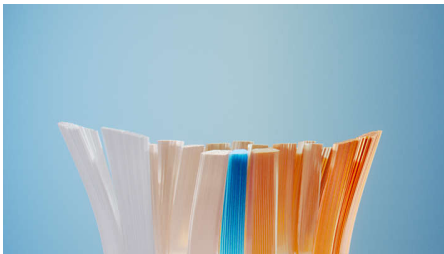

Ščetka A3 Premium vse v enem za popolno umivanje zob. Naša najboljša glava ščetke doslej ima poševne ščetine, ki pomagajo odstraniti 20-krat več zobnega kamna tudi na težko dostopnih mestih*. Trikotne konice odstranijo do 100 % več madežev v manj kot dveh dneh***. Daljše ščetine hkrati omogočajo globoko čiščenje dlesni, ki postanejo do 15-krat bolj zdrave že v dveh tednih**. Vse to brez menjanja glav ščetke. Ste vedeli, da glava ščetke postane manj učinkovita po 3 mesecih uporabe? Naša funkcija BrushSync™ vas lahko opomni, ko bo kmalu čas za menjavo.

Skrbi za zdravje ustne votline



Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 je zasnovana posebej za vas. Najsodobnejša tehnologija je prilagojena vam in tako enostavna za uporabo, da je skoraj ne boste opazili. Navsezadnje rezultati povedo vse.

Vam prilagojeno vodenje



Aplikacija Philips Sonicare temelji na umetni inteligenci in deluje povsem usklajeno s ščetko. Med umivanjem zob vam lahko nudi sprotna navodila glede pritiska, gibanja, površine, trajanja in pogostosti umivanja. Ogladate si lahko dnevna, tedenska, mesečna in letna poročila o napredku. Na voljo so vam osebno prilagojena priporočila in koraki za boljše umivanje zob. Ob tem samodejna sinhronizacija skrbi za posodobljenost podatkov o ščetkanju v aplikaciji, tudi ko je med ščetkanjem nimate ob sebi.

Prilagaja se vam v realnem času



Večina nas med umivanjem zob preveč pritiska ščetko. Zato naša zobna ščetka samodejno prilagaja intenzivnost, ko pritiskate preveč.

Hkrati brezplačna aplikacija Philips Sonicare nudi vam prilagojena navodila in nasvete za bistveno boljše umivanje zob.

Zaznava vaš slog ščetkanja




Med čiščenjem zob ščetka Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 s senzorji zaznava, kako močno pritiskate, ter gibanje in površino ščetkanja – do 100-krat na sekundo. Senzorji zaznavajo tudi, kako dolgo in pogosto si umivate zobe.

Dokazano sonično ščetkanje



Odstranite zobne obloge s sonično tehnologijo, našim standardom za učinkovito in nežno čiščenje. Med ščetkanje vam do 62.000 gibov ščetin z dinamičnim in tekočim čiščenjem pomaga pri čiščenju tudi težko dostopnih mest ter poskrbi za izjemno svež in čist občutek v ustih.

Povratne informacije v realnem času

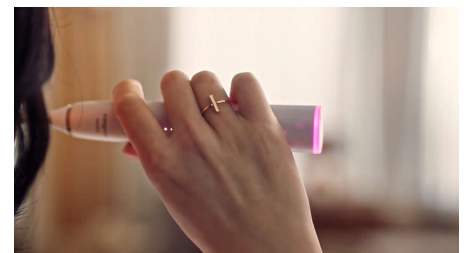

Sami morda ne opazite, da pri ščetkanju pritiskate premočno ali drgnete, vendar ščetka to zazna. Svetleči obroček na koncu ročaja vas bo nežno opomnil, da morate popustiti pritisk ali prenehati z drgnjenjem.

Specifikacije

Povezljivost

Brezžična tehnologija Bluetooth®: Aplikacija, ki se poveže z zobno ščetko

Napajanje

Napajanje: 110–220 V

Tehnične specifikacije

Čas delovanja (od polne do prazne): Več kot 2 tedna****

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Zasnova in izdelava

Barva: Polnočno modra

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Združljivost

Podpora za Android: Android OS 8.0 ali novejša različica

Podpora za iOS: Naprave iPhone s sistemom iOS 13.0 ali novejšo različico

Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Indikator baterije: Osvetljena indikatorska

ikona

Ročaj: Elegantna in kompaktna zasnova, Enostavno upravljanje na dotik

Potovalna torbica: Elegantna in kompaktna polnilna torbica, Vegansko usnje

Opomnik za zamenjavo BrushSync: Opozorilna ikona zasveti, za vedno najboljše rezultate

Priloženi predmeti

Ročaj: 1 x DiamondClean Prestige 9900

Glave ščetke: 1 x A3 Premium vse v enem

Polnilna torbica USB Prestige: 1

Podstavek polnilnika: 1

Kabel USB: 1

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 gibov ščetke/min

Zmogljivost: Odstrani do 20-krat več zobnih oblog*

Pozitivni vplivi na zdravje: Do 15-krat bolj zdrave dlesni**

Pripena k bolj belim zobem: Do 100 % manj madežev***

Časovnik: BrushPacer in SmarTimer

Povratne informacije o pritisku: Obroč zasveti vijolično, Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

Povratne informacije o drgnjenju: Obroč

zasveti oranžno, Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika, Možnost vklopa/izklopa v aplikaciji

Tehnologija SenseIQ

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje premočno

Senzor drgnjenja: Poskrbi za zmanjšanje drgnjenja

Senzor položaja: Beleži površino pokritosti, pri vsakem ščetkanju

3D-prikaz ust: Označi neočiščene predele

Prilagodljiva intenzivnost: Prilagaja intenzivnost, ob premočnem pritiskanju

Umetna inteligenca: Zaznava in sinhronizira ščetkanje

Aplikacija Sonicare z umetno inteligenco

Vodenje v realnem času: Uporabniku prilagojena priporočila,

Dnevno/mesečno/letno poročilo o napredku

Prilagodljivi načini: Clean, White+, Zdrave dlesni, Globinsko čiščenje, Sensitive

Podpora za programsko opremo

Posodobitve programske opreme: Družba Philips nudi ustrezne posodobitve programske opreme v obdobju 2 let od datuma nakupa.

