

PHILIPS

IPL hårfjerningsenhet med SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin-sensor

2 intelligente tilbehør: kropp, ansikt

Lumea IPL-app

Bruk med ledning



BRI945/00



Skreddersydd for deg med SenseIQ

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Gled deg over rask og personlig behandling med vår Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-teknologi med smarte tilbehør og Lumea IPL-app for langvarig glatt hud.

Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Behandle kun 2 ganger i måneden for raske resultater
- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv
- Ekstra lang kabel for ekstra fleksibilitet under behandling

Full løsning for ansikt og kropp

- Fullstendig løsning for ansikt og kropp med to smarte tilbehørsdeler
- Passende for de fleste hud- og hårfarger

Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

- Skånsom og komfortabel med SenseIQ
- Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen

Høydepunkter

2 ganger i måneden for raske resultater



Annen hver uke for å komme i gang – det er halvparten så mange behandlinger som andre merker. Oppfriskning kun en gang i måneden. Det er alt som trengs. Det tar 8,5 minutter å behandle begge ben.

SenseIQ-teknologi



Lumea 8000-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen din og hjelper deg med å finne den mest komfortable innstillingen. Det intelligente tilbehøret tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.

Ekstra lang kabel



Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.

To smarte tilbehørsdeler



Spesialdesignede tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for hvert kroppsområde når de er tilkoblet. Ansikt: Flat design og lite vindu med UV-filter. Kropp: Buet innover med et stort vindu.


Utviklet sammen med hudspesialister



Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den

hjemme. Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

Philips Lumea IPL-appen

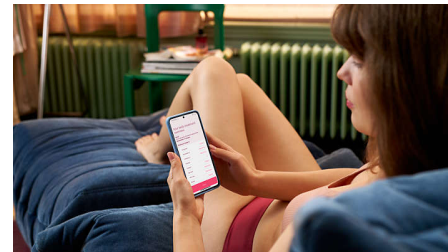

Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.

For de fleste hud- og hårtyper



IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør for kroppsbehandling: Form: Konveks bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm², Tilpasset behandling for kroppen: ben, armer og mage

Tilbehør for ansiktsbehandling: Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet: overleppe, hake og kjeve

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filer: Beskytter huden mot UV-stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

SmartSkin-probe: Få rett innstilling på forespørsel

Programmodus

Slide and Flash: For rask bruk

Bruk med kabel / trådløs bruk: Bruk med ledning

Stamp and Flash: For behandling på små områder

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 100–240 V

Lampe med høy effekt: Laget for lang levetid, 450 000 lysglimt, tilsvarende 39 års levetid for lampen**

Consumer Trade Item

Height: 25.2 cm

Width: 26.3 cm

Length: 11.3 cm

Net weight: 1.075 kg

Gross weight: 1.609 kg

GTIN: 8720689015776

Country of origin: SI

Harmonized system code: 85437090

Pappkartong

Height: 26.8 cm

Width: 23.9 cm

Length: 27 cm

Net weight: 2.15 kg

Gross weight: 3.46 kg

GTIN: 18720689015773

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

Annet

Height: 118 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

GTIN: 68720689015778

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Sminkeveske

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Underarmer: 2,5 min

Bikiniinje: to minutter

Ansiktsområder: 1,5 min

Legger: 8,5 min

