

PHILIPS



IPL hårfjerningsenhet
med SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin-sensor

2 intelligente tilbehør: kropp,
ansikt

Lumea IPL-app

Bruk med ledning



BRI944/00

Skreddersydd for deg med SenseIQ

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Gled deg over rask og personlig behandling med vår Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-teknologi med smarte tilbehør og Lumea IPL-app for langvarig glatt hud.

Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Behandle kun 2 ganger i måneden for raske resultater
- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv
- Ekstra lang kabel for ekstra fleksibilitet under behandling

Full løsning for ansikt og kropp

- Fullstendig løsning for ansikt og kropp med to smarte tilbehørsdeler
- Passende for de fleste hud- og hårfarger

Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

- Skånsom og komfortabel med SenseIQ
- Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen

Lumea IPL 8000 Series

IPL hårfjerningsenhet med SenselQ

BRI944/00

Høydepunkter

2 ganger i måneden for raske resultater



Annen hver uke for å komme i gang – det er halvparten så mange behandlinger som andre merker. Oppfriskning kun en gang i måneden. Det er alt som trengs. Det tar 8,5 minutter å behandle begge ben.

SenselQ-teknologi



Lumea 8000-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen din og hjelper deg med å finne den mest komfortable innstillingen. Det intelligente tilbehøret tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.

Ekstra lang kabel



Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.

2 smart attachments



Spesialdesignede tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for hvert kroppsområde når de er tilkoblet. Ansikt: Flat design og lite vindu med UV-filer. Kropp: Buett innover med et stort vindu.


Utviklet sammen med hudspesialister



Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme.

Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

Philips Lumea IPL-appen

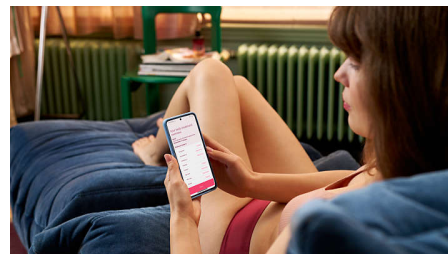

Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.

For de fleste hud- og hårtyper



IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør for kroppsbehandling: Form: Konveksebue, Vindusstørrelse: 4,1 cm², Tilpasset behandling for kroppen: ben, armer og mage
Tilbehør for ansiktsbehandling: Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet: overleppe, hake og kjeve

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktet blinking

SmartSkin-probe: Rett innstilling på forespørsel

Programmodus

Slide and Flash: For rask bruk

Stamp and Flash: For behandling på små områder

Bruk med kabel / trådløs bruk: Bruk med ledning

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 100–240 V

Lampe med høy effekt: Laget for lang levetid, 450 000 lysglimt, tilsvarende 39 års levetid for lampen**

Consumer Trade Item

Height: 25.2 cm

Width: 26.3 cm

Length: 11.3 cm

Net weight: 1.059 kg

Gross weight: 1.593 kg

GTIN: 8720689015370

Country of origin: SI

Pappkartong

Height: 26.8 cm

Width: 23.9 cm

Length: 27 cm

Net weight: 2.118 kg

Gross weight: 3.428 kg

GTIN: 18720689015377

Palle

Height: 118 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 118.608 kg

Gross weight: 206.032 kg

GTIN: 68720689015372

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

Pallet Layer

Height: 26.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Sminkeveske

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Underarmer: 2,5 min

Bikiniinje: to minutter

Ansiktsområder: 1,5 min

Legger: 8,5 min

