

PHILIPS

IPL hårfjerningsenhet
med SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin-sensor

2 intelligente tilbehør: kropp,
ansikt

Lumea IPL-app

Bruk med ledning



BRI945/00

Skreddersydd for deg med SenseIQ

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Gled deg over rask og personlig behandling med vår Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-teknologi med smarte tilbehør og Lumea IPL-app for langvarig glatt hud.

Skånsom og effektiv for langvarig glatt hud

- Raske resultater med behandlinger bare annenhver uke
- Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv
- Ekstra lang kabel for ekstra fleksibilitet under behandling

Full løsning for ansikt og kropp

- Fullstendig løsning for ansikt og kropp med to smarte tilbehørsdeler
- Passende for de fleste hud- og hårfarger

Personlig tilpasset behandling med IPL-hårfjerning

- Skånsom og komfortabel med SenseIQ
- Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen

Lumea IPL 8000 Series

IPL hårfjerningsenhet med SenselQ

BRI945/00

Høydepunkter

2 ganger i måneden for raske resultater



Kom i gang med den første fasen med fire behandlinger annenhver uke – halvparten så mange behandlinger som med andre merker. Deretter frisker du opp månedlig for å opprettholde resultatene.

SenselQ-teknologi



Lumea 8000-serien har fem lett justerbare lysinnstillinger. Vår SmartSkin-sensor leser hudtonen din og hjelper deg med å finne den mest komfortable innstillingen. Det intelligente tilbehøret tilpasser behandlingen for hvert kroppsområde.

Ekstra lang kabel



Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.

2 smart attachments



Spesialdesignede tilbehør passer perfekt til kroppens kurver og aktiverer de mest effektive programmene for hvert kroppsområde når de er tilkoblet. Ansikt: Flat design og lite vindu med UV-filer. Kropp: Buet innover med et stort vindu.


Utviklet sammen med hudspesialister



Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme.

Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

Philips Lumea IPL-appen

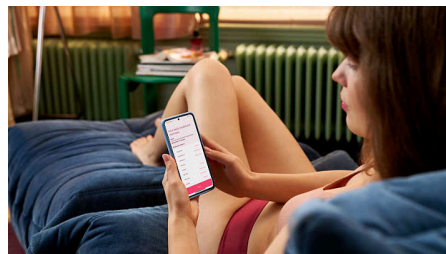

Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.

For de fleste hud- og hårtyper



IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen og fungerer dermed på naturlig mørk blondt, brunt og svart hår og på hudfarger fra lys til mørk brun (I-V).

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør for kroppsbehandling: Form: Konveks bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm², Tilpasset behandling for kroppen: ben, armer og mage

Tilbehør for ansiktsbehandling: Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet: overleppe, hake og kjeve

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

5 innstillinger for lysenergi: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktet blinking

SmartSkin-probe: Rett innstilling på forespørsel

Programmodus

Slide and Flash: For rask bruk

Stamp and Flash: For behandling på små områder

Bruk med kabel / trådløs bruk: Bruk med ledning

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 100–240 V

Lampe med høy effekt: Laget for lang levetid, 450 000 lysglimt, tilsvarende 39 års levetid for lampen**

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 ekstra garantiår ved registrering av produktet innen 90 dager

Deler som medfølger

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok

Oppbevaring: Sminkeveske

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Underarmer: 2,5 min

Bikiniinje: to minutter

Ansiktsområder: 1,5 min

Legger: 8,5 min



* Median for hårreduksjon etter 12 behandlinger: 86 % på leggene, 70 % på bikini, 67 % på armhulene

* * Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikiniinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti