

PHILIPS

sonicare

Kit cu spray
TongueCare+

TongueCare+

1 perie pentru limbă

1 spray pentru limbă

Sincronizarea modurilor
BrushSync

HX8071/17



Limbă curată, respirație proaspătă

Curățare Philips Sonicare pentru limba ta

Apasă. Pulverizează. Curăță. Peria noastră inovatoare inteligentă pentru limbă TongueCare+ și spray-ul îți transformă imediat perișorul de dinți Philips Sonicare într-o soluție puternică pentru respirație proaspătă. Limba ta beneficiază de o curățare Sonicare. Obții o respirație proaspătă de durată

An easy addition to your oral care routine

- De la perișorul de dinți la dispozitiv de curățat limba, printr-un singur clic
- Distruge bacteriile care provoacă respirație urât mirositoare și neutralizează pe loc mirosurile
- Accesează cu ușurință toate zonele limbii

Innovative technology

- 240 de microperi pentru curățare delicată și profundă
- Curățare Philips Sonicare pentru limba ta
- Se sincronizează automat cu mânerul perișorului


Repere

Microperi




Cu 240 de microperi din cauciuc, peria pentru limbă TongueCare+ este special concepută pentru a curăța suprafața fină și poroasă a limbii. Microperii flexibili se mulează perfect pe protuberanțe și șanțuri și le curăță delicat, pentru a elimina bacteriile acumulate și a spori și mai mult eficiența spray-ului antibacterian pentru limbă Philips Sonicare BreathRx. Forma compactă îți permite să îți cureți confortabil întreaga limbă.

Tehnologie Sonică

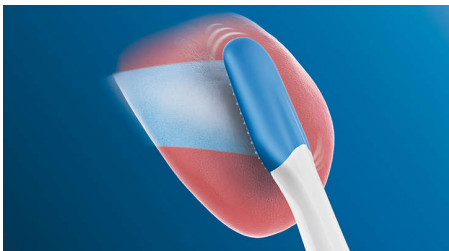

TongueCare+ este singurul dispozitiv de curățare a limbii cu putere Philips Sonicare, care elimină la fiecare mișcare bacteriile ce cauzează respirație urât mirositoare. Cele 31.000 de vibrații pe minut dizolvă reziduurile de pe limbă, elimină bacteriile care generează respirație urât mirositoare și sporesc și mai mult eficiența spray-ului antibacterian pentru limbă Philips Sonicare BreathRx. Vei simți limba mai curată, iar respirația se va menține proaspătă mai mult timp.

Sincronizarea inteligentă a modurilor

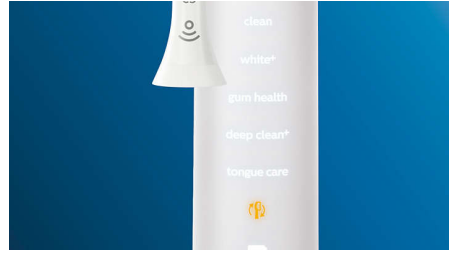

Peria noastră inteligentă pentru limbă TongueCare+ dispune de un microcip integrat care comunică cu mânerul periutei de dinți. Așadar, când o atașezi, mânerul o recunoaște automat și selectează modul și nivelul de intensitate adecvate pentru a optimiza eficiența curățării limbii. Nu trebuie decât să apeși butonul de pornire.

Ușor de atașat, printr-un clic



Peria pentru limbă TongueCare+ îți transformă rapid perița de dinți Philips Sonicare într-un dispozitiv de curățat limba cu putere sonică. Fiecare perie de curățare a limbii se atașează printr-un clic pe mânerul periutei de dinți Philips Sonicare, ca orice cap de periere. Ușor de utilizat, înlocuit și curățat, aceste perii inovatoare pentru limbă sunt compatibile cu mânerurile tuturor periutele de dinți Philips Sonicare cu fixare printr-un clic, așa că este extrem de simplu să adaugi curățarea limbii la rutina ta zilnică de îngrijire orală. Se potrivește


cu mânerurile tuturor periutele de dinți Philips Sonicare, cu excepția PowerUp Battery și Essence.

Spray pentru limbă BreathRx



Compușii sulfuroși volatili urât mirositori nu au nicio șansă cu spray-ul pentru limbă BreathRx, demonstrat că distruge bacteriile ce provoacă mirosuri neplăcute și neutralizează imediat respirația urât mirositoare. Formula specială îți îmbracă limba și o menține lubrifiată pentru o curățare delicată cu peria pentru limbă TongueCare+. Aroma mentolată răcoroasă va conferi gurii tale senzația de prospețime și curățenie.

Curăță-ți cu adevărat limba

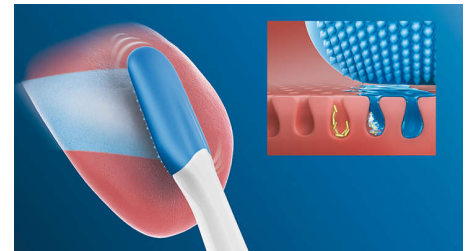

Pentru a avea o limbă cu adevărat curată, trebuie să poți ajunge peste tot. Mulțumită formei ergonomice, peria pentru limbă TongueCare+ te ajută să faci acest lucru într-un mod confortabil. Capul mic și flexibil facilitează eliminarea din toate colțișoarele a bacteriilor care generează respirația urât mirositoare.

Specificații

Design și finisaj

Culoare: Alb

Material

Elastomer: Fără latex

Compatibilitate

Sistem capete de periere: Atașare printr-un clic
Adecvat pentru aceste modele: Seria 2 pentru controlul plăcii bacteriene, Seria 2 pentru controlul plăcii, Seria 3 pentru sănătatea gingiilor, DiamondClean, DiamondClean Smart,

EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Sincronizarea modurilor BrushSync

Articole incluse

Capete de periere: 1 perie pentru limbă TongueCare+

Spray antibacterian pentru limbă: 2 oz

Ingrediente

Ingredientele spray-ului pentru limbă: Aqua, Propilenglicerol, Ulei de ricin hidrogenat PEG-40, Aromă, gluconat de zinc, Dimeticonă PEG-12, Clorură de cetilpiridiniu, Eucalipt, ulei de Citriodora, Timol, zaharină de sodiu, Limonen, CI42090

Termen de expirare

După deschidere: 6 luni

Perioada de valabilitate a spray-ului pentru limbă: 36 luni

