

# PHILIPS

IPL-hårfjerningsenhed  
med SenseIQ

Lumea IPL 8000  
Series

SmartSkin-sensor

2 intelligente tilbehørsdele: krop,  
ansigt

Lumea IPL-app

Brug med ledning



BRI945/00

## Skræddersyet til dig med SenseIQ

Nyd 12 måneder med glat og hårfri hud\*

Nyd en hurtig og personligt tilpasset behandling med vores Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-teknologi med smart tilbehør og Lumea IPL-app til blød hud rigtig længe.

### Skånsom og effektiv til glat hud, der varer længe

- Behandling kun 2x om måneden giver hurtige resultater
- Udviklet i samarbejde med dermatologer til at være nem og effektiv
- Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

### Komplet løsning til ansigt og krop

- Komplet løsning til ansigt og krop med 2 smarte tilbehørsdele
- Velegnet til de fleste hudfarver og hårfarver

### Personligt tilpasset IPL-hårfjerningsbehandling

- Skånsomt og behageligt med SenseIQ
- Optimer din rutine med Philips Lumea IPL-appen

# Vigtigste nyheder

## 2x om måneden for hurtige resultater



Hver anden uge til at starte med – det er halvt så mange behandlinger som andre varemærker. Efterfulgt af opfriskning kun én gang om måneden. Det er det hele. Det tager 8,5 minut at dække begge underben.

## SenseIQ-teknologi



Lumea 8000-serien har fem let justerbare lysindstillinger. Vores SmartSkin-sensor læser din hudfarve og hjælper dig med at finde den mest behagelige indstilling. Intelligente tilbehørsdele tilpasser behandlingen til hvert kropsområde.

## Ekstra langt kabel



Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvredegtighed.

## 2 smarte tilbehørsdele



Specialdesignede tilbehørsdele passer perfekt til kroppens kurver og udløser de mest effektive programmer for hvert kropsområde, når de er tilsluttet. Ansigt: fladt design og lille vindue med UV-filer. Krop: buer indad og med et stort vindue.


## Udviklet i samarbejde med dermatologer



Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem,

effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.

## Philips Lumea IPL-appen

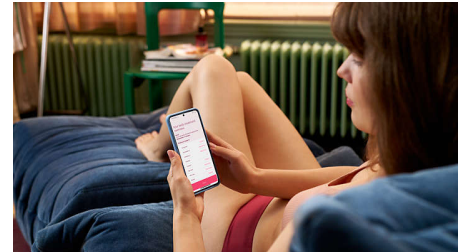

Vores gratis coaching-app hjælper dig med at planlægge og fastholde din behandlingsplan og hjælper dig derefter gennem hver session, trin for trin. Downloadet af mere end 2,1 millioner brugere.

## Til de fleste hud- og hårtyper



IPL har brug for kontrast mellem pigmentet i hårfarven og pigmentet i hudfarven, og den virker derfor på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudtoner fra lys til mørkebrun (I-IV).

# Specifikationer

## Tekniske specifikationer for tilbehør

**Body treatment attachment:** Form: Konvekst buet, Vinduesstørrelse: 4,1 cm<sup>2</sup>, Skræddersyet behandling af krop: Ben, arme og mave

**Face treatment attachment:** Form: Flad, Vinduesstørrelse: 2 cm<sup>2</sup>, ekstra filter, Skræddersyet behandling af ansigtet: Overlæbe, hage og kæbelinje

## Sikkerhed og justerbare indstillinger

**Integreret UV-filer:** Beskytter huden mod UV-lys

**5 lysenergiindstillinger:** Justerbar i forhold til din hudtype

**Integreret sikkerhedssystem:** Undgå utilsigtede

blink

**SmartSkin-sensor:** Den rigtige indstilling ved behov

## Programtilstand

**Slide and Flash:** For hurtig anvendelse

**Ledningsbaseret/ledningsfri brug:** Brug med ledning

**Stamp and Flash:** Til behandling på små områder

## Tekniske specifikationer

**Spænding:** 100-240 V

**High performance lamp:** Bygget til at holde, 450.000 blink, svarende til 39 års pærelevetid\*\*

## Service

**Garanti:** 2 års global garanti + 1 ekstra års garanti ved produktregistrering inden for 90 dage

## Medfølgende dele

**Instructions for use:** Brugervejledning

**Opbevaring:** Skønhedsetui

**Adapter:** 19,5 V / 4.000 mA

## Anvendelsestid

**Under armene:** 2,5 min.

**Bikini line:** 2 min

**Face areas:** 1,5 min.

**Underben:** 8,5 min

