



Philips Sonicare AirFloss
Interdental - Recargable

con 1 boquilla



HX8241/02

¿No usas hilo dental? Pues usa AirFloss.

Elimina la placa donde el cepillado no puede

Para aquellos que no utilizan el hilo dental a menudo, AirFloss es una forma sencilla de limpiar entre los dientes. AirFloss se puede usar con enjuague bucal o agua y dispone de una exclusiva tecnología de aire y microgotas que ayuda a eliminar la placa en zonas de difícil acceso.

Improves oral health

- Elimina más placa entre los dientes
- Ayuda a mejorar la salud de las encías en solo dos semanas
- Ayudan a evitar las caries entre los dientes

Limpieza en 30 segundos

- Limpia toda la boca en solo 30 segundos
- Apuntar, pulsar y limpiar

Fácil de usar

- Tecnología de aire y microgotas
- Mango ergonómico cómodo
- La punta-guía garantiza una colocación correcta
- Un cepillo para cada miembro de la familia

Ayuda a crear un hábito saludable

- Una sencilla forma de mejorar la limpieza entre los dientes

PHILIPS
sonicare


Destacados

Una sencilla forma de empezar



La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. El AirFloss ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable. Después de tres meses de uso del AirFloss, un 96 % de las personas que no utilizan el hilo dental constantemente siguió utilizando el AirFloss cuatro o más veces a la semana.

Elimina más placa entre los dientes

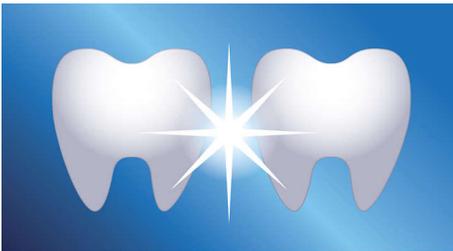

Elimina más placa entre los dientes

Tecnología de aire y microgotas



Tecnología de aire y microgotas

Punta-guía



El cepillo estrecho en ángulo y la punta-guía permiten encontrar la colocación correcta con facilidad. Solo tienes que deslizarla a lo largo de la superficie de los dientes cerca de la línea de las encías para que la punta se asiente en el hueco que hay entre los dientes.

Limpieza en 30 segundos



Con el AirFloss, tardarás solo 30 segundos en limpiarte toda la boca. Solo tienes que pulsar el botón una vez para que emita un solo chorro, mover y repetir. Para utilizar la nueva función de chorro automático, mantén pulsado el botón y mueve la punta-guía entre un espacio y otro. La punta emitirá un chorro automáticamente cada segundo.

Depósito fácil de llenar



Llena el depósito del mango con enjuague bucal o agua para disfrutar de una limpieza refrescante. Luego apunta y dispara. El depósito de agua tiene capacidad suficiente para hasta dos usos.

Encías más sanas



Se ha demostrado clínicamente que el Sonicare AirFloss mejora la salud de las encías en solo dos semanas.

Ayudan a evitar las caries



El Sonicare AirFloss ayuda a evitar las caries que se forman en los espacios entre los dientes despegando suavemente la placa que el cepillo no ha eliminado.

Mango ergonómico

Diseñado para manejarlo fácilmente en espacios estrechos, el AirFloss tiene un mango ergonómico cómodo y una sujeción antideslizante.

Especificaciones

Potencia

- Tensión: Cargador multivoltaje

Especificaciones técnicas

- Tiempo de funcionamiento: Sustituye el cabezal cada 6 meses
- Pila: Recargable
- Tipo de batería: Iones de litio
- Tiempo de carga: Carga completa en 24 horas

Especificaciones de diseño

- Color(es): Blanco con detalles en verde

Servicios

- Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

- Mango: Diseño compacto y ergonómico
- Indicador de batería: El parpadeo indica que la

batería se está agotando

- Duración de la batería: Hasta 2 semanas
- Accesorio de boquilla: Se pone y se quita fácilmente

Piezas incluidas

- Cargador: 1 cargador multivoltaje
- Mango AirFloss: 1
- Boquilla AirFloss: 1, 3
- Soporte para boquillas: 1

Rendimiento de limpieza

- Rendimiento: Elimina hasta 5 veces más placa*
- Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías en solo dos semanas
- Función de chorro automático: Limpia toda la boca en 30 segundos
- Boquillas: El cambio cada 6 meses proporciona mejores resultados



Fecha de emisión
2023-05-22

Versión: 5.0.1

EAN: 87 10103 62340 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* que el cepillado manual por sí solo