

PHILIPS

sonicare

Szónikus
elektromos fogkefe

ProtectiveClean
4300

Beépített nyomásérzékelő

1 üzemmód: Clean - 2 intenzitás

1 BrushSync funkció



HX6807/04



Tisztább fogak, kíméletesen.

Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe.

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

- A kézi fogkefékhez képest akár 7-szer hatékonyabb lepedékeltávolítás
- Gyengéd és biztonságos az érzékeny területeken, illetve fogszabályzó és fogászati kezelések esetén is

Az Ön igényeihez tervezve

- Bevezető program, hogy a Philips Sonicare rutin mindennapjai részévé váljon
- Alapos fogmosásra ösztönöz
- Mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a fogkefefejet

Innovatív technológia

- Túl erős rányomás esetén figyelmeztet
- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája
- Összeköti az intelligens fogkefemarkolatot és az intelligens kefefejeket

Fénypontok

Mondjon búcsút a lepedéknek



A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték akár 7-szer több lepedéket távolítanak el, mint egy kézi fogkefe. A speciálisan görbített, erős sörtékkel pedig gyerekjáték a száj hátsó részében található fogak elérése.

Gyengéd és biztonságos




Biztos lehet abban, hogy biztonságos a fogmosás: szónikus technológiánk alkalmazható fogszabályzó, tömés, korona és héj esetén is, emellett elősegíti a fogszuvasodás megelőzését és a fogíny egészségének megőrzését.

Az egyetlen igazán szónikus technológia



A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

Felügyeli a fogmosás során kifejtett nyomást

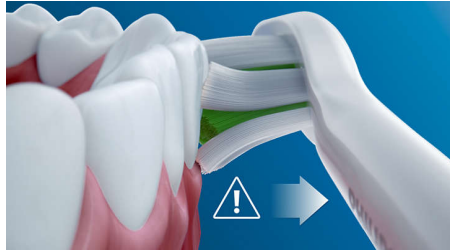

A túl erőteljes fogmosás károsíthatja a fogakat és az ínyt. Ennek megelőzése érdekében a Philips Sonicare ProtectiveClean gyengéd pulzáló hangot bocsát ki, emlékeztetve Önt, hogy enyhítse a nyomást.

BrushSync technológia



A mikrochip technológia észleli és szinkronizálja az intelligens kefejelet az intelligens markolattal. Az intelligens markolat és az intelligens kefefej tökéletes párost alkot, lehetővé teszi az intelligens csere- emlékeztetőt.

BrushSync csere- emlékeztető



Minden fogkefe elhasználódik egy idő után. Azonban a BrushSync technológiánk nyomon követi, hogy mennyi ideje használja a fogkefejelet, és hogy milyen erős nyomást fejt ki. Ha itt az idő a cserére, a markolaton egy


jelzőfény, illetve egy rövid hangjelzés figyelmeztet erre. Így biztos lehet abban, hogy fogkefeje jó munkát végez.

Váljon szokásává az új fogmosási rutinja



Amikor valami újba fogunk, eltarthat egy kis ideig, amíg hozzászokunk. Bevezető programunk segítségével új fogkefeje első 14 használata során lehetősége van fokozatosan és gyengéd lépésekben növelni a fogkefe tisztítóerejét.

Hasznos időzítők

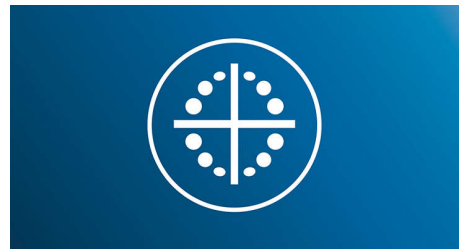

Szeretne egy időzítővel rendelkező elektromos fogkefét? A QuadPacer jelez, amikor optimális időt töltött a szája egy adott részének tisztításával, a SmarTimer pedig jelzi, hogy mikor telt le a fogmosáshoz ajánlott két perc.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér és mentazöld

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen

rápatintható kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

Fogmosási idő: Akár 2 hét

Tartozékok

Töltő: 1

Markolat: 1 ProtectiveClean

Kefefejek: 1 C2 optimális lepedék elleni védelem

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár 7-szer több lepedéket távolít el*

Egészségügyi előnyök: Segíti a fogszuvasodás csökkentését

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer

időzítő

Nyomásvisszajelzés: A markolat rezgésével figyelmezteti a használót

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

2 intenzitási szint: Alacsony, Magas

Intelligens érzékelőtechnológia

BrushSync csere-émlékeztető: Mindig tudni fogja, mikor, cserélje ki a kefefejeket

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet

