

# PHILIPS

## sonicare

Szónikus elektromos fogkefe alkalmazással

DiamondClean Smart

Személyre szabott tanácsok

Intelligens kefefej-érzékelők

Intelligens kefefej-felismerés

5 üzemmód, 3 intenzitási szint



HX9924/07



## Az eddigi legjobb fogkefénk a teljes körű szájàpoláshoz

A mindenre kiterjedő ápolás magabiztosságot nyújt

A DiamondClean Smart a legjobb fogkefénk a teljes körű szájàpoláshoz. A négy nagy teljesítményű fogkefe segítségével a szájàpolás minden területére figyelmet fordíthat, az Intelligens érzékelőtechnológia pedig személyre szabott visszajelzést és tanácsokat nyújt.

### **Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát**

- Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el\* az alapos tisztításért
- Akár 7-szer egészségesebb fogíny\* mindössze 2 hét után
- Akár 100%-kal több lerakódást távolít el\*\*, mindössze 3 nap alatt
- Élvezze a hosszan tartó, friss leheletet

### **Egyéni alkalmazáson belüli tanácsok a tökéletes kefehasználathoz**

- Irányítja a fogmosást, és megmutatja a kihagyott területeket
- Visszavezet a kihagyott területekre a 100%-os lefedettségért
- Viselje jobban gondját a problémás területeknek
- Túl erős rányomás esetén figyelmeztet
- Rávezeti, hogyan csökkentse a dörzsölést

### **Optimalizálja a fogmosást**

- A kefefejek automatikusan kiválasztják az optimális beállítást
- Hozza ki a kefefejből garantáltan a legjobbat
- 5 üzemmód és 3 intenzitási beállítás közül választhat

# Fénypontok

## Mondjon búcsút a lepedéknek




Illessze a fogkefére a C3 Premium Plaque Control kefejét a mindennél alaposabb tisztítás élményéért. A puha, rugalmas oldalú kefej sörtéi pontosan követik az egyes fogak felületét, 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosítva\*\*\*, és akár 10-szer több lepedéket távolítanak el még a nehezen elérhető helyekről is\*.

## Gondoskodás az ínyénekről



Illessze a fogkefére a G3 Premium Gum Care kefejét fogínyegészségének fokozására. Kisebb mérete és célzott ínyvonalmenti sörtéi gyengéd, mégis hatékony tisztítást nyújtanak az ínyvonalnak, ahol az ínybetegségek általában kezdődnek. Klinikailag igazoltan akár 100%-kal csökkenti az ínygyulladás esélyét\*, és akár 7-szer egészségesebb fogínyt eredményez már két hét használat után.\*

## Fehérebb fogak, gyorsan

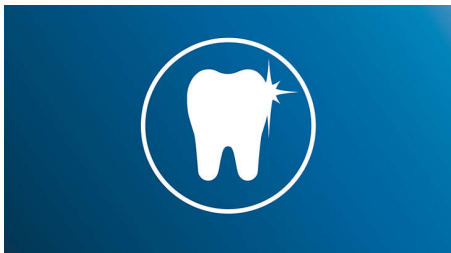

Illessze a fogkefére a W3 Premium White kefejét a felületi lerakódások eltávolításához és a legfehérebb mosolyhoz. Klinikai tesztekkel


bizonyított, hogy a sűrűn elhelyezkedő sörték alkotta középső feltöltévolító betét révén mindössze három napon belül 100%-kal több elszíneződést távolít el.\*\*

## TongueCare+ nyelvtisztító kefe




Illessze a fogkefére a TongueCare+ nyelvtisztító kefét, és távolítsa el gyengéden a nyelv pórusaiból a kellemetlen szagért felelős baktériumokat. 240 speciálisan kialakított MicroBristles mikrosörtéje bejut a nyelv minden barázdájába és mélyedésébe, és eltávolítja a rossz leheletet okozó baktériumokat és lerakódásokat. Az antibakteriális BreathRx nyelvtisztító sprayjel párosítva az eredmény: kiváló tisztítás és szuperfriss lehelet.

## Nincs több kihagyott rész!

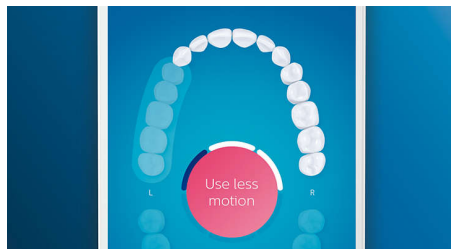


A Philips Sonicare alkalmazás jelzi Önnek, hogy mikor érte el a teljes és alapos tisztítást, és útmutatásával tudatosabb, jobb fogmosóvá válhat.

## TouchUp funkció

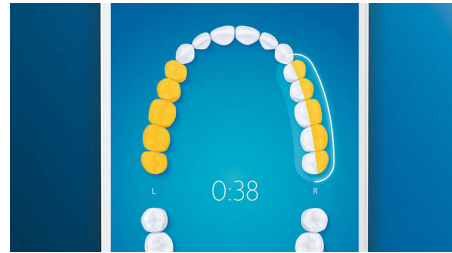


Ha kihagyna egy területet a fogmosás során, az alkalmazás TouchUp funkciója ezt megmutatja, így Ön még egyszer végigmehet a területen, és biztos lehessen afelől, hogy minden alkalommal teljes tisztaságot ér el.

## Fókuszterületek és célkitűzések

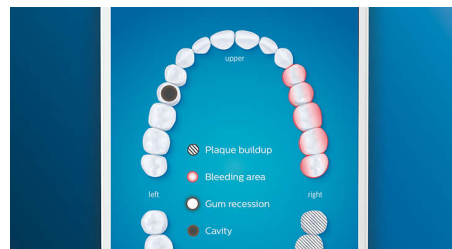

Fogorvosa felhívta a figyelmét pár problémás területre? Mi kijelöljük azokat az alkalmazáson belüli 3D-s szájtérképen, és emlékeztetjük Önt arra, hogy fordítson rájuk különös figyelmet.

## Túl nagy nyomás?

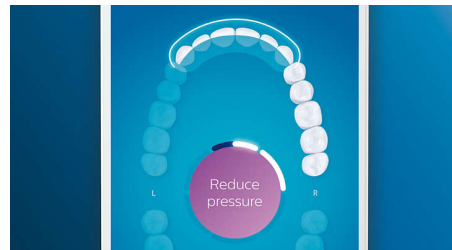

Lehet, hogy Ön nem veszi észre, ha túl erősen mos fogat, de a DiamondClean Smart észleli. Ha túl nagy nyomást fejt ki, a markolat végén lévő fénygyűrű villog, ami arra figyelmeztet, hogy csökkentse a nyomást, és engedje, hogy a fogkefeje végezze el a többit. 10 emberből 7 úgy találta, hogy ennek a funkciónak köszönhetően hatékonyabbá vált a fogmosásuk.

# Műszaki adatok

## Csatlakoztathatóság

Bluetooth® vezeték nélküli technológia:  
Fogmosási alkalmazás

## Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

## Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): 14 nap\*\*\*\*\*  
Akkumulátor: Újratölthető  
Elem típusa: Lítium-ionos

## Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér

## Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

## Kompatibilitás

Android-kompatibilis: Android telefonok,  
Bluetooth 4.0-kompatibilis táblagépek  
iOS-kompatibilis: 3. generációs iPad vagy  
újabb, iPhone 4S vagy újabb, iOS7 vagy újabb  
operációs rendszerrel

## Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen  
rápattintható kefefejek  
Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás  
Kijelző: Világító kijelző  
Töltöttségjelző: Világító ikon jelzi az  
akkumulátor élettartamát

Kefefej-felismerés: Szinkronizálás az optimális  
üzemmóddal  
Csere-émlékeztető: Így mindig a legjobb  
eredményt nyújthatja, az emlékeztető ikon  
világítani kezd

## Tartozékok

Utazótok: USB-töltős utazótok  
Markolat: 1 DiamondClean Smart  
Kefefejek: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3  
Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1  
TongueCare+ nyelvtisztító kefe  
Pohártöltő: 1

## Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc  
Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket  
távolít el\*  
Egészségügyi előnyök: Akár 7-szer  
egészségesebb fogíny\*\*\*\*  
Fehérítő hatás: Akár 100%-kal kevesebb  
elszíneződés\*\*\*\*\*  
Időzítő: BrushPacer és SmarTimer  
Nyomásvisszajelzés: Lilán világító gyűrű, A  
markolat rezgésével figyelmezteti a használat  
TouchUp: 100%-os lefedettséget nyújt

## Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért  
3 intenzitási szint: Magas, Közepes, Alacsony  
Deep Clean+: Az élénkítő mélytisztításért  
Egészséges ínny: Különös figyelemmel az

őrlőfogakra

TongueCare+: A hosszan tartó, tiszta leheletért  
White+: A felületi lerakódások eltávolításáért

## BrushSync mód párosítás

C3 Premium Plaque Control: A Clean (Tisztítás)  
móddal párosítható  
G3 Premium Gum Care kefefej: A Gum Health  
móddal párosítható  
W3 Premium White kefefej: A White+ móddal  
párosítható  
TongueCare+ nyelvtisztító kefe: A TongueCare  
móddal párosítható

## Intelligens érzékelő technológia

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén  
figyelmeztet  
Helyérzékelő: Nyomon követi és javítja a  
lefedettséget  
Dörzsölés-érzékelő: Rávezet a dörzsölés  
csökkentésére  
3D-s térkép a szájról: Kijelöli a problémás  
területeket  
TouchUp: A kihagyott területek kezelésére  
Elhelyezkedésérzékelő: A kihagyott  
területekhez irányít

## Támogatott szoftverek

Szoftverfrissítések: A Philips a vásárlás  
dátumától számított 2 évig kínál  
szoftverfrissítéseket.



\* Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi  
fogkefe

\*\* egy kézi fogkefe és egy piacvezető fehérítő fogkrém  
együttes használatához képest

\*\* a DiamondClean fogkefefejhez képest

\*\*\*\* Gum Health (Egészséges fogíny) módban, a kézi  
fogkefékhez képest; 2 hét után

\*\*\*\*\* 3 napi White+ módban való használat után, a kézi  
fogkeféhez képest

\*\*\*\*\* naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve,  
standard üzemmódban