

PHILIPS

sonicare

„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

ProtectiveClean
4300

Integruotas spaudimo jutiklis

1 valymo režimas

1 „BrushSync“ funkcija

Kelioninis dėklas



HX6807/35



Baltesni dantys. Švelnus valymas.

Baltesni dantys vos per 1 savaitę.

Pajuskite švelnaus dantų valymo skirtumą naudodami spaudimo jutiklį, džiaukitės baltesniais dantimis vos per 1 savaitę.

Proven to improve oral health

- Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, tinka naudoti ortodontinio gydymo metu
- Baltesni dantys vos per savaitę

Designed around you

- Lengvos pradžios programa
- Skatinimas valyti kruopščiai
- Keliukite lengviau

Innovative technology

- Praneša, jei spaudžiate per stipriai
- Visada žinokite, kada reikia keisti šepetėlio galvutes
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“
- Sujungia šepetėlio rankenėlę ir išmaniąsias šepetėlio galvutes

Ypatybės

Natūraliai baltesni dantys



Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.

Stebi spaudimą valymo metu




Per stipriai valydami dantis galite pažeisti dantis ir dantenas. Norint to išvengti, „Philips Sonicare ProtectiveClean“ skleidžia švelnų pulsuojančią garsą, kad įspėtų, jog spaudžiate per stipriai.

Saugiai ir švelniai




Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnelės, turint plombų ir dantų su karūnelėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdienei dantenu sveikatai gerinti.

„BrushSync“ šepetėlio galvutės keitimo priminimas

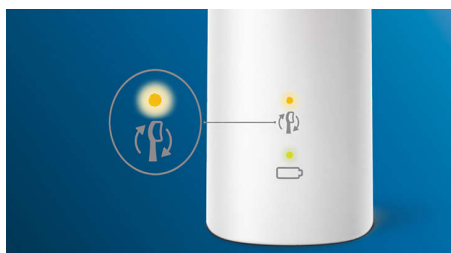

Visos šepetėlio galvutės bėgant laikui nusidėvi. Tačiau mūsų technologija „BrushSync“ stebi, kiek laiko naudojote šepetėlio galvutę ir kaip stipriai valėte dantis. Kai ateis laikas ją pakeisti, apie tai perspės ant rankenos esantis šviesos indikatorius ir trumpas pytelėjimas. Taip būsite tikri, kad šepetėlio galvutė valo efektyviai.

Naudingi laikmačiai

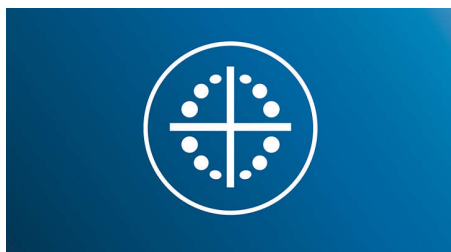

Reikalingas elektrinis dantų šepetėlis su laikmačiu? Mūsų „QuadPacer“ perspėja, kai praeina pakankamai laiko valant kiekvieną burnos dalį, o „Smartimer“ praneša praėjus dviem rekomenduojamoms valymo minutėms.

Technologija „BrushSync“



Technologija su integruotu lustu aptinka ir sinchronizuoja išmaniają šepetėlio galvutę su rankenėle. Išmanioji šepetėlio rankena ir išmaniosios šepetėlio galvutės kartu yra galingas derinys, dėl kurio veikia išmanieji keitimo priminimai.

Lengvai priraskite prie naujojo režimo



Pradedant ką nors naujo gali reikėti prie to prirasti. Mūsų lengvos pradžios programa leidžia palaipsniui, švelniai didinti valymo šepetėliu galingumą per pirmus 14 valymosi naujuoju dantų šepetėliu kartų.

Patogus kelioninis dėklas ir kroviklis



Mūsų kelioniniame dėkle „premium“ higieniškai laikykite dantų šepetėlį, o su mūsų kompaktišku įkrovimo pagrindu įkraukite keliaudami. Vieną kartą iki galo įkrovę galite įprastai naudoti dvi savaites, tačiau įkroviklis yra tik bilietas ilgesnėms kelionėms.

„Philips Sonicare“ technologija



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Specifikacijos

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta ir mėta

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo baterijos įkrovą

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Pakeitimo priminimas: Kad visada užtikrintų geriausius rezultatus, užsidega priminimo piktograma

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Rankenėlė: 2 „ProtectiveClean“

Šepetėlių galvutės: 2 „W2 optimal white“

Kelioninis dėklas: 2

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites, Padeda sumažinti ertmių

Balinamoji nauda: Baltesni dantys vos per savaitę

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

2 intensyvumai: Žemas, Aukštas

Išmanioji jutiklinė technologija

„BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes

Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai

