

PHILIPS

sonicare

Электрическая
звуковая зубная щетка

ProtectiveClean 4500

Встроенный датчик давления

2 режима чистки

Функция BrushSync



HX6829/14



Бережный уход за деснами

Десны на 100 % более здоровые, чем при использовании обычной щетки.

Почувствуйте разницу: бережная очистка благодаря датчику давления на щетку делает десны на 100 % более здоровыми, чем при использовании обычной зубной щетки.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Улучшает состояние десен до 100 %*
- Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

Создано для вас

- Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare
- Следит за длительностью чистки
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

Инновационная технология

- Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare
- Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

Повысьте эффективность чистки зубов

- Режим чистки и режим ухода за деснами


Особенности

Улучшает состояние десен



Густые щетинки высокого качества бережно очищают зубы и удаляют налет вдоль линии десен, улучшая их состояние до 100 % в сравнении с обычными зубными щетками. Специальный изогнутый кончик упрощает чистку дальних зубов.

Режим чистки и режим ухода за деснами

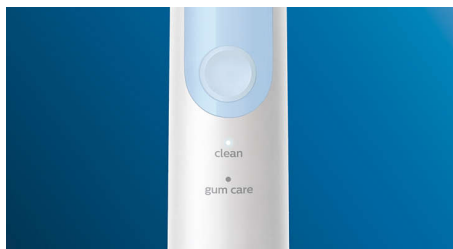

Эта щетка оснащена двумя режимами для эффективного удаления налета и бережного ухода за деснами: режим Clean (Чистка) для качественной чистки и режим Gum Care (Уход за деснами) для мягкого массажа десен в течение одной минуты на более низкой скорости.

Безопасно и бережно



Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

Уникальная звуковая технология



Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

Отслеживает уровень силы нажатия



Чрезмерная сила нажатия на щетку может повредить ваши зубы и десны. Чтобы предотвратить это, Philips Sonicare ProtectiveClean издает пульсирующий звуковой сигнал, напоминающий о необходимости надавливать на щетку не так сильно.

Технология BrushSync



Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются синхронизация режимов и напоминания о замене насадки.

BrushSync: напоминания о замене




Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

Таймеры



Нужна электрическая зубная щетка с таймером? Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

С легкостью привыкайте к новым ощущениям

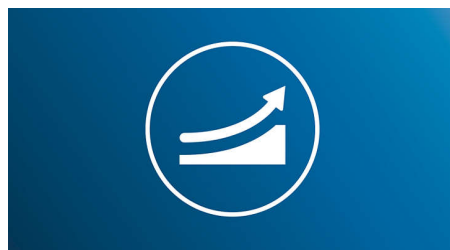

Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.

Характеристики

Мощность

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 2 недель

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Белый и голубой

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 2 года

Удобство использования

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Время работы: До 2 недель

Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

Зарядное устройство: 1

Насадки: G2 Optimal Gum Care — 1 шт.

Ручка: ProtectiveClean, 1 шт.

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет в 7 раз больше налета*

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен,

Снижает риск возникновения кариеса

Таймер: Функции Quadpacer и SmartTimer

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Gum Care (Уход за деснами): Мягкий массаж десен

Технология интеллектуального датчика

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

