




Philips Sonicare
ProtectiveClean 4500
„Sonic“ elektrinis dantų
šepetėlis

Integruotas spaudimo jutiklis
2 valymo režimai
1 „BrushSync“ funkcija

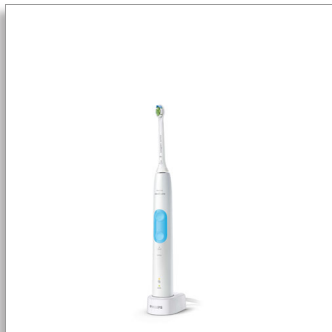

HX6888/90

Baltesni dantys. Švelnus valymas.

Baltesni dantys vos per 1 savaitę.

Pajuskite švelnaus dantų valymo skirtumą naudodami spaudimo jutiklį, džiaukitės baltesniais dantimis vos per 1 savaitę.

Proven to improve oral health

- Baltesni dantys vos per savaitę

Innovative technology

- Švelnus įspėjimas valyti švelniai ir nespaudžiant
- Pacientai gauna maksimalią naudą naudodami šias šepetėlių galvutes
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“
- Sujungia šepetėlio rankenėlę ir išmaniąsias šepetėlio galvutes

Improves patients' oral health

- Turite plombų, karūnėlių arba jautrių vietų? Nesijaudinkite.

Optimize your brushing

- Valymo ir balinimo režimas

Designed around your patient

- Puikus būdas priprasti prie naujojo dantų šepetėlio
- Skatinimas valytis kruopščiai

PHILIPS
sonicare

Ypatybės

Natūraliai baltesni dantys




Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiaugtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.

Valymo ir balinimo režimas



Norite sutelkti dėmesį į apnašų šalinimą arba itin gerą dantų poliravimą, mes jums padėsime: valymo režimas puikiai valo, o balinimo režimas puikiai šalina paviršines dėmes.

Saugiai ir švelniai

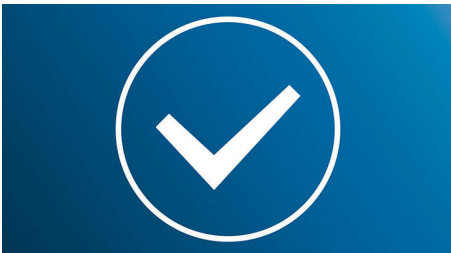

Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir apmautų dantų, ją galima naudoti siekiant išvengti sugedusių dantų ir kasdienei dantenu sveikatai gerinti.

Per daug spaudžiate?




Pacientai gali nepastebėti, kad valosi per stipriai, tačiau dantų šepetėlis tai pastebės. Jei pacientai pradės dantų šepetėlį spausti prie dantenu, jis pradės skleisti pulsuojančią garsą ir primins sumažinti spaudimą.

Technologija „BrushSync“



Technologija su integruotu lustu aptinka ir synchronizuoja išmaniąją šepetėlio galvutę su rankenėle. Išmanioji šepetėlio rankena ir išmaniosios šepetėlio galvutės kartu yra galingas derinys, dėl kurio veikia išmanieji keitimo priminimai.

Išmanusis galvutės keitimo priminimas

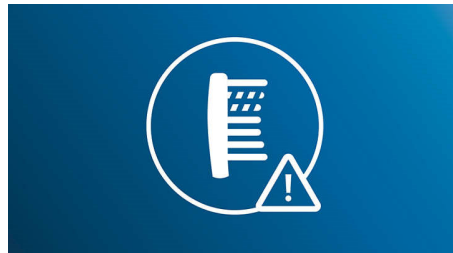

Visos šepetėlio galvutės bėgant laikui nusidėvi. Tačiau ir apie tai pagalvojome: mūsų išmanioji šepetėlio galvutės atpažinimo technologija stebi, kiek laiko pacientai naudojo šepetėlio galvutę ir kaip stipriai valė dantis. Kai ateis laikas ją pakeisti, apie tai perspės ant rankenos esantis indikatorius. Taip visada būsite tikri, kad

šepetėlio galvutė nuolatos valo nepriekaištingai.

Naudingi laikmačiai



Mūsų „QuadPacer“ perspėja pacientus, kai praeina pakankamai laiko valant kiekvieną burnos dalį, o „Smartimer“ praneša praėjus dviem rekomenduojamoms valymo minutėms.

„Philips Sonicare“ technologija



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Lengvos pradžios programa



Prie naujų dalykų reikia priprasti. Todėl mūsų lengvos pradžios programa suteikia galimybę palengva ir po truputį didinti valymo galią per pirmuosius 14 kartų naudojant naują dantų šepetėlį.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta ir švelniai mėlyna

Maitinimas

- Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

- Baterija: Pakartotinai įkraunama
- Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 2 savaičių
- Baterijos tipas: Ličio jonų

Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

- Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
- Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės
- Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo baterijos įkrovą
- Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Pridėti priedai

- Įkroviklis: 1
- Rankenėlė: 1 „ProtectiveClean“
- Šepetėlių galvutės: 1 „W2c Optimal White compact“

Valymo veiksmingumas

- Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.
- Nauda sveikatai: Padeda sumažinti ertmių
- Balinamoji nauda: Baltiesni dantys vos per savaitę
- Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai
- Atsakomoji reakcija į spaudimą: Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

Režimai

- „Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien
- Balta: Pašalina paviršines dėmes
- 2 intensyvumai: Žemas, Aukštas

Išmanioji jutiklinė technologija

- „BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes
- Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai



Išleidimo data 2022-05-03

Versija: 3.0.2

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Pašalina iki 7 kartų daugiau apnašų nei įprastas šepetėlis