

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
zobna ščetka

ProtectiveClean
5100

Vgrajeni senzor pritiska

3 načini

1 x funkcija BrushSync

Potovalna torbica



HX6859/68



Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.

Do 100 % bolj zdrave dlesni kot pri ročnem čiščenju

Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, in poskrbite za do 100 % bolj zdrave dlesni v primerjavi z ročno zobno ščetko

Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Varno in nežno na občutljivih predelih, ortodontskih in zobozdravstvenih popravkih
- Bolj beli zobje v samo enem tednu

Zasnova po vaši meri

- Spodbuda za temeljito ščetkanje
- Olajša vam potovanje

Inovativna tehnologija

- Obvešča vas, če pritiskate premočno
- Vedno pravočasno zamenjajte glavo ščetke
- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare
- Povezuje pametni ročaj ščetke in pametne glave ščetke

Izboljšajte ščetkanje

- Izbirajte med tremi načini


Značilnosti

Naravna belina zob



Pritrdite glavo ščetke W2 Optimal White za odstranjevanje površinskih madežev in najbolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev poskrbijo za bolj bele zobe v samo enem tednu.

Trije načini

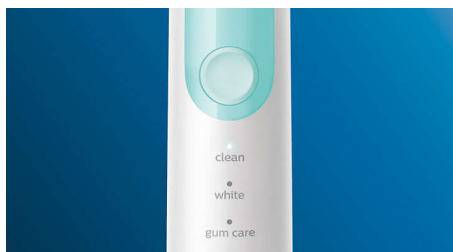

Ta zobna ščetka vam omogoča, da ščetkanje prilagodite svojim potrebam, saj imate na voljo tri načine. Standardni način Clean je namenjen vrhunskemu čiščenju, način White je idealen način za odstranjevanje površinskih madežev, z načinom Gum Care pa dodate minuto blagega ščetkanja z nežno masažo dlesni.

Varno in nežno



Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo lahko uporabljate na zobnih aparatih, plombah, kronah in prevlekah. Pomaga preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.

Tehnologija Philips Sonicare



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

Nadzorujte pritiskanje med ščetkanjem



S premočnim ščetkanjem lahko zobe in dlesni poškodujete. Da bi to preprečili, zobna ščetka Philips Sonicare ProtectiveClean začne oddajati nežne zvočne signale, s katerimi vas opozarja, da zmanjšajte pritisk.

Tehnologija BrushSync



Tehnologija mikročipa zazna in sinhronizira pametno glavo ščetke in pametni ročaj. Zmogljiva kombinacija pametnega ročaja in pametne glave ščetke zagotavlja, da prejimate pametne opomnike za zamenjavo.

Opomnik za zamenjavo BrushSync



Vse glave ščetke se sčasoma obrabijo. Toda naša tehnologija BrushSync nadzoruje trajanje uporabe glave ščetke in pritisk med ščetkanjem. Ko je čas za zamenjavo, vas na to opozorita lučka na ročaju in kratek zvočni signal. Tako ste lahko vedno prepričani, da vam glava ščetke zagotavlja vrhunsko čiščenje.

Priročni časovniki



Potrebuje električno zobno ščetko s časovnikom? Časovnik QuadPacer vas obvesti, ali ste posamezne dele ustne votline čistili dovolj časa, časovnik Smartimer pa vam sporoči, ko ščetkanje traja priporočeni dve minuti.

Priročna potovalna torbica in polnilnik



Naša vrhunska potovalna torbica omogoča higiensko shranjevanje zobne ščetke, kompaktni potovalni polnilnik pa skrbi za polno baterijo, ko ste na poti. S samo enim polnjenjem boste uživali v dveh tednih redne uporabe, polnilnik pa vam bo prišel prav na daljših potovanjih.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

Barva: Bela in svetlo modra

Napajanje

Napetost: 100–240 V, 50–60 Hz

Tehnične specifikacije

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 2 tedna

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje

baterije

Ročaj: Tanko ergonomska zasnova

Čas ščetkanja: Do 2 tedna

Opomnik za zamenjavo: Za stalno

zagotavljanje najboljših rezultatov, opozorilna ikona zasveti

Priloženi predmeti

Potovalna torbica: 1

Ročaj: 1 ProtectiveClean

Polnilnik: 1

Glave ščetke: 1 W2 Optimal White

Ultravijolični čistilnik: 1

Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min

Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni, Pomaga zmanjšati karies

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Povratne informacije o pritisku: Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Gum Care: Nežno masira dlesni

Bela: Odstranjuje površinske madeže

Tehnologija pametnega senzorja

Opomnik za zamenjavo BrushSync: Vedno boste vedeli, kdaj morate zamenjati glavo ščetke

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje premočno

