

# PHILIPS

## sonicare



Sonična električna  
zobna ščetka

ProtectiveClean 5100

Vgrajen senzor pritiska

3 načini

1 x funkcija BrushSync  
s čistilnikom



HX6850/57

## Bolj beli zobje. Na nežen način.

Bolj beli zobje v samo 1 tednu.

Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, in pobelite zobe v samo 1 tednu.

### Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Bolj beli zobje v samo enem tednu

### Zasnova po vaši meri

- Spodbuda za temeljito ščetkanje
- Olajša vam potovanje
- Vedno pravočasno zamenjajte glavo ščetke

### Inovativna tehnologija

- Obvešča vas, če pritiskate premočno
- Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare
- Povezuje pametni ročaj ščetke in pametne glave ščetke

### Izboljšajte ščetkanje

- Izbirajte med tremi načini

### Uniči bakterije in viruse na glavah ščetke

- UV-čistilnik uniči do 99% bakterij in virusov\*\*\*


# ProtectiveClean 5100

Sonična električna zobna ščetka

HX6850/57


## Značilnosti

### Naravna belina zob

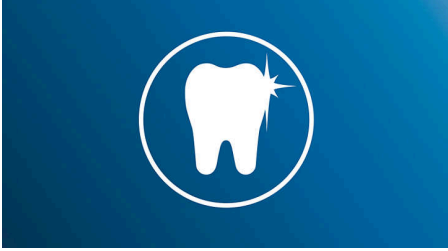

Pritrdite glavo ščetke W2 Optimal White, da odstranite površinske madeže in dosežete najbolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev poskrbijo za bolj bele zobe v samo enem tednu.

### Trije načini

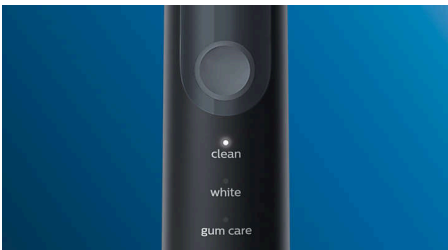

Ta zobna ščetka vam omogoča, da ščetkanje prilagodite svojim potrebam, saj imate na voljo tri načine. Standardni način Clean je namenjen vrhunskemu čiščenju, način White je idealen način za odstranjevanje površinskih madežev, z načinom Gum Care pa dodate minuto blagega ščetkanja z nežno masažo dlesni.

### Priložen UV-čistilnik



Ohranjajte glave ščetke Sonicare čiste s posebej zasnovanim čistilnikom Philips UV Sanitizer. Enostavno vstavite 1–2 glavi ščetke in pritisnite gumb. Očiščene so v 10 minutah. Uniči do 99 % bakterij in virusov, brez kemikalij.\*\*\*

### Nadzorujte pritiskanje med ščetkanjem



S premočnim ščetkanjem lahko zobe in dlesni poškodujete. Da bi to preprečili, zobna ščetka Philips Sonicare ProtectiveClean začne oddajati nežne zvočne signale, s katerimi vas opozarja, da zmanjšajte pritisk.

### Tehnologija BrushSync




Tehnologija mikročipa zazna in sinhronizira pametno glavo ščetke in pametni ročaj. Zmogljiva kombinacija pametnega ročaja in pametne glave ščetke zagotavlja, da prejimate pametne opomnike za zamenjavo.

### Opomnik za zamenjavo BrushSync



Vse glave ščetke se sčasoma obrabijo. Toda naša tehnologija BrushSync nadzoruje trajanje uporabe glave ščetke in pritisk med ščetkanjem. Ko je čas za zamenjavo, vas na to opozorita lučka na ročaju in kratek zvočni signal. Tako ste lahko vedno prepričani, da vam glava ščetke zagotavlja vrhunsko čiščenje.

### Priročni časovniki

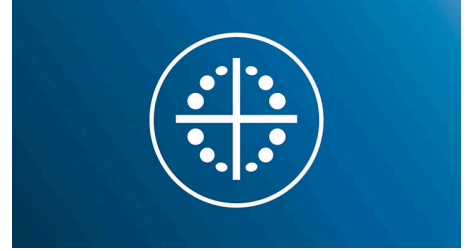

Potrebujete električno zobno ščetko s časovnikom? Časovnik QuadPacer vas obvesti, ali ste posamezne dele ustne votline čistili dovolj časa, časovnik Smartimer pa vam sporoči, ko ščetkanje traja priporočeni dve minuti.

### Tehnologija Philips Sonicare



Napredna sonična tehnologija Philips Sonicare omogoča izjemno dnevno čiščenje tako, da brizga vodo med zobe ter s ščetkami drgne in odstranjuje razpadle obloge.

### Priročna potovalna torbica in polnilnik



Naša vrhunska potovalna torbica omogoča higiensko shranjevanje zobne ščetke, kompaktni potovalni polnilnik pa skrbi za polno baterijo, ko ste na poti. S samo enim polnjenjem boste uživali v dveh tednih redne uporabe, polnilnik pa vam bo prišel prav na daljših potovanjih.

# ProtectiveClean 5100

Sonična električna zobna ščetka

HX6850/57

## Specifikacije

### Napajanje

Napetost: 110–220 V

### Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): 14 dni\*\*

Vrsta baterije: Litij-ionska

Poraba energije: Izklopljeno stanje < 0,3 W,

Stanje pripravljenosti brez prikaza < 0,5 W

### Zasnova in izdelava

Barva: Črna/siva

### Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

### Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrldjive glave ščetke

Ročaj: Tanka ergonomska zasnova

Indikator baterije: Lučka prikazuje stanje baterije

Prepoznavanje glave ščetke: Sinhronizira se z optimalnim načinom

Opomnik za zamenjavo: Za stalno zagotavljanje najboljših rezultatov, opozorilna ikona zasveti

### Priloženi predmeti

Ročaj: 1 x ProtectiveClean

Glave ščetke: 1 x W2 Optimal White

Potovalna torbica: 1

Polnilnik: 1

Ultravijolični čistilnik: 1

### Učinkovitost čiščenja

Pozitivni vplivi na zdravje: Pomaga zmanjšati karies

Zmogljivost: Uniči do 99% bakterij, in virusov\*\*\*

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

Prispeva k bolj belim zobem: Zobe pobeli v 1 tednu

Hitrost: Do 62.000 gibov ščetke/min

Povratne informacije o pritisku: Z vibriranjem ročaja opozarja uporabnika

Čistilnik: Izdelan za čiščenje, glave zobne ščetke Sonicare, Samodejni izklop po, 10-minutnem ciklu, Enostavna in varna uporaba, s pritiskom gumba, Vgrajena ščetka Sonicare, polnilnik\*\*

### Načini

Clean: Za izjemno vsakodnevno čistočo

Gum Care: Nežno masira dlesni

Bela: Odstranjuje površinske madeže

### Tehnologija pametnega senzorja

Senzor pritiska: Opozori, ko je ščetkanje premočno

Opomnik za zamenjavo BrushSync: Vedno boste vedeli, kdaj morate zamenjati glavo ščetke

