

PHILIPS

sonicare



„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

ProtectiveClean 4700

Integruotas spaudimo jutiklis

2 valymo režimai

1 „BrushSync“ funkcija



HX6483/52

Švaresni dantys. Švelnus valymas.

Pašalinama iki 10 kartų daugiau apnašų nei valant rankiniu šepetėliu

Pajuskite švelnaus valymo skirtumą naudodami spaudimo jutiklį ir pašalindami iki 10 kartų daugiau apnašų nei valydami rankiniu šepetėliu.

Proven to improve oral health

- Didesnis sąlytis su paviršiumi, kad būtų pašalintos apnašos

Innovative technology

- Švelnus įspėjimas valyti švelniai ir nespaudžiant
- Pacientai gauna maksimalią naudą naudodami šias šepetėlių galvutes
- Sujungia šepetėlio rankenėlę ir išmaniąsias šepetėlio galvutes
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“

Optimize your brushing

- „Clean“ ir „Gum care“ režimai

Designed around your patient

- Puikus būdas priprasti prie naujojo dantų šepetėlio
- Skatinimas valytis kruopščiai

ProtectiveClean 4700

„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX6483/52

Ypatybės

Pašalina iki 10 kartų daugiau apnašų*



Giliausiai valanti „C3 Premium Plaque Control“ šepetėlio galvutė. Ji turi minkštus, lanksčius kraštus, o šereliai prisitaiko prie dantų paviršiaus formos, kad sąlytis su paviršiumi būtų 4 kartus didesnis** ir pašalintų iki 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose*.

Per daug spaudžiate?



Pacientai gali nepastebėti, kad valosi per stipriai, tačiau dantų šepetėlis tai pastebės. Jei pacientai pradės dantų šepetėlį spausti prie dantenų, jis pradės skleisti pulsuojančią garsą ir primins sumažinti spaudimą.

„Clean“ ir „Gum care“ režimai



Norite sutelkti dėmesį į apnašų šalinimą arba į sveikos dantenų būklės palaikymą, šepetėlyje yra jums tinkamas režimas: valymo režimas puikiai


valo, o dantenų priežiūros režime pridedama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasažuotumėte dantenas.

Technologija „BrushSync“



Technologija su integruotu lustu aptinka ir sinchronizuoja išmaniąją šepetėlio galvutę su rankenėle. Išmanioji šepetėlio rankena ir išmaniosios šepetėlio galvutės kartu yra galingas derinys, dėl kurio veikia išmanieji keitimo priminimai.

Išmanusis galvutės keitimo priminimas

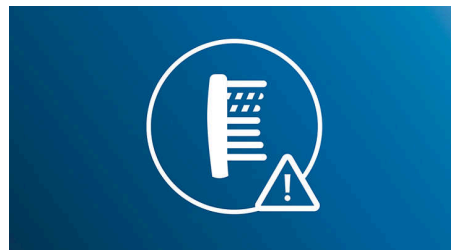


Visos šepetėlio galvutės bėgant laikui nusidėvi. Tačiau ir apie tai pagalvojome: mūsų išmanioji šepetėlio galvutės atpažinimo technologija stebi, kiek laiko pacientai naudojo šepetėlio galvutę ir kaip stipriai valė dantis. Kai ateis laikas ją pakeisti, apie tai perspės ant rankenos esantis indikatorius. Taip visada būsite tikri, kad šepetėlio galvutė nuolatos valo nepriekaištingai.

Lengvos pradžios programa



Prie naujų dalykų reikia priprasti. Todėl mūsų lengvos pradžios programa suteikia galimybę palengva ir po truputį didinti valymo galią per pirmuosius 14 kartų naudojant naują dantų šepetėlį.

Naudingi laikmačiai

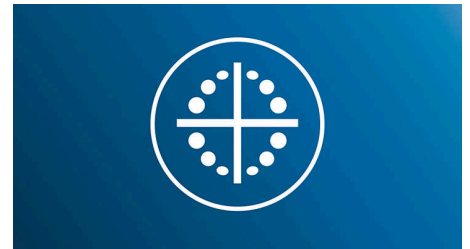

Mūsų „QuadPacer“ perspėja pacientus, kai praeina pakankamai laiko valant kiekvieną burnos dalį, o „Smartimer“ praneša praėjus dviem rekomenduojamoms valymo minutėms.

„Philips Sonicare“ technologija



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

ProtectiveClean 4700

„Sonic“ elektrinis dantų šepetėlis

HX6483/52

Specifikacijos

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki

išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Energijos sąnaudos: Budėjimo režimu be ekrano
<0,5 W

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta, mėtinė

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos
šepetėlio galvutės

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo
baterijos įkrovą

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 „ProtectiveClean“

Šepetėlių galvutės: 1 „C3 Premium Plaque
Control“, 1 „G3 Premium Gum Care“, 1 „W2c
Optimal White compact“

Kelioninis dėklas: Kietas kelioninis dėklas

Įkroviklis: 1

Valymo veiksmingumas

„Performance“: Pašalina iki 10 kartų daugiau
apnašų*

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Nauda sveikatai: Padeda sumažinti ertmių

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“

laikmačiai

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Naudotojas
įspėjamas rankenėlės vibravimu

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

„Gum Care“: Švelniai masažuoja danteną

Išmanioji jutiklinė technologija

Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai
„BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite,
kada keisti šepetėlio galvutes

