

PHILIPS

sonicare

„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

ProtectiveClean
4300

Integruotas spaudimo jutiklis

1 valymo režimas

1 „BrushSync“ funkcija



HX6888/98



Sveikesnės dantenos. Švelnus valymas.

Iki 100 % pagerinkite dantenu sveikatą, palyginti su rankiniu valymu

Pajuskite skirtumą švelniai valydami su mūsų spaudimo jutikliu ir iki 100 % pagerindami dantenu sveikatą, palyginti su įprastu dantų šepetėliu

Proven to improve oral health

- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“

Innovative technology

- Švelnus įspėjimas valyti švelniai ir nespaudžiant
- Pacientai gauna maksimalią naudą naudodami šias šepetėlių galvutes
- Sujungia šepetėlio rankenėlę ir išmaniąsias šepetėlio galvutes

Improves patients' oral health

- Dantenos iki 100 % sveikesnės*
- Turite plombų, karūnelių arba jautrių vietų? Nesijaudinkite.

Designed around your patient

- Puikus būdas priprasti prie naujojo dantų šepetėlio
- Skatinimas valytis kruopščiai

Ypatybės

Gerina dantenų sveikatą



Tankūs, geros kokybės šereliai papildomai valo apnašas palei dantenų liniją, kad dantenos būtų iki 100 % sveikesnės, lyginant su valymu įprastu dantų šepetėliu. Dėl specialiai lenkto galiuko lengvai pasieksite galinius dantis.

Per daug spaudžiate?



Pacientai gali nepastebėti, kad valosi per stipriai, tačiau dantų šepetėlis tai pastebės. Jei pacientai pradės dantų šepetėlį spausti prie dantenų, jis pradės skleisti pulsuojančią garsą ir primins sumažinti spaudimą.

Saugiai ir švelniai



Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnelės, turint plombų ir


apmautų dantų, ją galima naudoti siekiant išvengti sugedusių dantų ir kasdieni dantenų sveikatai gerinti.

„Philips Sonicare“ technologija



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Išmanusis galvutės keitimo priminimas

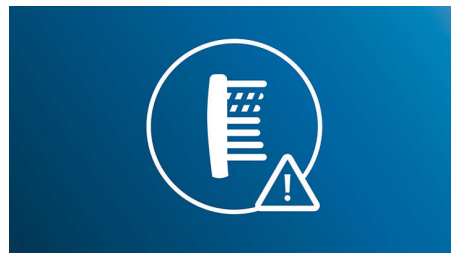


Visos šepetėlio galvutės bėgant laikui nusidėvi. Tačiau ir apie tai pagalvojome: mūsų išmanioji šepetėlio galvutės atpažinimo technologija stebi, kiek laiko pacientai naudojo šepetėlio galvutę ir kaip stipriai valė dantis. Kai ateis laikas ją pakeisti, apie tai perspės ant rankenos esantis indikatorius. Taip visada būsite tikri, kad šepetėlio galvutė nuolatos valo neprikaištingai.

Technologija „BrushSync“




Technologija su integruotu lustu aptinka ir sinchronizuoja išmaniąją šepetėlio galvutę su rankenele. Išmanioji šepetėlio rankena ir išmaniosios šepetėlio galvutės kartu yra galingas derinys, dėl kurio veikia išmanieji keitimo priminimai.

Naudingi laikmačiai

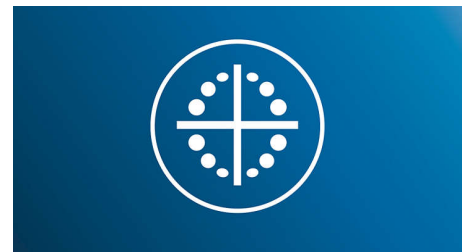

Mūsų „QuadPacer“ perspėja pacientus, kai praeina pakankamai laiko valant kiekvieną burnos dalį, o „Smartimer“ praneša praėjus dviem rekomenduojamoms valymo minutėms.

Lengvos pradžios programa

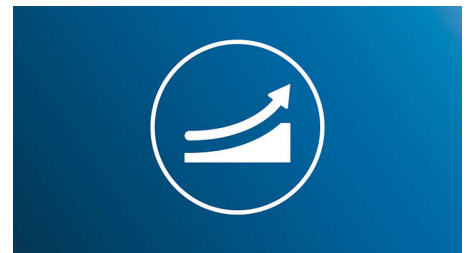

Prie naujų dalykų reikia priprasti. Todėl mūsų lengvos pradžios programa suteikia galimybę palengva ir po truputį didinti valymo galią per pirmuosius 14 kartų naudojant naują dantų šepetėlį.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

Spalva: Mėlyna „Mid-Blue“

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Baterijos tipas: Ličio jonų

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Rankenos suderinamumas: Lengvai

tvirtinamos šepetėlio galvutės

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo baterijos įkrovą

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Pakeitimo priminimas: Kad visada užtikrintų geriausius rezultatus, užsidega priminimo piktograma

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Rankenėlė: 1 „ProtectiveClean“

Šepetėlių galvutės: 1 „G3 Premium Gum Care“, 1 „InterCare“ standartinė, 1 „W2c Optimal White compact“

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites, Padeda sumažinti ertmių

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

Išmanioji jutiklinė technologija

„BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes

Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai

