

PHILIPS

sonicare

Szónikus
elektromos fogkefe

ProtectiveClean
4500

Beépített nyomásérzékelő

2 tisztítási mód

1 BrushSync funkció



HX6888/89



Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.

Akár 100%-kal egészségesebb fogíny a kézi fogkeféhez képest.

Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben akár 100%-kal egészségesebbé teheti fogínyét, mint egy kézi fogkefével.

Az Ön igényeihez tervezve

- Alapos fogmosásra ösztönöz

Innovatív technológia

- Gyengéden óvatosságra int
- A páciensek a legtöbbet hozhatják ki a kefefejekből
- Összeköti az intelligens fogkefemarkolatot és az intelligens kefefejeket
- Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt
- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

Javítja a páciensek szájhygiénáját

- Tömések, koronák, érzékeny területek? Nem kell aggódnia.

Optimalizálja a fogmosást

- Clean (Tisztítás) és Gum Care (Fogínyápolás) mód

Páciensei igényeihez tervezve

- Nagyszerű módszer arra, hogy megszokja új fogkefét


Fénypontok

Egészségesebb fogíny



Az InterCare fogkefefej a sűrűn elhelyezkedő, különlegesen hosszú, kiváló minőségű sörtéknek köszönhetően eltávolítja a lepedéket a fogközökből. Továbbá mindössze két hét alatt klinikailag igazoltan csökkenti a fogínyvérzést és a fogínygyulladást.

Clean (Tisztítás) és Gum Care (Fogínyápolás) mód

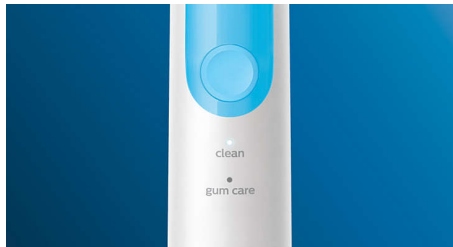

Akár a lepedék eltávolítása a cél, akár az íny egészségének a megőrzése, megvan a módja: a Clean (Tisztítás) mód kimagasló tisztítást tesz lehetővé, míg a Gum Care (Fogínyápolás) mód egy további percig csökkentett üzemmódban működik, ami alatt gyengéden masszírozhatja az ínyét.

Gyengéd és biztonságos



Biztos lehet abban, hogy biztonságos a fogmosás: szónikus technológiánk alkalmazható fogszabályzó, tömés, korona és héj esetén is, emellett elősegíti a fogszuvasodás megelőzését és a fogíny egészségének megőrzését.

Philips Sonicare technológia



A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

Túl nagy nyomás?




Lehet, hogy a páciensek nem veszik észre, ha túl erősen mosnak fogat, de a fogkefájük igen. Ha túl nagy nyomást fejtenek ki az ínyre, a fogkefe pulzáló hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentsék a nyomást.

BrushSync technológia




A mikrochip technológia észleli és szinkronizálja az intelligens kefefejet az intelligens markolattal. Az intelligens markolat és az intelligens kefefej tökéletes párost alkot, lehetővé teszi az intelligens csere- emlékeztetőt.

Intelligens csere-emlékeztetők

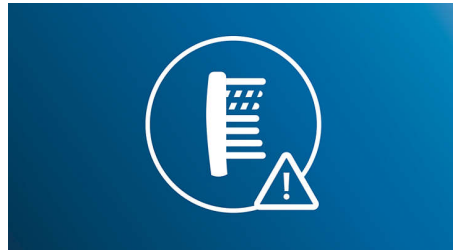

Minden fogkefe elhasználódik egy idő után. Azonban az intelligens kefefej-felismerés technológiánk nyomon követi, hogy egy páciens mennyi ideje használja a fogkefefejet, és hogy milyen erős nyomást fejt ki. Ha itt az idő a cserére, a markolaton egy jelzőfény figyelmeztet erre. Így biztos lehet abban, hogy fogkefeje mindig jó munkát végez.

Hasznos időzítők

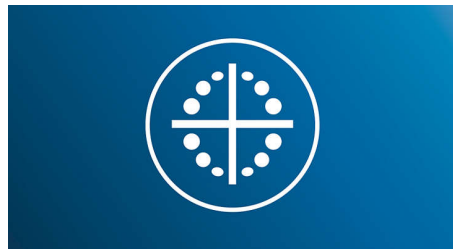

Szeretne egy időzítővel rendelkező elektromos fogkefét? A QuadPacer jelez, amikor optimális időt töltött a szája egy adott részének tisztításával, a SmarTimer pedig jelzi, hogy mikor telt le a fogmosáshoz ajánlott két perc.

Egyszerű bevezető program



Amikor valami újba fogunk, eltarthat egy kis ideig, amíg hozzászokunk. Bevezető programunk segítségével új fogkefeje első 14 használata során lehetősége van fokozatosan és gyengéd lépésekben növelni a fogkefe tisztítóerejét.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telítől üresig): Akár 2 hét

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér és középkék

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen rápattintható kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az

akkumulátor töltöttségi állapotát

Fogmosási idő: Akár 2 hét

Tartozékok

Töltő: 1

Kefefejek: 1 ic InterCare kompakt

Markolat: 1 ProtectiveClean

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Egészségügyi előnyök: Segíti a fogszuvasodás csökkentését

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer időzítő

Nyomásvisszajelzés: A markolat rezgésével figyelmezteti a használót

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Gum Care (Fogínyápolás): Gyengéden átmasszírozza az ínyt

Intelligens érzékelőtechnológia

BrushSync csere- emlékeztető: Mindig tudni fogja, mikor, cserélje ki a kefefejeket

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet

