

# PHILIPS

## sonicare

Szónikus  
elektromos fogkefe

ProtectiveClean  
4500

Beépített nyomásérzékelő

2 tisztítási mód

1 BrushSync funkció



HX6888/90



## Fehérebb fogak. Kíméletesen.

Fehérebbé teszi a fogakat mindössze 1 héten belül.

Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben 1 hét alatt fehérebbé teszi a fogait.

### **Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát**

- Fehérebbé teszi a fogakat mindössze egy héten belül

### **Innovatív technológia**

- Gyengéden óvatosságra int
- A páciensek a legtöbbet hozhatják ki a kefefejekből
- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája
- Összeköti az intelligens fogkefemarkolatot és az intelligens kefefejeket

### **Javítja a páciensek szájhygiéniáját**

- Tömések, koronák, érzékeny területek? Nem kell aggódnia.

### **Optimalizálja a fogmosást**

- Clean és White üzemmód

### **Páciensei igényeihez tervezve**

- Nagyszerű módszer arra, hogy megszokja új fogkeféjét
- Alapos fogmosásra ösztönöz

# Fénypontok

## Természetesen fehérebb fogak



Illessze a fogkefére a W2 Optimal White kefefejet a felületi lerakódások eltávolításához és a fehérebb mosolyhoz. Klinikai tesztekkel bizonyított, hogy a sűrűn elhelyezkedő sörték alkotta középső feltöltőtároló betét révén mindössze egy héten belül fehérebbé teszi a fogakat.

## Clean és White üzemmód



Akár a lepedék eltávolítása a cél, akár ragyogó fogfelületre törekszik, megvan a módja: A Clean (Tisztítás) mód a hatékony tisztításhoz megfelelő, a White (Fehérités) mód pedig ideális a felületi lerakódások eltávolításához.

## Gyengéd és biztonságos



Biztos lehet abban, hogy biztonságos a fogmosás: szónikus technológiánk alkalmazható fogszabályzó, tömés, korona és héj esetén is, emellett elősegíti a fogszuvasodás megelőzését és a fogíny egészségének megőrzését.

## Túl nagy nyomás?




Lehet, hogy a páciensek nem veszik észre, ha túl erősen mosnak fogat, de a fogkefájük igen. Ha túl nagy nyomást fejtenek ki az ínyre, a fogkefe pulzáló hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentsék a nyomást.

## BrushSync technológia



A mikrochip technológia észleli és szinkronizálja az intelligens kefefejet az intelligens markolattal. Az intelligens markolat és az intelligens kefefej tökéletes párost alkot, lehetővé teszi az intelligens csere- emlékeztetőt.

## Intelligens csere-emlékeztetők

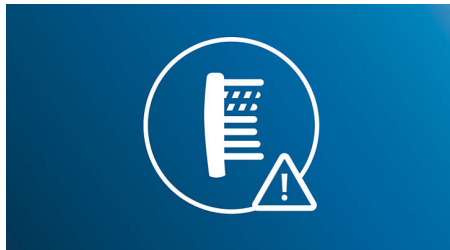

Minden fogkefe elhasználódik egy idő után. Azonban az intelligens kefefej-felismerés technológiánk nyomon követi, hogy egy páciens mennyi ideje használja a fogkefefejet, és hogy milyen erős nyomást fejt ki. Ha itt az idő a cserére, a markolaton egy jelzőfény figyelmeztet erre. Így biztos lehet abban, hogy fogkefeje mindig jó munkát végez.

## Hasznos időzítők



A QuadPacer jelez, amikor a páciens optimális időt töltött a szája egy adott részének tisztításával, a Smartimer pedig jelzi, hogy mikor telt le a fogmosáshoz ajánlott két perc.

## Philips Sonicare technológia



A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

## Egyszerű bevezető program



Amikor valami újba fogunk, eltarthat egy kis ideig, amíg hozzászokunk. Bevezető programunk segítségével új fogkefeje első 14 használata során lehetősége van fokozatosan és gyengéd lépésekben növelni a fogkefe tisztítóerejét.

# Műszaki adatok

## Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

## Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

## Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fehér és középkek

## Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

## Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen rápatintható kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

**Töltöttségjelző:** A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát  
**Fogmosási idő:** Akár 2 hét

## Tartozékok

Töltő: 1

Markolat: 1 ProtectiveClean

Kefefejek: 1 W2c Optimal White kompakt

## Fogmosási teljesítmény

**Sebesség:** Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

**Egészségügyi előnyök:** Segíti a fogszuvasodás csökkentését

**Fehérítő hatás:** Fehérebbé teszi a fogakat 1 héten belül

**Időzítő:** Quadpacer vezető és SmarTimer

időzítő

**Nyomásvisszajelzés:** A markolat rezgésével figyelmezteti a használat

## Módok

**Clean:** A kivételes mindennapos tisztaságért

**White:** eltávolítja a felületi lerakódásokat

**2 intenzitási szint:** Alacsony, Magas

## Intelligens érzékelőtechnológia

**BrushSync csere-émlékeztető:** Mindig tudni fogja, mikor, cserélje ki a kefefejeket

**Nyomásérzékelő:** Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet

