

PHILIPS

sonicare

Sonisk, elektrisk
tannbørste med app

DiamondClean
Smart 9400

Personlig veiledning

Smarte børstehodesensorer

Anerkjent smart børstehode

Fire moduser og tre
intensitetsnivåer

HX9917/89



Komplett pleie for en sunnere munn

Føl deg trygg med 100 % dekning

DiamondClean Smart 9400 er vår beste tannbørste og gir komplett pleie. Med de fire børstehodene med høy ytelse kan du fokusere på alle områder innen tannpleie, og Smart Sensor-teknologien gir deg personlig tilpasset veiledning og tilbakemeldinger.

Bevist at den forbedrer munnhygien

- Fjerner opptil 20 ganger mer plakk* for en grundigere tannpuss

Personlig tilpasset coaching i appen gir en perfekt tannpuss

- Gir 100 % dekning ved å gå tilbake til områder du har oversett
- Sier ifra når du trykker for hardt
- Ta bedre hånd om problemområdene
- Veileder deg til å pusse og peker ut områder du har oversett
- Hjelper deg med å skrubbe mindre

Optimaliser tannpussen

- Børstehodene velger automatisk de mest optimale innstillingene
- Velg mellom fire modi og tre intensitetsinnstillinger
- Enkel og flott lading – hjemme og borte
- Sørg for at du får mest mulig ut av børstehodet

DiamondClean Smart 9400

Sonisk, elektrisk tannbørste med app

HX9917/89

Høydepunkter

Si farvel til plakk




Klikk på G3 Premium Plaque-børstehodet for å oppleve den grundigste tannpussen noensinne. De myke, fleksible sidene gjør at børstehårene kan tilpasse seg formen til alle tannoverflater. Du får opptil fire ganger så stor kontaktflate** og opptil 20 ganger så mye plakkfjerning i områder som er vanskelige å nå*.

4 modi og 3 intensitetsinnstillinger




Med DiamondClean Smart får du alt på ett brett. De tre intensitetsinnstillingene gir mer kraft til tannpussen, og de fire modiene dekker alle pussebehovene dine: Clean-modusen gir enestående daglig rengjøring, White+ fjerner misfarging, Deep Clean+ gir en oppfriskende og grundig tannpuss, og Gum Health rengjør skånsomt langs tannkjøttrenden.

Aldri overse områder

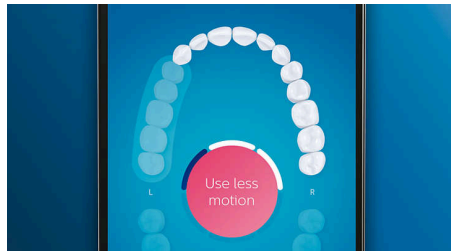


Philips Sonicare-appen sier ifra når du har oppnådd en grundig rengjøring, og veileder deg til å bli en bedre og mer oppmerksom tannpusser.

TouchUp-funksjonen

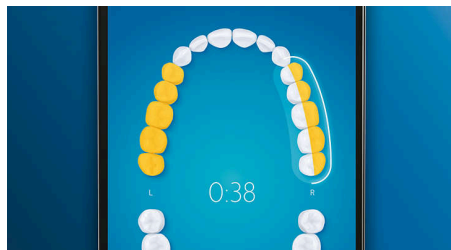

Hvis du tilfeldigvis går glipp av noen områder under pusseøkten, vil appens TouchUp-funksjon vise deg disse områdene. Dermed kan du ta en omgang til og være sikker på at du får en grundig tannpuss hver gang.


Smarte påminnelser om utskiftning

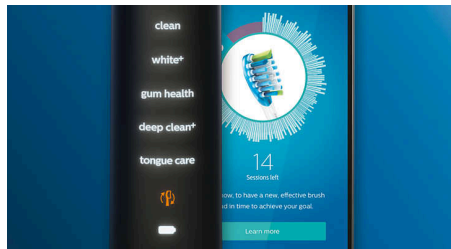

Børstehodet slites ut med tiden og fjerner ikke plakk like effektivt. Med smart børstehodeidentifisering glemmer du aldri når


det er på tide å skifte det ut. Tannbørsten holder styr på hvor lenge og hardt du har børstet med børstehodet, og viser et varsel når det er på tide å skifte det ut. Du kan også følge med på levetiden til børstehodene i Philips Sonicare-appen og bestille reservedeler, slik at du alltid har nye børstehoder når du trenger det.

Fokusområder og målinnstilling

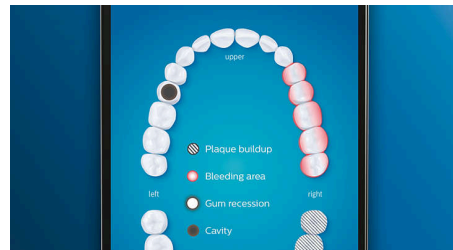

Har tannlegen vist deg noen problemområder? Vi markerer dem i appen med et kart over munnen din i 3D og forteller deg hvilke områder du må fokusere litt ekstra på.

Trykker du for hardt?

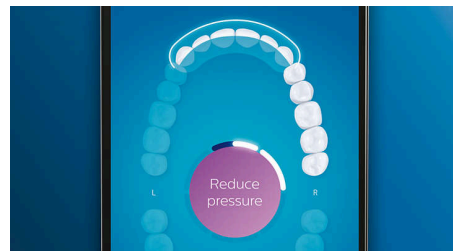

Det er ikke alltid du merker at du pusser for hardt, men DiamondClean Smart vil alltid merke det. Hvis du trykker for hardt, blinker lysringen nederst på håndtaket. Dette er en forsiktig påminnelse om at du må bruke mindre trykk og la børstehodet gjøre jobben for deg. Syv av ti personer som ble spurt svarte at denne funksjonen har hjulpet dem å pusse tennene bedre.

DiamondClean Smart 9400

Sonisk, elektrisk tannbørste med app

HX9917/89


Høydepunkter

Lekende lett



Med en elektrisk tannbørste lar du børstehodet gjøre jobben. Vi har laget en børstesensor i skaftet som diskre minner deg på å skrubbe mindre. På den måten kan du forbedre børsteteknikken og få en mer skånsom og mer effektiv rengjøring.

BrushSync-paring

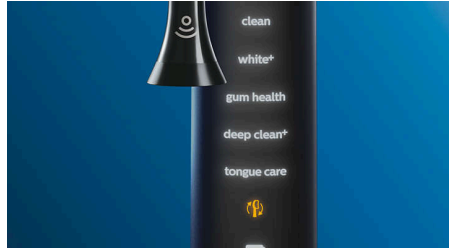

Er du usikker på hvilken innstilling og intensitet du skal bruke? En mikrochip i børstehodet forteller DiamondClean Smart hvilken du bruker. Hvis du for eksempel setter på et børstehode for pleie av tannkjøttet, velger tannbørsten den mest optimale innstillingen og den intensiteten som gir en skånsom, men effektiv pleie av tannkjøttet. Alt du trenger å gjøre er å trykke på knappen.

Designet med tanke på oppbevaring



Du kan bruke DiamondClean Smart i opptil tre uker på bare én lading. Hjemme lader du tannbørsten enkelt ved å sette den i det fine glasset. Hvis du er på reise, fungerer også det flotte reiseetuiet som lader. Legg tannbørsten i etuiet, og koble det enten til en bærbar datamaskin eller et vegguttak med en USB-kabel. Den medfølgende børstehodeholderen bidrar til å holde børstehodene rene og ryddige.

DiamondClean Smart 9400

Sonisk, elektrisk tannbørste med app

HX9917/89

Spesifikasjoner

Produktoppdatering

Støtteperiode: Philips vil levere de nødvendige sikkerhetsoppdateringene til og med 31. desember 2026.

Tilkoblingsmuligheter

Trådløs Bluetooth®-teknologi: Børsteapp tilkoblet

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): 14 dager***

Batteritype: Litium-ION

Consumer Trade Item

Height: 25.15 cm

Width: 17.4 cm

Length: 11.13 cm

Net weight: 0.879 kg

Gross weight: 1.113 kg

GTIN: 8710103993872

Country of origin: CN

Pappkartong

Height: 27.4 cm

Width: 35.7 cm

Length: 18.9 cm

Net weight: 2.637 kg

Gross weight: 3.688 kg

GTIN: 18710103993879

Utforming og utseende

Farge: Svart

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Pallet Layer

Height: 27.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Kompatibilitet

Android-kompatibilitet: Android OS 8.0 eller nyere

iOS-kompatibilitet: iPhone på iOS 13.0 eller nyere

Brukervennlighet

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets levetid

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Gjenkjenning av børstehode: Synkroniserer med optimal modus

Byttepåminnelse: Sikrer alltid best mulige resultater, påminnelsesikonet lyser opp

Deler som medfølger

Håndtak: 1 DiamondClean Smart

Reiseetui: USB-ladende reiseetui

Børstehoder: 1 All in-1 Premium-børstehode, 1 G3 Premium Gum Care

Oppladende glass: 1

Rengjøring

Ytelse: Fjerner opptil 20 ganger så mye plakk*

Hastighet: Opptil 62 000 børstebevegelser/min

Tidsbryter: BrushPacer og SmarTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Ring som lyser opp med et lilla lys, Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

TouchUp: Gir 100 % dekning

Moduser

Tre intensiteter: Lav, Middels stor, Høy

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Deep Clean+: For en oppfriskende, grundig tannpuss

For sunt tannkjøtt: For skånsom og effektiv rengjøring av tannkjøttet

White+: For å fjerne misfarging

Paring i BrushSync-modus

G3 Premium Gum Care-børstehode: Paring med Gum Health-modus

All-in-One Premium: Pares med Clean-modus

Teknologi med Smart-sensor

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

Områdesensor: Sporer og forbedrer dekningen

Skrubbesensor: Veileder deg til å redusere skrubbing

3D-kart av munnen: Fremhever problemområder

TouchUp: Gjør deg oppmerksom på områder du har oversett

Programvarestøtte

Programvareoppdateringer: Philips tilbyr relevante programvareoppdateringer i to år etter kjøpsdatoen.

